

PHILIPS

Dispositivo de depilación
IPL con SenseIQ

Lumea IPL Serie 9000

Sensor SmartSkin

4 accesorios inteligentes: cuero,
cara, zona del bikini y axilas

Aplicación Lumea IPL

Uso con y sin cable



BRI958/00



Di adiós al vello durante 12 meses*

Disfruta de una piel suave y sin vello durante 12 meses*

La depilación IPL más eficaz, 12 meses después de un ciclo de tratamiento completo.** La tecnología IPL con SenseIQ elimina de forma duradera el vello corporal desde la comodidad de su hogar. Consiga una piel suave como en el salón de estética gracias a la guía personalizada de la APP de Lumea IPL.

Suavidad y eficacia para conseguir una piel sedosa por más tiempo

- Desarrollado con dermatólogos para ser fácil y efectivo
- Realice el tratamiento solo 2 veces al mes para obtener resultados rápidos
- El único sistema Lumea con opción sin cable

Solución completa para cara y cuerpo

- Solución completa para la cara y el cuerpo con 4 accesorios inteligentes
- Adecuado para la mayoría de tonos de piel y colores de vello

Tratamiento personalizado IPL para eliminar el vello

- Optimiza tu rutina con la app Philips Lumea IPL
- Suavidad y comodidad con SenseIQ


Destacados

4 accesorios inteligentes




Los accesorios especialmente diseñados se adaptan perfectamente a las curvas del cuerpo y activan los programas más eficaces para cada zona del cuerpo cuando están conectados. Cara: diseño plano y pequeña ventana con filtro UV. Cuerpo: curvado hacia dentro con una ventana grande. Bikini y axilas: curvado hacia fuera para zonas de difícil acceso.

Aplicación Philips Lumea IPL

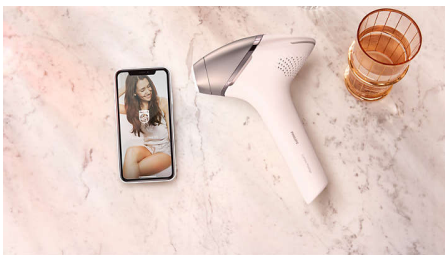

Nuestra aplicación de asesoramiento gratuita te ayuda a planificar y cumplir tu programa de tratamiento, y te guía paso a paso en cada sesión. Descargada por más de 2,1 millones de usuarios.

Desarrollado junto con dermatólogos

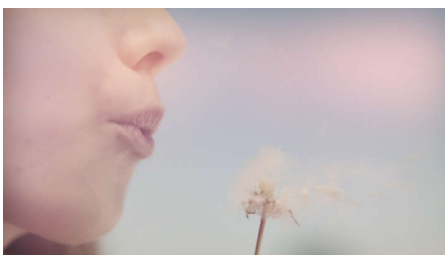

Como líderes en la tecnología sanitaria, Philips ha desarrollado Lumea IPL consultándolo con dermatólogos, para un uso

fácil y efectivo desde la seguridad de tu hogar. Derivado de la tecnología utilizada en los salones profesionales, Lumea IPL ofrece un tratamiento suave, incluso en zonas sensibles.

2 veces al mes para obtener resultados rápidos




Para empezar úsala cada dos semanas: la mitad de tratamientos que otras marcas. Seguidos de una sesión de retoque una vez al mes. Eso es todo. Depilar ambas medias piernas solo requiere 8,5 minutos.

Tecnología SenseIQ



Lumea serie 9000 dispone de cinco ajustes de luz fácilmente ajustables. Nuestro sensor SmartSkin lee el tono de tu piel y te ayuda a encontrar el ajuste más cómodo. Los accesorios inteligentes adaptan el tratamiento a cada zona del cuerpo.

Sin cable si así quieres

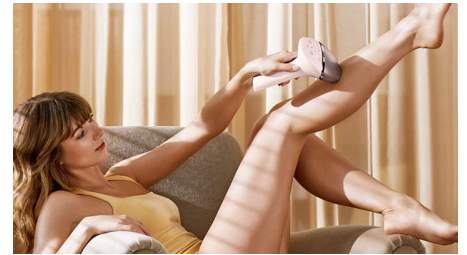

Para mayor comodidad, Lumea serie 9000 es nuestro único sistema IPL inalámbrico, lo que permite llegar fácilmente a cualquier zona con precisión y utilizarlo desde cualquier lugar.

Para la mayoría de tipos de piel y vello



IPL necesita contraste entre el pigmento del color del vello y el pigmento del tono de la piel, por lo que funciona con vello natural rubio oscuro, castaño y negro, así como con tonos morenos de piel, de normal a oscuro (I-V).

Especificaciones

Especificaciones técnicas de los accesorios

Accesorio para el tratamiento corporal:

Forma: curva convexa, Tamaño de la ventana: 4,1 cm², Tratamiento personalizado para el cuerpo: piernas, brazos y abdomen

Accesorio para el tratamiento facial: Forma: plana, Tamaño de la ventana: 2 cm², filtro adicional, Tratamiento personalizado para la cara: labio superior, barbilla y mandíbula

Accesorio para el tratamiento de la zona del bikini: Forma: curvada cóncava, Tamaño de la ventana: 3 cm², Tratamiento personalizado para la sensible zona del bikini

Accesorio para el tratamiento en las axilas: Forma: curvada cóncava, Tamaño de la ventana: 3 cm², Tratamiento personalizado para las axilas

Seguridad y posiciones ajustables

Filtro UV integrado: Protege la piel de los rayos UV

Cinco posiciones de energía de luz: Se adapta

a tu tipo de piel

Sistema de seguridad integrado: Evita que se produzcan pulsos de luz accidentales

Sensor de tono de piel: Detecta tu tono de piel

Sensor SmartSkin: El ajuste adecuado a petición

Modo de aplicación

Deslizamiento y flash: Para aplicación rápida

Uso con/sin cable: Uso con y sin cable

Sello y flash: Para el tratamiento de zonas pequeñas

Especificaciones técnicas

Tipo de batería: Batería recargable

Tensión: 100-240 V

Lámpara de alto rendimiento: Diseño duradero, proporciona 450.000 pulsos, equivalente a 39 años de vida útil de la lámpara**

Servicios

Garantía: 2 años de garantía completa y 1 año adicional de garantía al registrar el producto en 90 días

Elementos incluidos

Instrucciones de uso: Manual del usuario

Almacenamiento: Funda de lujo

Adaptador: 19,5 V/4000 mA

Tiempo de aplicación

Media pierna: 8,5 min.

Axilas: 2,5 minutos

Zona del bikini: 2 min

Cara: 1,5 minutos



* Reducción del vello media después de 12 tratamientos: 86% en medias piernas, 70% en la línea del bikini y 67% en las axilas

** Al seguir el programa de tratamiento. Calculado para su uso en medias piernas, la zona del bikini, las axilas y la cara. La vida útil de la lámpara no conlleva la ampliación de la garantía mundial de 2 años de Philips