

PHILIPS



Dispositivo de depilación
IPL con SenseIQ

Lumea IPL Serie 9000

Sensor SmartSkin

3 accesorios inteligentes: cuerpo,
cara y precisión

Aplicación Lumea IPL

Uso con y sin cable



BRI955/00

Facilidad sin cables, tratamiento personalizado con SenseIQ

Disfruta de una piel suave y sin vello durante 12 meses*

Disfruta de un tratamiento personalizado y sin complicaciones con la versión sin cable de nuestro dispositivo IPL de Lumea más rápido. La tecnología SenseIQ con accesorios inteligentes y la orientación de la aplicación IPL de Lumea garantizan una piel suave durante más tiempo.

Suavidad y eficacia para conseguir una piel sedosa por más tiempo

- Resultados rápidos con tratamientos solo cada 2 semanas
- Uso con o sin cable para disfrutar de mayor comodidad
- Desarrollado con dermatólogos para ser fácil y efectivo

Solución completa para cara y cuerpo

- Full solution for face and body with 3 smart attachments
- Adecuado para la mayoría de tonos de piel y colores de vello

Tratamiento personalizado IPL para eliminar el vello

- Suavidad y comodidad con SenseIQ
- Optimiza tu rutina con la app Philips Lumea IPL

Lumea IPL Serie 9000

Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

BRI955/00

Destacados

2 veces al mes para obtener resultados rápidos




Comienza con la fase inicial de 4 tratamientos solo cada 2 semanas, es decir, la mitad de tratamientos que otras marcas. Luego, basta con retocar cada mes para mantener el resultado.

Tecnología SenseIQ



Lumea serie 9000 dispone de cinco ajustes de luz fácilmente ajustables. Nuestro sensor SmartSkin lee el tono de tu piel y te ayuda a encontrar el ajuste más cómodo. Los accesorios inteligentes adaptan el tratamiento a cada zona del cuerpo.

Sin cable si así quieres

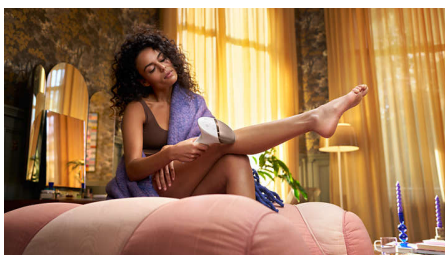

Philips Lumea está diseñada para resultar cómoda y fácil de usar. Utiliza el dispositivo con el cable para tratar rápido zonas del cuerpo más

amplias, como las piernas, o de forma inalámbrica con la batería para tratar con precisión las zonas del cuerpo de difícil acceso.

3 accesorios inteligentes




Los accesorios especialmente diseñados se adaptan perfectamente a las curvas del cuerpo y activan los programas más eficaces para cada zona del cuerpo cuando están conectados. Cara: diseño plano y pequeña ventana con filtro UV. Cuerpo: curvado hacia dentro con una ventana grande. Precisión: curvado hacia fuera para zonas de difícil acceso.

Desarrollado junto con dermatólogos



Como líderes en la tecnología sanitaria, en Philips han desarrollado Lumea IPL consultándolo con dermatólogos, para un uso fácil y efectivo en la seguridad de tu hogar. Derivado de la tecnología utilizada en los salones profesionales, Lumea IPL ofrece un tratamiento suave, incluso en zonas sensibles.

Aplicación Philips Lumea IPL

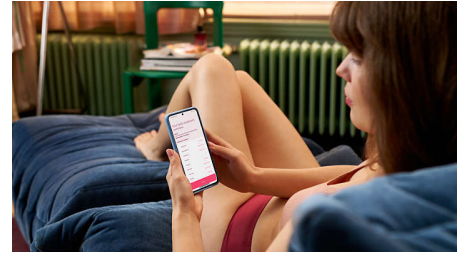

Nuestra aplicación de asesoramiento gratuita te ayuda a planificar y cumplir tu programa de tratamiento, y te guía paso a paso en cada sesión. Descargada por más de 2,1 millones de usuarios.

Para la mayoría de tipos de piel y vello



IPL necesita contraste entre el pigmento del color del vello y el pigmento del tono de la piel, por lo que funciona con vello natural rubio oscuro, castaño y negro, así como con tonos morenos de piel, de normal a oscuro (I- V).

Especificaciones

Especificaciones técnicas de los accesorios

Accesorio para tratamiento del cuerpo: Forma: curva convexa, Tamaño de la ventana: 4,1 cm², Tratamiento personalizado para el cuerpo: piernas, brazos y abdomen

Accesorio para tratamiento de la cara: Forma: plana, Tamaño de la ventana: 2 cm², filtro adicional, Tratamiento personalizado para la cara: labio superior, barbilla y mandíbula

Accesorio para tratamiento de precisión: Forma: curvada cóncava, Tamaño de la ventana: 3 cm², Tratamiento personalizado para la zona del bikini y las axilas

Seguridad y posiciones ajustables

Filtro UV integrado: Protege la piel de los rayos UV

Cinco posiciones de energía de luz: Se adapta a

tu tipo de piel

Sistema de seguridad integrado: Evita que se produzcan pulsaciones de luz accidentales

Sensor de tono de piel: Detecta tu tono de piel

Sensor SmartSkin: El ajuste adecuado a petición

Modo de aplicación

Deslizamiento y flash: Para aplicación rápida

Sello y flash: Para el tratamiento de zonas pequeñas

Uso con/sin cable: Uso con y sin cable

Especificaciones técnicas

Tipo de batería: Batería recargable

Tensión: 100-240 V

Bombilla de alto rendimiento: Diseño duradero, proporciona 450.000 pulsos, equivalente a 39 años de vida útil de la lámpara**

Servicios

Garantía: 2 años de garantía completa y 1 año adicional de garantía al registrar el producto en 90 días

Piezas incluidas

Instrucciones de uso: Manual del usuario

Almacenamiento: Funda de lujo

Adaptador: 19,5 V/4000 mA

Tiempo de aplicación

Axilas: 2,5 minutos

Línea del bikini: 2 min

Zonas de la cara: 1,5 minutos

Medias piernas: 8,5 min.



* Reducción del vello media después de 12 tratamientos: 86% en medias piernas, 70% en la línea del bikini y 67% en las axilas

** Al seguir el programa de tratamiento. Calculado para su uso en medias piernas, la zona del bikini, las axilas y la cara. La vida útil de la lámpara no conlleva la ampliación de la garantía mundial de 2 años de Philips