

# PHILIPS



IPL uređaj za uklanjanje  
dlačica sa tehn. SenseIQ

Lumea IPL serije 9000

Senzor SmartSkin

4 inteligentna dodatka; telo, lice,  
bikini, pazuh

Lumea IPL aplikacija

Bežična i žična upotreba



BRI957/00

## Uživajte u 12 meseci\* glatke kože bez dljučica

### Uživajte u 12 meseci glatke kože bez dljučica\*

Najefikasniji IPL, 12 meseci posle ciklusa kompletnog tretmana\*\*. Tehnologija IPL uz SenseIQ pruža dugotrajno uklanjanje dljučica sa celog tela u udobnosti vašeg doma. Uz savete iz Lumea IPL aplikacije postignite glatkoću kože kao da ste tek izašli iz salona.

#### Nežan i efikasan za dugotrajno glatku kožu

- Brzo do rezultata sa tretmanima na svake 2 nedelje
- Za praktičnost prilikom žične i bežične upotrebe
- Razvijen sa dermatolozima kako bi bio efikasan i lak za upotrebu

#### Sveobuhvatno rešenje za lice i telo

- Sveobuhvatno rešenje za lice i telo uz 4 pametna dodatka
- Pogodan za većinu nijansi kože i boja kose

#### Personalizovani tretman uklanjanja dljučica uz IPL

- Nežno i udobno uz tehnologiju SenseIQ
- Pratite rutinu tretmana pomoću aplikacije Philips Lumea IPL

## Lumea IPL serije 9000

IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ

# Važne karakt.

### 2 puta mesečno za brze rezultate



Započnite sa početnom fazom od 4 tretmana na svake 2 nedelje – to je upola manje tretmana nego sa drugim brendovima. Zatim obavljajte mesečno doterivanje da biste održali rezultate.

### Tehnologija SenseIQ



Aparat Lumea serije 9000 ima pet lako podešivih podešavanja svetla. Naš senzor SmartSkin učitava ton vaše kože i pomaže vam da pronađete najugodniju postavku. Inteligentni dodaci prilagođavaju tretman svakom delu tela.

### Za praktičnost prilikom žične i bežične upotrebe



Philips Lumea je dizajniran tako da bude praktičan i lak za korišćenje. Koristite uređaj žično za brzo tretiranje velikih područja, kao što

su noge, odnosno izaberite bežičnu upotrebu sa baterijom za precizno tretiranje teško dostupnih područja.

### 4 pametna dodatka



Posebno dizajnirani dodaci savršeno prate oblik vašeg tela i aktiviraju najefikasnije programe za svaki deo tela kada su povezani. Lice: ravan dizajn sa prozorčićem sa UV filterom. Telo: zakrivljen ka unutra sa velikim prozorom. Bikini zona i pazuh: zakrivljen ka spolja za teško dostupna mesta.


### Razvijeno sa dermatolozima



Kao lider na polju zdravstvene tehnologije, kompanija Philips je razvila aparat Lumea IPL u saradnji sa dermatolozima za laku i efikasnu potrebu u sigurnosti vašeg doma. Izveden iz tehnologije koja se koristi u profesionalnim salonima, aparat Lumea IPL nudi nežan tretman, čak i na osetljivim područjima.

BRI957/00

### Philips Lumea IPL aplikacija

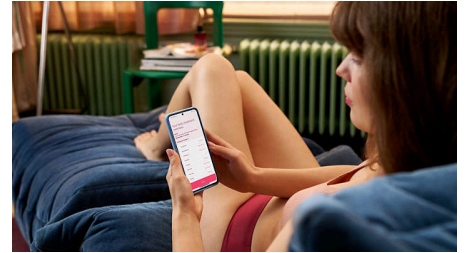

Naša besplatna aplikacija za obuku pomaže vam da isplanirate rutinu tretmana i da se pridržavate rasporeda tretmana, te vas vodi kroz svaku sesiju korak po korak. Aplikaciju je preuzelo više od 2,1 miliona korisnika.

### Za većinu tipova kože i kose



IPL zahteva kontrast između pigmenta u boji dlačica i pigmenta u boji kože, stoga funkcioniše dobro za prirodno tamnoplavu kosu, smeđu i crnu kosu, kao i na nijansama kože od svetle do tamno smeđe (I–V).

# Lumea IPL serije 9000

IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ

BRI957/00

## Specifikacije

### Tehničke specifikacije dodataka

**Dodatak za tretman tela:** Oblik: ispupčen, Veličina prozora: 4,1 cm<sup>2</sup>, Prilagođeni tretman tela: noge, ruke i stomak

**Dodatak za tretman lica:** Oblik: ravan, Veličina prozora: 2 cm<sup>2</sup>, dodatni filter, Prilagođeni tretman lica: nausnice, brada i linija vilice

**Dodatak za tretman bikini zone:** Oblik: udubljen, Veličina prozora: 3 cm<sup>2</sup>, Prilagođeni tretman osjetljive bikini zone

**Dodatak za pazuh:** Oblik: udubljen, Veličina prozora: 3cm<sup>2</sup>, Prilagođeni tretman pazuha

### Bezbednost i postavke

**Integrirani UV filter:** Štiti kožu od ultraljubičaste svetlosti

**5 postavki svetlosti:** Prilagodljivo tipu kože

**Ugrađeni bezbednosni sistem:** Sprečava slučajno bljeskanje

**Senzor nijanse kože:** Detektuje nijansu kože

**Senzor SmartSkin:** Indikator pravog podešavanja kada poželite

### Režim korišćenja

**Klizanje i blicanje:** Za brzu primenu

**Prislanjanje i blicanje:** Za tretman obliha područja

**Na baterije / preko kabla:** Bežična i žična upotreba

### Tehničke specifikacije

**Tip baterije:** Punjiva baterija

**Napon:** 100-240 V

**Lampa visokih performansi:** Dizajniran da dugo traje, pruža 450.000 bljeskanja, što je jednako 39 godina radnog veka lampe\*\*

### Dodaci

**Dodatak za telo (4cm<sup>2</sup>):** Za upotrebu ispod linije vrata

**Dodatak za bikini zonu (2cm<sup>2</sup>):** Specijalan

tretman dlačica u bikini zoni

**Dodatak za lice (2cm<sup>2</sup>):** Za bezbednu primenu na licu

### Servisiranje

**Garancija:** 2 godine garancije širom sveta + 1 dodatna godina garancije posle registracije proizvoda u roku od 90 dana

### Dodaci koji se dostavljaju

**Uputstvo za upotrebu:** Kompletan korisnički priručnik

**Odlaganje:** Luksuzna torbica

**Adapter:** 19,5 V / 4000 mA

**Pribor:** Krpa za čišćenje

### Vreme primene

**Pazuh:** 2,5 min

**Bikini zona:** 2 min

**Delovi lica:** 1,5 min

**Potkolenice:** 8,5 min

