

PHILIPS



IPL uređaj za uklanjanje
dlačica sa tehn. SenseIQ

Lumea IPL serije 9000

Senzor SmartSkin

4 inteligentna dodatka; telo, lice,
bikini, pazuh

Lumea IPL aplikacija

Bežična i žična upotreba



BRI958/00

Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica

Uživajte u 12 meseci glatke kože bez dlačica*

Najefikasniji IPL, 12 meseci posle ciklusa kompletnog tretmana**. Tehnologija IPL uz SenseIQ pruža dugotrajno uklanjanje dlačica sa celog tela u udobnosti vašeg doma. Uz savete iz Lumea IPL aplikacije postignite glatkoću kože kao da ste tek izašli iz salona.

Nežan i efikasan za dugotrajno glatku kožu

- Tretirajte područja samo 2 puta mesečno za brze rezultate
- Za praktičnost prilikom žične i bežične upotrebe
- Razvijen sa dermatolozima kako bi bio efikasan i lak za upotrebu

Sveobuhvatno rešenje za lice i telo

- Sveobuhvatno rešenje za lice i telo uz 4 pametna dodatka
- Pogodan za većinu nijansi kože i boja kose

Personalizovani tretman uklanjanja dlačica uz IPL

- Nežno i udobno uz tehnologiju SenseIQ
- Pratite rutinu tretmana pomoću aplikacije Philips Lumea IPL

Lumea IPL serije 9000

IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ

BRI958/00

Važne karakt.

2 puta mesečno za brze rezultate




Svake 2 nedelje za početak – to je upola manje tretmana nego kod drugih brendova. Nakon toga sledi doterivanje samo jednom mesečno. Pokrivanje obe potkolonice traje 8,5 minuta.

Tehnologija SenseIQ



Aparat Lumea serije 9000 ima pet lako podešivih podešavanja svetla. Naš senzor SmartSkin učitava ton vaše kože i pomaže vam da pronađete najugodniju postavku. Inteligentni dodaci prilagođavaju tretman svakom delu tela.

Za praktičnost prilikom žične i bežične upotrebe

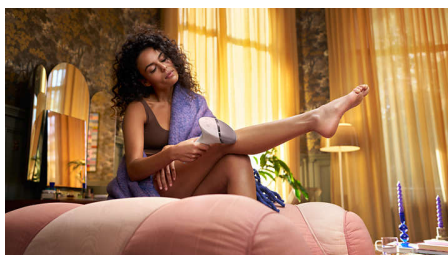

Philips Lumea je dizajniran tako da bude praktičan i lak za korišćenje. Koristite uređaj žično za brzo tretiranje velikih područja, kao što

su noge, odnosno izaberite bežičnu upotrebu sa baterijom za precizno tretiranje teško dostupnih područja.

4 pametna dodatka




Posebno dizajnirani dodaci savršeno prate oblik vašeg tela i aktiviraju najefikasnije programe za svaki deo tela kada su povezani. Lice: ravan dizajn sa prozorčićem sa UV filterom. Telo: zakrivljen ka unutra sa velikim prozorom. Bikini zona i pazuh: zakrivljen ka spolja za teško dostupna mesta.

Razvijeno sa dermatolozima



Kao lider na polju zdravstvene tehnologije, kompanija Philips je razvila aparat Lumea IPL u saradnji sa dermatolozima za laku i efikasnu potrebu u sigurnosti vašeg doma. Izveden iz tehnologije koja se koristi u profesionalnim salonima, aparat Lumea IPL nudi nežan tretman, čak i na osetljivim područjima.

Philips Lumea IPL aplikacija

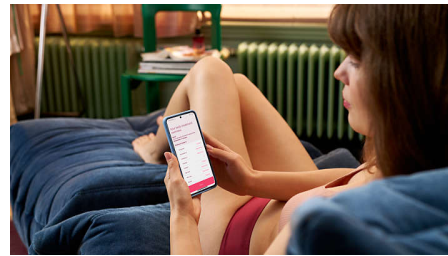

Naša besplatna aplikacija za obuku pomaže vam da isplanirate rutinu tretmana i da se pridržavate rasporeda tretmana, te vas vodi kroz svaku sesiju korak po korak. Aplikaciju je preuzelo više od 2,1 miliona korisnika.

Za većinu tipova kože i kose



IPL zahteva kontrast između pigmenta u boji dlačica i pigmenta u boji kože, stoga funkcioniše dobro za prirodno tamnoplavu kosu, smeđu i crnu kosu, kao i na nijansama kože od svetle do tamno smeđe (I-V).

Specifikacije

Tehničke specifikacije dodataka

Dodatak za tretman tela: Oblik: ispupčen, Veličina prozora: 4,1 cm², Prilagođeni tretman tela: noge, ruke i stomak

Dodatak za tretman lica: Oblik: ravan, Veličina prozora: 2 cm², dodatni filter, Prilagođeni tretman lica: nausnice, brada i linija vilice

Dodatak za tretman bikini zone: Oblik: udubljen, Veličina prozora: 3 cm², Prilagođeni tretman osjetljive bikini zone

Dodatak za pazuh: Oblik: udubljen, Veličina prozora: 3 cm², Prilagođeni tretman pazuha

Bezbednost i postavke

Integrirani UV filter: Štiti kožu od ultraljubičaste svetlosti

5 postavki svetlosti: Prilagodljivo tipu kože

Ugrađeni bezbednosni sistem: Sprečava slučajno bljeskanje

Senzor nijanse kože: Detektuje nijansu kože

Senzor SmartSkin: Indikator pravog podešavanja kada poželite

Režim korišćenja

Klizanje i blicanje: Za praktičnu primenu

Prislanjanje i blicanje: Za tretman obliha područja

Na baterije / preko kabla: Bežična i žična upotreba

Tehničke specifikacije

Tip baterije: Punjiva baterija

Napon: 100-240 V

Lampa visokih performansi: Dizajniran da dugo traje, pruža 450.000 bljeskanja, što je jednako 39 godina radnog veka lampe**

Dodaci

Dodatak za telo (4cm²): Za upotrebu ispod linije vrata

Dodatak za bikini zonu (2cm²): Specijalan

tretman dlačica u bikini zoni

Dodatak za lice (2cm²): Za bezbednu primenu na licu

Servisiranje

Garancija: 2 godine garancije širom sveta + 1 dodatna godina garancije posle registracije proizvoda u roku od 90 dana

Dodaci koji se dostavljaju

Uputstvo za upotrebu: Kompletan korisnički priručnik

Odlaganje: Luksuzna torbica

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Pribor: Krpa za čišćenje

Vreme primene

Donji delovi nogu: 8,5 min

Pazuh: 2,5 min

Bikini zona: 2 min

Delovi lica: 1,5 min

