

PHILIPS

AVENT

Kryty na bradavky

V tvare umožňujúcom kontakt pokožky

Chráni zapálené bradavky

Stredná veľkosť (21 mm)

2 ks



SCF153/03



Pomôžu vám dojčiť dlhšie, pohodlnejšie*

Ľahké pre dieťa a citlivé k vašej pokožke*

Kryty na bradavky sú navrhnuté tak, aby vám pomohli s dojčením v prípade, že sa potýkate s problémami s bradavkami alebo úchopom. Ultra tenký kryt v tvare motýľa umožňuje kontakt s prsiami a napomáha pripútaniu pri dojčení.

Hygienické puzdro

- Jednoduché čistenie v hygienickom puzdre

Jednoduché prisatie pre bábätko*

- Navrhnuté tak, aby pomáhali pri problémoch s prisatím

Vlastnosti produktu


- Navrhnuté tak, aby sedeli
- V tvare umožňujúcom kontakt pokožky s dieťaťom

Kedy používať kryt na bradavky

- Kombinovanie dojčenia s kŕmením z fľaše
- Bábätká môžu piť svojím vlastným tempom
- Vyrobené pre citlivé, zapálené alebo boľavé bradavky


Hlavné prvky

Jedinečný motýlikový tvar

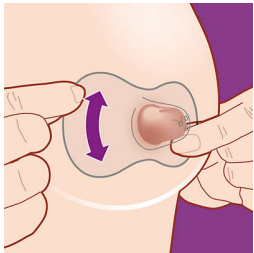


Mimoriadne tenký motýlikový tvar našich krytov na bradavky je navrhnutý tak, aby umožňoval dieťaťu kontakt s pokožkou. Vďaka tomuto tvaru je v kontakte s prsníkom nielen nos, ale aj brada, takže bábätko cíti vôňu matky a dotýka sa jej pokožky. Stačí umiestniť kryt nad stred bradavky, aby sa bábätko mohlo správne prisat' na celý prsný dvorec. Vychutnajte si spojenie so svojím dieťaťom a zároveň chráňte svoje bradavky.

Navrhnuté tak, aby pomáhali s prisatím*

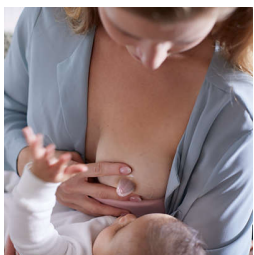

Naše kryty na bradavky sme navrhli tak, aby pomohli bábätkám s ranými problémami s prisatím a aby ste mohli dojčiť dlhšie*. V prípade matiek s plochými a vpadnutými bradavkami a bábätiak so slabou technikou alebo ústnymi anomáliami môže kryt na bradavky zabezpečiť tvar bradavky vhodný na prisatie a udržať vyčnievajúcu polohu počas prestávok pri dojčení.

Chráni bradavky počas dojčenia

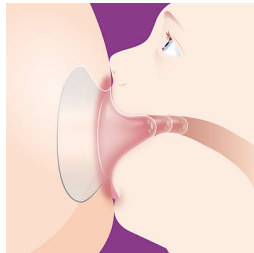

Kryty na bradavky sú navrhnuté tak, aby umožňovali pohodlie a šetrnejšie dojčenie pre zapálené, popraskané alebo boľavé bradavky. Môžu pomôcť obmedziť odieranie a nťahovanie bradaviek počas dojčenia, aby ste mohli kŕmiť svoje bábätko materským mliekom v pohodlí.

Dojčite tak, ako to vyhovuje bábätku




Ak je potrebné regulovať tok matkinho mlieka alebo ak bábätko nemá silu, kryty na bradavky sú tiež skvelou oporou. Tri otvory v špičke krytu môžu pomôcť regulovať tok materského mlieka pre bábätko v prípade nadbytku mlieka. V prípade nadmerného výtoku mlieka tak dieťaťko môže piť svojím vlastným tempom.

Kombinovanie dojčenia s kŕmením z fľaše

Ultra tenké, mäkké silikónové kryty na bradavky Philips Avent Nipple Shield sú účinným riešením bezproblémového prechodu medzi dojčením a kŕmením z fľaše.

Dve veľkosti podľa vašich potrieb

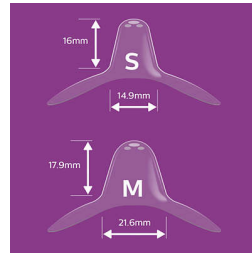

Kryty na bradavky sú k dispozícii v dvoch veľkostiach, aby sa lepšie prispôbili prsníku. Malé kryty sa hodia na bradavky s priemerom od 12 mm a stredné do 21 mm. Ak chcete zistiť svoju veľkosť, urobte si pohodlie a dajte si na bradavku jeden z dierovaných krúžkov. Otáčajte kryt v smere hodinových ručičiek a zasuňte bradavku do výčnelku. Potom roztiahnite spodnú časť krytu okolo dvorca. Ak je medzi bradavkou a silikónom priestor 2 mm, je to správna veľkosť. Tip: veľkosť závisí od prsnej bradavky, nie od prsného dvorca. Nie ste si istí? Obráťte sa na svojho profesionálneho zdravotníka.

Jednoduché čistenie kedykoľvek



Kryty na bradavky je potrebné pred každým použitím vyčistiť. Zaberie to menej ako 10 minút. Vložte ich do vriacej vody na päť minút alebo použite hygienické puzdro. Dobře opláchnuté kryty na bradavky vložte do puzdra a vlejte 25 ml (0,9 fl. oz.) vody. Dajte ich do mikrovlnnej rúry na 750 – 1000 W po dobu troch minút. Potom ich nechajte vychladnúť asi päť minút. Vysušte ich a sú pripravené na použitie. Hygienické puzdro je vhodné na cesty, ako aj na uskladnenie krytov na bradavky, aby ostali čisté.

Technické údaje

Dizajn

Dizajn v motýlikovom tvare

Materiál

Kryty na bradavky: Bez obsahu BPA*, silikón

Čo je súčasťou balenia

Kryty na bradavky 21 mm: 2 ks

Puzdro na prenášanie: 1 ks

