

PHILIPS

AVENT

Set de regalo
Classic+

Biberones, chupetes

260 ml

125 ml

0m+

SCD374/01



Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*

Diseñado para una alimentación ininterrumpida

El set de regalo Philips Avent Classic+ incluye un biberón Classic+ transparente de 125 ml, un biberón Classic+ decorado de 260 ml y dos chupetes decorados con animales a juego.

Otras ventajas

- Con la confianza de las madres desde 1984
- Tetina de chupete anatómica, simétrica y flexible
- Compatible con la gama Philips Avent
- Varios niveles de flujo de la tetina disponibles

Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*

- Válvula anticólicos demostrada para reducir los cólicos*
- Un 60 % menos de malestar por la noche*
- Tetina diseñada para un enganche seguro
- La textura acanalada evita el colapso, para una alimentación ininterrumpida

Fácil de usar, limpiar y montar

- Diseño antigoteo
- Fácil de limpiar y montar con pocas piezas
- Biberón de cuello ancho con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza
- Fácil de agarrar


Destacados

Menos cólicos



Nuestra válvula anticólicos se ha diseñado para evitar que el aire entre en la barriguita del bebé y reducir los gases y las molestias. Cuando el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona con el fin de que el aire entre en el biberón para evitar la acumulación de vacío, y dirige el aire hacia la parte posterior del biberón. El aire se mantiene en el biberón, alejado del estómago del bebé, para reducir los cólicos y las molestias.

Menos malestar

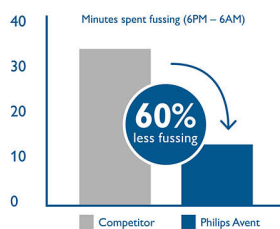

El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60 % menos de malestar por la noche, en comparación con los bebés alimentados con un biberón anticólicos de la competencia.*

Alimentación ininterrumpida



La forma de la tetina permite un enganche seguro y la textura acanalada ayuda a evitar que la tetina se colapse para disfrutar de una alimentación cómoda e ininterrumpida.

Enganche seguro

Tetina diseñada para un enganche seguro

Diseño antigoteo

Nuestro biberón anticólicos se ha diseñado para evitar el goteo durante la alimentación, para disfrutar de una experiencia realmente agradable.

Fácil de montar



Nuestro biberón anticólicos tiene pocas piezas para montarlo de forma rápida y sencilla.

Fácil de agarrar



La exclusiva forma del biberón permite sujetarlo fácilmente en cualquier dirección.

Fácil de limpiar



Con su cuello ancho y menos piezas, nuestro biberón es más fácil de montar y limpiar por completo y con rapidez.

Chupete ortodóntico

Las tetinas anatómicas, ventiladas, planas y simétricas, aseguran el desarrollo natural del paladar, dientes y encías; incluso cuando el chupete se coloca al revés en la boca de su bebé.

Se adapta a las necesidades de su bebé



La gama de biberones anticólicos Philips Avent ofrece diferentes niveles de flujo de la tetina para seguir el ritmo de crecimiento de su bebé. Recuerde que las indicaciones de edad son aproximadas, puesto que los bebés crecen a diferentes ritmos. Todas las tetinas están disponibles en paquetes de dos unidades: flujo para recién nacido, lento, medio, rápido y variable y espeso.

Cuenta con la confianza de las madres

Desde 1984, Philips Avent ha diseñado y fabricado productos que se inspiran en la naturaleza y han sido desarrollados tras amplias investigaciones y ensayos clínicos.

Compatibilidad con toda la gama

El biberón Philips Avent Classic+ es compatible con la gama de Philips Avent, excepto los biberones y vasos con asas Natural. Le aconsejamos que utilice los biberones Classic+ solo con tetinas Classic+.

Especificaciones

Diseño

Diseño del biberón: Forma ergonómica, Cuello ancho

Consumer Trade Item

Height: 17.9 cm
Width: 13.3 cm
Length: 7.1 cm
Net weight: 0.152 kg
Gross weight: 0.192 kg
GTIN: 8710103810810
Country of origin: HU
Harmonized system code: 39241000

Caja exterior

Height: 19.5 cm
Width: 22 cm
Length: 27.6 cm

Net weight: 0.912 kg
Gross weight: 1.322 kg
GTIN: 18710103810817

Características:

Se puede esterilizar

Material

Biberón: Sin BPA*, Polipropileno
Tetina: Sin BPA*, Silicona

Qué incluye

Biberón: 2 uds.
Chupete: 2 uds.

Fácil de usar

Uso del biberón: Fácil de montar, Fácil de limpiar, Fácil de agarrar

Biberón

Material: Sin BPA*

Funciones

Fácil de usar: Fácil de limpiar y montar, antigoteo
Tetina: Enganche fácil, textura estriada que evita la contracción de la tetina, sistema anticólicos demostrado
Válvula anticólicos: Sistema de ventilación Airflex diseñado para reducir la ingesta de aire
Compatibilidad: Compatibilidad total con Classic+

Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses



* 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011
* A las dos semanas de nacer, los bebés alimentados con biberones Philips Avent mostraron menos cólicos y significativamente menos malestar por la noche en comparación con los bebés alimentados con otro biberón de la competencia.
* Diseño de tetina demostrado para eliminar el colapso de la tetina, algo que se asocia a la ingesta de aire y las interrupciones durante la alimentación.
* ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto y malestar.