

# PHILIPS

## AVENT

Extractor de leche  
eléctrico

Extractor de leche

Sencillo

Prémium

Batería recargable

Pantalla del temporizador



SCF396/11



### Inspirado en el bebé. Eficaz para la mamá.

Tecnología de movimiento natural para un flujo de leche más rápido\*

Descubra la nueva era en la extracción con un equilibrio perfecto entre succión y estimulación del pezón, inspirado en la forma de succión natural del bebé. El extractor de leche eléctrico Philips Avent mantiene el flujo de leche en un nivel óptimo y se adapta suavemente al tamaño y la forma del pezón

#### Personalizado y fácil de utilizar

- Número de piezas reducido y configuración intuitiva
- Función de pausa/inicio
- Función de memoria
- Motor silencioso para una experiencia discreta en cualquier lugar
- Experiencia personalizada: 8 + 16 niveles de ajuste

#### Suave y cómodo

- Cojín de silicona suave y adaptable de talla única
- Extracción sin necesidad de inclinar hacia delante

#### Extracción rápida, más leche en menos tiempo\*

- Tecnología Natural Motion para un flujo de leche más rápido\*

#### Batería recargable y temporizador

- Batería recargable para extraer en cualquier parte
- Pantalla para hacer seguimiento del tiempo


# Destacados

## Flujo de leche más rápido\*



Extraiga más leche en menos tiempo\* con un cojín que estimula el pecho para extraer la leche como si fuera un bebé. Se ajusta perfectamente tanto en el modo de estimulación como en el modo de extracción, y aplica la cantidad adecuada de estimulación y succión del pezón para proporcionar el máximo flujo de leche. Basado en los resultados del tiempo de inicio del flujo de leche (tiempo de activación del reflejo de eyección de la leche, MER).\*

## Se adapta al pezón

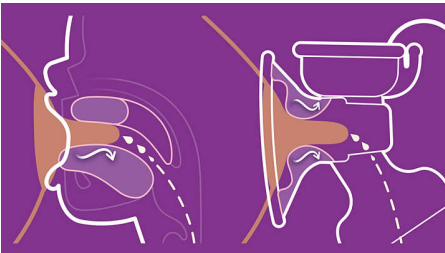

Talla única universal. Dado que no todas las mujeres somos iguales, el cojín de silicona se flexiona suavemente para adaptarse al pezón. Se ajusta al 99,98 % de los tamaños\* (hasta 30 mm).

## Siéntate cómodamente



Siéntate relajada durante la extracción, gracias a un diseño que te permite sentar en posición vertical, en lugar de tener que inclinar tu cuerpo hacia delante. Posición de extracción cómoda y clínicamente probada\* Basado en los resultados de los ensayos clínicos de

productos realizados a 20 participantes (2019); el 90 % aseguran sentirse cómodas en esta posición con el extractor eléctrico sencillo y el 95 % afirman lo mismo con el extractor eléctrico doble.

## Se adapta a todas tus necesidades



Adapta cada sesión a tus necesidades, con una amplia gama de ajustes de estimulación y extracción. Nuestro extractor de leche ofrece 8 niveles de estimulación y 16 niveles de extracción, para una experiencia personalizada.

## Extracción discreta en cualquier parte



Extrae cuando y donde quieras, gracias a nuestro motor silencioso con un diseño estilizado.

## Uso intuitivo en cualquier parte



Extrae en cualquier lugar sin preocupaciones. Nuestra batería recargable incluye un adaptador micro-USB y dura hasta 3 sesiones, con una sola carga completa.

## Limpieza y configuración sencillas



Nuestro sistema de extracción cerrado evita el paso de la leche por tubos y facilita la limpieza. Al contar con menos piezas, hace que volver a montarlo sea más fácil.

## Guarda tus ajustes favoritos



¿Te gusta una configuración específica? El extractor de leche recuerda automáticamente los ajustes más recientes, por lo que todo lo que necesitas hacer es sentarte y pulsar el botón de Inicio.

## Seguimiento del tiempo de extracción

Hace seguimiento del tiempo de extracción en cada pecho, y del tiempo de extracción total con la pantalla del temporizador digital.

## Páusalo cuando quieras



Si necesitas ajustar el extractor o quieres tomar un descanso, solo debes pulsar el botón de pausa/inicio.

# Especificaciones

## Material

**Biberón:** Sin BPA\*, Polipropileno

**Tetina:** Sin BPA\*, Silicona

**Extractor de leche materna:** Sin BPA (solo piezas en contacto con comida)

## Fácil de usar

**Uso del extractor de leche:** Fácil de montar y limpiar, motor silencioso, función de memoria, batería recargable, visualización del motor

## Funciones

**Sin inclinarse hacia delante:** Siéntese en una postura cómoda

**Ajustes:** 16 ajustes de extracción, 8 niveles de estimulación

**Cojín suave y adaptable:** Estimulación suave

## Qué incluye

**Botella de 125 ml con tetina de 0 m+:** 1 uds

**Discos absorbentes desechables:** 2 uds

**Kit de extracción:** 1 uds

**Adaptador micro-USB:** 1 uds

**Unidad motora (recargable):** 1 uds

**Discos selladores:** 1 uds

## Potencia

**Voltaje de alimentación:** 100 - 240 V



\* Según los resultados del tiempo de inicio del flujo de leche (tiempo de activación del reflejo de eyección de la leche, MER) de un ensayo clínico realizado a 20 participantes (Países Bajos, 2019) en comparación con los resultados de tiempo de activación de MER de un estudio de viabilidad realizado a 9 participantes (Países Bajos, 2018) con modelos anteriores de extractores Philips

\* 1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 participantes, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

\* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 participantes caucásicos, EE. UU.); (3)Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participantes, Australia).

\* Basado en los resultados de un cuestionario sobre un cojín 1k referente a un ensayo clínico realizado a 20 participantes (Países Bajos, 2019)

\* Extractor de leche sin BPA. Solo en relación con el biberón y otras piezas que entran en contacto directo con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE 10/2011