




Philips
Lampe infrarouge

300 W

Pour des séances sur zones
profondes
Angle réglable

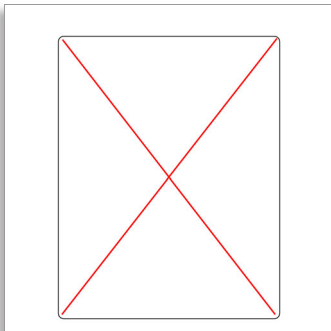

PR3120/00

Effet anti-douleur efficace* sans médicaments

Technologie cliniquement prouvée*

Grâce à la technologie InfraCare, la chaleur pénètre la peau en profondeur pour vous soulager. Elle augmente la circulation sanguine locale, améliorant ainsi l'apport en oxygène et nutriments afin de contribuer à rétablir les muscles douloureux et à apaiser efficacement les douleurs articulaires.

Effets bénéfiques sur le bien-être reconnus

- Cliniquement prouvé
- Dispositif classé médical

Traitement de zones

- Soulage les douleurs locales

Contribue à soulager efficacement* les douleurs

- Soulage les douleurs et améliore la mobilité
- Aide le corps à se rétablir naturellement

PHILIPS

Lampe infrarouge
300 W Pour des séances sur zones profondes, Angle réglable

Caractéristiques

Traitement ciblé

- Lampe halogène infrarouge: 300 W
- Zone de traitement: 40 x 30 cm

Spécificités techniques

- Alimentation: 300 W
- Longueur du cordon: 250 m
- Tension: 110 V ou 220–230 volt
- Isolation: Classe II (double isolation)
- Fréquence: 50-60 Hz
- Lifetime of lamp: 500 heures

Poids et dimensions

- Dimensions du produit: 18,0 x 20,6 x 31,6 cm
- Poids du produit: 2 kg
- Dimensions de l'unité de vente: 22,3 x 24,9 x 33,4 cm

Informations logistiques

- Pays d'origine: Hongrie

Sécurité

- Certifié IEC: IEC 60601-1, 3e édition
- Arrêt automatique au bout de 30 minutes

Simplicité d'utilisation

- Différents réglages possibles: 0-40 degrés (vers l'arrière)
- 1 poignée + 1 poignée de manipulation
- Minuteur mécanique

Conforme à la directive européenne sur les appareils médicaux

- Directive sur les dispositifs médicaux: 2007/47/CE, MDD 93/42/CEE

PR3120/00

Points forts

Contribue à soulager efficacement* les douleurs

Notre technologie cliniquement prouvée soulage les douleurs musculaires et articulaires sans recours aux médicaments. La lame InfraCare PR3120 augmente localement la circulation sanguine et améliore l'apport local en oxygène pour un traitement par zones efficace, qui permet de détendre la zone blessée et de récupérer efficacement* en cas de douleur.

Traitement infrarouge en profondeur

InfraCare est conçu pour permettre aux ondes infrarouges les plus élevées de pénétrer jusqu'aux couches les plus profondes de la peau. La chaleur infrarouge augmente localement la circulation sanguine, ce qui accélère l'élimination des déchets métaboliques et du dioxyde de carbone des tissus musculaires.

Cliniquement prouvé

Une technologie fiable utilisée par les professionnels. Il a été cliniquement prouvé qu'elle améliorait objectivement le fonctionnement des articulations.* Il a été prouvé qu'InfraCare permettait une importante réduction de la douleur chez 71 % des patients atteints d'arthrite rhumatoïde et chez 72 % des patients souffrant de douleurs lombaires.*

Dispositif classé médical

Pour traiter votre douleur de manière sûre et efficace. InfraCare est conforme à la norme IEC 60601-1 3e édition relative aux dispositifs médicaux.

Angle réglable

La lampe InfraCare de 300 W se règle facilement entre 0 et 40 degrés afin de soulager la douleur de manière confortable et efficace*.



Date de publication
2023-05-04

Version: 2.0.2

EAN: 87 10103 79745 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* W. Siems, et al. (2010) : « Pain and mobility improvement and MDA plasma levels in degenerative osteoarthritis, low back pain, and rheumatoid arthritis after infrared A-irradiation », Acta biochimica polonica 57 (3), 313-319