

# PHILIPS

## Infračervená lampa InfraCare

650 W

Ošetrovanie polovice tela

Výška 63,5 cm

HP3641



## Efektívna úľava od bolesti

### Hlboko prenikajúce infračervené teplo

Philips InfraCare poskytuje efektívnu úľavu od bolesti svalov a kĺbov. Jej 650 W infračervené teplo je veľmi príjemné a prenikne hlboko do pokožky, podporí krvný obeh a prinesie efektívnu úľavu pre oblasti tela s veľkosťou 60 x 40 cm.

#### **Jednoduché používanie**

- Nastaviteľný uhol s otáčaním

#### **Efektívna úľava od bolesti**

- Hlboko prenikajúce infračervené teplo

#### **Ošetrovanie do pol tela**

- 650 W infračervená halogénová lampa


## Hlavné prvky

### 650 W infračervená halogénová lampa



Model Philips InfraCare HP 3643 bol optimalizovaný pre efektívnu úľavu od bolesti v oblastiach o veľkosti 60 x 40 cm ako celý chrbát, obe ramená a krk alebo stehno. Zariadenie InfraCare obsahuje inovatívnu technológiu infračervenej halogénovej lampy. Špeciálna optika, filter a výkonná 650 W halogénová žiarivka boli optimalizované, aby poskytli liečbu do pol tela (60 x 40 cm) a aj oveľa príjemnejší pocit z tepla, pretože infračervené teplo je rovnomernejšie rozdeľované po oblasti liečby.

### Nastaviteľný uhol s otáčaním

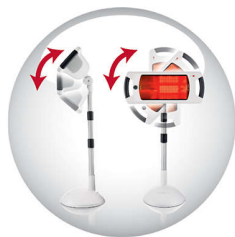

Model InfraCare HP 3643 sa vďaka svojej flexibilitě ľahko používa pri ošetrovaní do pol tela a pri rôznych situáciách (napr. v ľahu na

posteli alebo gauči). Okrem nastavenia výšky sa dá lampová skrinka jednoducho umiestniť tak, aby optimálne pôsobila na správnu časť tela – nastavením lampovej skrinky do horizontálnej alebo vertikálnej polohy (doľava/doprava 90 stupňov) a vyklopením nahor alebo nadol (45 stupňov).

### Hlboko prenikajúce infračervené teplo



U infračerveného svetla sa preukázalo, že umožňuje efektívnu úľavu od bolesti, ktorú spôsobujú bolesti svalov a stuhnuté kĺby. Príjemné teplo, ktoré vytvára infračervené svetlo, preniká hlboko do pokožky, stimuluje cirkuláciu krvi a zahrieva vaše svaly. Po upokojení sa svaly automaticky uvoľnia a upokoja. Teplo zároveň zlepšuje pružnosť tkaniva, vďaka čomu znižuje stuhnutosť kĺbov a zvyšuje ich pohyblivosť.

### Technické špecifikácie

**Príkion:** 650 W  
**Dĺžka kábla:** 300 m  
**Napätie:** 230 V  
**Frekvencia:** 50/60 Hz

### Hmotnosť a rozmery

**Rozmery produktu:** 29,0 x 63,5 x 29,0 (Š x V x H) cm  
**Hmotnosť výrobku:** 5,5 kg

### Jednoduché používanie

**2 rukoväte:** pre jednoduchú prepravu a umiestnenie  
**Prepínač zapnuté/vypnuté**  
**Digitálne používateľské rozhranie:** pre spätnú väzbu o čase a intenzite tepla  
**Výškovo rozťahnutelný:** 45–80 cm  
**Ľahko polohovateľná lampová skrinka (vľavo/vpravo):** 90  
**Ľahko polohovateľná lampová skrinka (hore/dole):** 45

### Hmotnosť a rozmery

**Množstvo na europalette:** 18 pcs  
**Rozmery balenia F (= balenie A):** 33,9 x 80,0 x 36,5 (Š x V x H) cm  
**Hmotnosť balenia F (= balenie A):** 6,5 kg

### Technické špecifikácie

**Izolácia:** Trieda II (dvojitá izolácia)  
**Životnosť žiariviek:** 500 hodina(y)

### Logistické údaje

**Krajina pôvodu:** Nemecko

### Ošetrovanie do pol tela

**Infračervená halogénová žiarivka:** 650 W  
**Oblasť ošetrovania:** 60 x 40 cm

### Bezpečnosť

**V súlade s certifikátom IEC:** V súlade s certifikátmi IEC 60601 a 60335

### Logistické údaje

**CTV kód:** 884364101000

### Lekársky prístroj

**Norma o zdravotníckych zariadeniach:** 2007/47/ES, MDD 93/42/EHS

### Efektívna úľava od bolesti

**Hlboko prenikajúce teplo:** áno

### Ovládanie liečby

**Digitálny časovač:** s automatickým vypínaním  
**Stmievač s 3 nastaveniami tepla:** áno  
**Funkcia pozastavenia:** áno

