

# PHILIPS



Schmerzlinderung  
dank Infrarotlicht

650 W

Behandlung einer Körperhälfte

63,5 cm hoch

HP3641

## Nachhaltige Schmerzlinderung

Infrarot-Wärme, die tief in das Gewebe eindringt

Philips InfraCare hilft bei Muskel- und Gelenkschmerzen. Die Wärme der 650 Watt starken Infrarotlampe ist äußerst wohltuend und dringt tief in die Haut ein. Sie regt die Blutzirkulation an und kann so Schmerzen auch an großflächigen Körperstellen (60 x 40 cm, dies entspricht einer Körperhälfte) lindern.

### Easy to use

- Verstellbarer Winkel mit Drehfunktion

### Proven health benefits

- Erfüllt die europäische Richtlinie für Medizinprodukte (MDD)

### Treatment control


- Digital-Zeitmesser mit automatischer Endabschaltung

# Besonderheiten

## Verstellbarer Winkel mit Drehfunktion

Aufgrund der vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten eignet sich das InfraCare HP 3643 sehr gut für großflächige Behandlungen einer Körperhälfte in verschiedenen Positionen (z. B. auf einem Bett oder einem Sofa liegend). Neben der Höhenanpassung kann das Gehäuse genau auf die zu behandelnde Körperstelle ausgerichtet werden, da es sich in horizontaler und vertikaler Richtung verstellen (90 Grad nach links/rechts) und nach oben und unten neigen lässt (45 Grad).

## Digital-Zeitmesser mit automatischer Endabschaltung

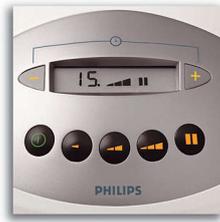

Die Behandlungszeit lässt sich einfach auf die empfohlene oder die als angenehm empfundene Dauer einstellen. Der Digital-Zeitmesser erfasst die verbleibende Zeit und schaltet das Gerät am Ende der Behandlung automatisch ab.

## Erfüllt die europäische Richtlinie für Medizinprodukte (MDD)

Das Gerät bietet Vorteile für die Gesundheit und ist gemäß der europäischen Richtlinie für Medizinprodukte (MDD) als Medizinprodukt zertifiziert.

# Daten

## Einfache Bedienung

2 Handgriffe: für einfaches Transportieren und Positionieren

Ein-/Ausmacher

Höhenverstellbar: 45 - 80 cm

Einfach einstellbares Lampengehäuse (links/rechts): 90

Einfach einstellbares Lampengehäuse (oben/unten): 45

## Behandlung einer Körperhälfte

Infrarot-Halogenlampe: 650 W

Anwendungsbereich: 60 x 40 cm

## Sicherheit

IEC-Zertifizierung: Zertifiziert gemäß IEC 60601 und 60335

## Nachhaltige Schmerzlinderung

Tief eindringende Wärme

Gleichmäßige Wärmeverteilung: Jetzt für dreimal angenehmeres Wärmeempfinden

## Behandlungssteuerung

Digitaler Timer: mit automatischer Abschaltfunktion

Dimmer mit 3 Wärmestufen

Pause-Funktion

## Technische Daten

Stromspannung: 220 V

Leistung: 650 W

Kabellänge: 3 m

Frequenz: 50 und 60 Hz

Isolierung: Klasse II (doppelt isoliert)

Lebensdauer der Lampen: 500 hr

## Gewicht und Abmessungen

Produktgewicht: 5,5 kg

Produktabmessungen: 29,0 x 63,5 x 29,0 (H x B x T) cm

Menge auf Euro-Palette: 18 pcs

Abmessungen F-Box (=A-Box): 33,9 x 80,0 x 36,5 (H x B x T) cm

Gewicht F-Box (=A-Box): 6,5 kg

## Logistische Daten

Ursprungsland: Deutschland

CTV-Code: 884364101000

## Einfache Bedienung

Digitale Benutzeroberfläche: mit Feedback zu Zeit und Wärmeintensität

## Medizinisches Gerät

Vorteile für die Gesundheit: erfüllt die europäische Richtlinie für Medizinprodukte (MDD)

