

PHILIPS

AVENT

Rintakumi

Muotoilu mahdollistaa ihokosketuksen

Suojaa arkoja nännejä

Pieni (15 mm)

2 kpl



SCF153/01



Apu miellyttävään ja pitkäkestoiseen imetykseen*

Vauva saa helposti otteen, hellävarainen iholle*

Rintakumeista on apua silloin, kun imetys ei onnistu nänniän muodon tai vauvan huonon otteen vuoksi. Erittäin ohut ja perhosenmallinen rintakumi mahdollistaa kontaktin saamisen ja edistää kiintymyssuhteen muodostamista imetyksen aikana.

Hygieeninen kotelo

- Helppo puhdistaa hygieenisessä kantokotelossa

Vauva saa rintakumista helposti otteen*

- Muotoilu auttaa, jos otteen saaminen on vaikeaa

Tuotteen ominaisuudet


- Muotoiltu sopivaksi
- Muotoilu mahdollistaa ihokosketuksen vauvan kanssa

Tutin suojuksen käyttö

- Rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen
- Vauvat imevät omaan tahtiinsa
- Tarkoitettu aroille tai kipeille nänneille


Kohokohdat

Ainutlaatuinen perhosenmallinen muoto

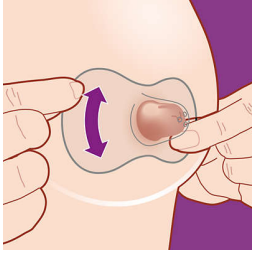


Rintakumin erittäin ohut ja perhosenmallinen muoto mahdollistaa ihokontaktin vauvan kanssa. Sekä nenä että leuka koskettavat rintaa, jolloin vauva voi haistaa äidin tuoksun ja tuntea äidin ihon. Rintakumi asetetaan nännin keskikohtaan, jotta vauva saa otteen koko nänninpihasta. Voit muodostaa kiintymyssuhteen vauvaan ja suojata samalla nännesiäsi.

Muotoilu edistää otteen saamista*

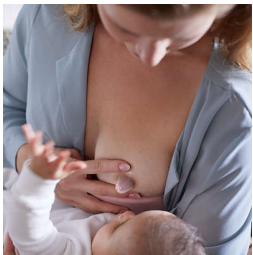

Rintakumi auttaa vauvoja, joille otteen saaminen on aluksi vaikeaa, jotta voit imettää pidempään*. Rintakumi on tarkoitettu äideille, joiden nännit ovat matalat ja sisäänpäin kääntyneet, ja vauvoille, joilla on huono imemistekniikka tai joilla on suun epämuodostuma. Se säilyttää muotonsa vauvan pitäessä taukoja ruokailusta.

Suojaa nännettä imetyksen aikana

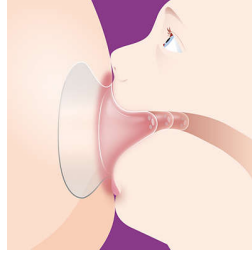

Rintakumit tekevät imettamisestä hellävaraisempaa, jos nännien iho on arka, halkeileva tai kipeä. Niiden avulla nännihin ei kohdistu yhtä paljon hankausta ja venymistä, joten imettäminen tuntuu miellyttävältä.

Imetä vauvan tahtiin




Rintakumeista on hyötyä myös silloin, jos äidin maidontulo on säännösteltävä tai vauva ei jaksa imeä pitkään. Kärjessä on kolme aukkoa, joiden avulla voi säädellä rintamaidon määrää. Siten vauva voi imeä omaan tahtiinsa, jos äidin maidontuotanto on runsasta.

Rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen

Philips Avent -rintakumi on erittäin ohutta ja pehmeää silikonia. Siirtyminen rinta- ja pulloruokinnan välillä onnistuu saumattomasti, kun näitä yhdistellään.

Valitse sopiva kahdesta koosta

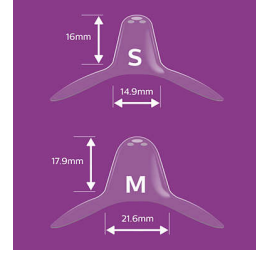

Rintakumeja on saatavana kahta eri kokoa. Pieni rintakumi sopii nännille, jonka halkaisija on vähintään 12 mm, ja keskikokoinen nännille, jonka halkaisija on enintään 21 mm. Sopivan koon löydät sovittamalla rengasta. Kierä rintakumia myötäpäivään ja ohjaa nänni aukosta. Levitä sitten kantaosaa nänninpihan ympärillä. Koko on sopiva, jos nännin ympärille jää 2 mm:n rako. Vinkki: koko perustuu nänniin, eikä nänninpihaan. Jos et ole varma, pyydä apua terveydenhuollon ammattilaiselta.

Helppo puhdistaa milloin vain



Rintakumien puhdistaminen ennen jokaista käyttöä kestää alle 10 minuuttia. Laita ne kiehuvaan veteen viideksi minuutiksi tai käytä hygieenistä koteloa. Huuhtelee rintakumit hyvin, laita ne koteloon ja lisää 25 ml vettä. Laita sitten rintakumit kolmeksi minuutiksi mikroaaltouuniin teholla 750–1 000 W. Anna niiden jäähtyä viisi minuuttia ja kaada sitten vesi pois. Sen jälkeen rintakumit ovat käyttövalmiita. Hygieeninen kantokotelo on kätevä matkalla, ja se sopii rintakumien säilytykseen ja pitämiseen puhtaina.

Tekniset tiedot

Materiaali

Rintakumi: Ei sisällä BPA:ta*, silikonia

Sisältö

Rintakumit 15 mm: 2 pcs

Hygieeninen kantokotelo: 1 pcs

Muotoilu

Perhosenmallinen muotoilu: Yes



* kun nännit ovat matalat tai sisäänpäin kääntyneet, niiden iho on arka, halkeileva tai kipeä, ja kun vauva ei muuten saa otetta

* 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan

* Tämä osa sisältää kuluttajien mielipiteitä tuotteesta. Philips sanoutuu irti kuluttajien tähän osaan lisäämästä sisällöstä, ja siksi tässä mainittuja teknisiä tietoja ja/tai tuotteen käyttöohjeita ei ole tarkoitettu Philipsin virallisiksi tiedoiksi.