

# PHILIPS

 Product Picture

Schmerzlinderung  
dank Infrarotlicht

650 W

Behandlung einer Körperhälfte

63,5 cm hoch

HP3641

## Nachhaltige Schmerzlinderung

Infrarot-Wärme, die tief in das Gewebe eindringt

Philips InfraCare hilft bei Muskel- und Gelenkschmerzen. Die Wärme der 650 Watt starken Infrarotlampe ist äußerst wohltuend und dringt tief in die Haut ein. Sie regt die Blutzirkulation an und kann so Schmerzen auch an großflächigen Körperstellen (60 x 40 cm, dies entspricht einer Körperhälfte) lindern.

### Easy to use

- Verstellbarer Winkel mit Drehfunktion

### Proven health benefits

- Erfüllt die europäische Richtlinie für Medizinprodukte (MDD)

### Effective pain relief

- Tief eindringende Infrarotwärme

### Treatment control


- Digital-Zeitmesser mit automatischer Endabschaltung

### Personalized warmth comfort

- Dimmer mit 3 Wärmestufen

## Besonderheiten

### Tief eindringende Infrarotwärme

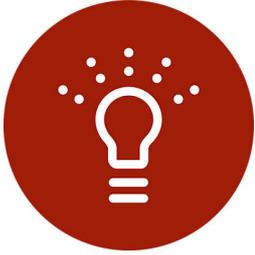

Infrarotlicht trägt erwiesenermaßen bedeutend zur Linderung von Muskelschmerzen und Beschwerden durch steife Gelenke bei. Die wohltuende Wärme des Infrarotlichts dringt tief in die Haut ein, regt die Blutzirkulation an und wärmt die Muskeln auf. Die beruhigende Wärme lockert und entspannt Ihre Muskeln. Da Wärme das Körpergewebe flexibler macht, wirkt sie sich positiv auf die allgemeine Beweglichkeit aus und lindert Gelenkversteifungen.

### 650 Watt starke Infrarot-Halogenlampe



Philips InfraCare HP 3643 wurde für eine wirkungsvolle Schmerzbehandlung an Körperstellen von bis zu 60 x 40 cm (z. B. der gesamte Rückenbereich, beide Schultern mit Nackenbereich oder die Oberschenkel) entwickelt. Das InfraCare basiert auf der innovativen Infrarot-Halogenlampen-

Technologie. Das spezielle Design, der Filter und die 650 Watt starke Halogenlampe wurden im Hinblick auf eine möglichst großflächige Behandlung (60 x 40 cm, dies entspricht einer Körperhälfte) optimiert. Die ausgestrahlte Wärme wird im Verhältnis zu herkömmlichen Lampen als angenehmer empfunden, da Infrarotwärme gleichmäßiger auf den zu behandelnden Bereich einwirkt.

### Verstellbarer Winkel mit Drehfunktion

Aufgrund der vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten eignet sich das InfraCare HP 3643 sehr gut für großflächige Behandlungen einer Körperhälfte in verschiedenen Positionen (z. B. auf einem Bett oder einem Sofa liegend). Neben der Höhenanpassung kann das Gehäuse genau auf die zu behandelnde Körperstelle ausgerichtet werden, da es sich in horizontaler und vertikaler Richtung verstellen (90 Grad nach links/rechts) und nach oben und unten neigen lässt (45 Grad).

### Digital-Zeitmesser mit automatischer Endabschaltung




Die Behandlungszeit lässt sich einfach auf die empfohlene oder die als angenehm empfundene Dauer einstellen. Der Digital-

Zeitmesser erfasst die verbleibende Zeit und schaltet das Gerät am Ende der Behandlung automatisch ab.

### Erfüllt die europäische Richtlinie für Medizinprodukte (MDD)

Das Gerät bietet Vorteile für die Gesundheit und ist gemäß der europäischen Richtlinie für Medizinprodukte (MDD) als Medizinprodukt zertifiziert.

### Dimmer mit 3 Wärmestufen

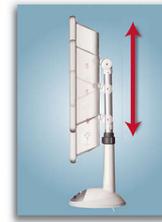

Die von der InfraCare ausgestrahlte Infrarotwärme kann ganz einfach an die individuellen Vorlieben angepasst werden. Es stehen drei Wärmestufen zur Auswahl, damit jeder Anwender die Behandlung so angenehm wie möglich gestalten kann.

# Daten

## Einfache Bedienung

**2 Handgriffe:** für einfaches Transportieren und Positionieren

**Ein-/Ausschalter**

**Höhenverstellbar:** 45 - 80 cm

**Einfach einstellbares Lampengehäuse**

**(links/rechts):** 90

**Einfach einstellbares Lampengehäuse**

**(oben/unten):** 45

## Behandlung einer Körperhälfte

**Anwendungsbereich:** 60 x 40 cm

**Infrarot-Halogenlampe:** 650 W

## Sicherheit

**IEC-Zertifizierung:** Zertifiziert gemäß

IEC 60601 und 60335

## Nachhaltige Schmerzlinderung

**Tief eindringende Wärme**

**Gleichmäßige Wärmeverteilung:** Jetzt für dreimal angenehmeres Wärmeempfinden

## Behandlungssteuerung

**Digitaler Timer:** mit automatischer

Abschaltfunktion

**Dimmer mit 3 Wärmestufen**

**Pause-Funktion**

## Technische Daten

**Stromspannung:** 220 V

**Leistung:** 650 W

**Kabellänge:** 3 m

**Isolierung:** Klasse II (doppelt isoliert)

**Frequenz:** 50 und 60 Hz

**Lebensdauer der Lampen:** 500 hr

## Gewicht und Abmessungen

**Produktabmessungen:** 29,0 x 63,5 x 29,0 (H x B x T) cm

**Produktgewicht:** 5,5 kg

**Menge auf Euro-Palette:** 18 pcs

**Abmessungen F-Box (=A-Box):**

33,9 x 80,0 x 36,5 (H x B x T) cm

**Gewicht F-Box (=A-Box):** 6,5 kg

## Logistische Daten

**CTV-Code:** 884364101000

**Ursprungsland:** Deutschland

## Einfache Bedienung

**Digitale Benutzeroberfläche:** mit Feedback zu Zeit und Wärmeintensität

## Medizinisches Gerät

**Vorteile für die Gesundheit:** erfüllt die europäische Richtlinie für Medizinprodukte (MDD)

