




Philips
InfraCare infrarød lampe

650 W

Halvkrops-behandling
124 cm høj

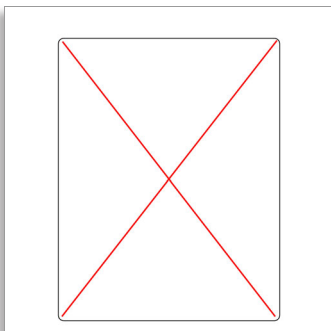

HP3643

Effektiv smertelindring

Dyb, gennemtrængende infrarød varme

Philips InfraCare giver effektiv smertelindring til muskler og led. Dens infrarøde lampe på 650 W er yderst behagelig, den infrarøde varme trænger dybt ind i huden, stimulerer blodcirkulationen og giver lindring på kropsområder på 60 x 40 cm.

Nem at anvende

- Justérbar vinkel med rotation
- Når nemt nakke og skuldre

Effektiv smertelindring

- Dyb, gennemtrængende infrarød varme

Halvkrops-behandling

- 650 W infrarød halogenlampe

Stimuleret blodcirkulationen

- Stimulerer blodcirkulationen

PHILIPS

Specifikationer

Nem at anvende

- Justérbar: 0 - 40° (bagud)
- 2 håndtag: til nem transport og placering
- On/off-knap (tænd/sluk)
- Justerbar højde: 62-127 cm
- Nem indstilling af lampe (venstre/højre): 90
- Nem indstilling af lampe (op/ned): 45

Sikkerhed

- Automatisk slukning efter 15 minutter
- IEC-certificeret: Overholder IEC 60601 og 60335

Halvkrops-behandling

- Infrarød halogenlampe: 650 W
- Behandlingsområde: 60x40 cm

Effektiv smertelindring

- Dyb gennemtrængende varme

Tekniske specifikationer

- Ledningslængde: 300 m
- Strøm: 650 W

- Isolering: Klasse II (dobbeltisolering)
- Frekvens: 50-60 Hz
- Spænding: 220-230 V, Taiwan 110 V
- Pærers levetid: 500 hr

Vægt og mål

- Produktmål: 29 x 124 x 29 cm
- Produktvægt: 7,2 kg
- Vægt: F-box: 9,1 kg
- Antal på Euro-palle: 24 pcs
- F-boksens mål (=A-boks): 34,5 x 60 x 39 cm
- F-boksens mål: 34,5 x 60 x 39 cm
- F-boksens vægt (=A-boks): 9,1 kg

Logistiske data

- CTV-kode: 884364301000
- Oprindelsesland: Tyskland

Medicinsk apparat

- Medical Device Directive: 2007/47/EF, MDD 93/42/EU

HP3643/01

Vigtigste nyheder

650 W infrarød halogenlampe



Philips InfraCare HP3643 er optimeret til effektiv smertebehandling af områder på 60 x 40 cm, f.eks. hele ryggen, begge skuldre og nakken eller lår. InfraCare indeholder innovativ, infrarød halogenlampeteknologi. Specialoptikken, filteret og den kraftige halogenlampe på 650 W er optimeret, hvilket muliggør halvkropsbehandling (ca. 60 x 40 cm) og giver endnu mere behagelig varme, da den infrarøde varme fordeles mere jævnt over hele behandlingsområdet.

Justérbar vinkel med rotation

InfraCare HP 3643 er nem at anvende til halvkropsbehandling og i forskellige situationer (f.eks. liggende på en seng/sofa) pga. dens maksimale fleksibilitet. Udover højdejusteringen kan lampekabinettet nemt placeres til optimal behandling af den ønskede kropszone ved at dreje lampekabinettet i vandret eller lodret position (venstre/højre 90 grader) og ved at vippe det op eller ned (45 grader).

Når nemt nakke og skuldre

InfraCare HP3643 når nemt nakkemusklerne og giver optimal behandling af ømme muskler. Højden på lampens kabinet kan øges fra 60-120 cm, således at lampen står i en passende position, uanset om du ligger på en seng eller sidder på en stol.

Stimulerer blodcirkulationen

Infrarødt lys og varme trænger dybt ind i din hud, stimulerer blodcirkulationen og udvider blodkarrene. Endvidere øger det infrarøde lys stofskiftet og udskillelsen af affaldsstoffer fra kroppen.

Dyb, gennemtrængende infrarød varme



Infrarødt lys har vist sig effektivt til at lindre smerter forårsaget af muskelsmerter og stive led. Den komfortable varme, som det infrarøde lys skaber, trænger dybt ind i din hud, stimulerer blodcirkulationen og varmer dine muskler. Efterhånden som dine muskler lindres, løsner de sig automatisk op og afslappes. Fordi det gør vævet mere smidigt, reducerer varmen også stivheden og gør leddene mere fleksible.



Udgivelsesdato
2022-06-21

Version: 9.2.1

EAN: 08 71010 33204 87

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com