




Philips  
InfraCare infrarød lampe

**650 W**

Behandling av halve kroppen  
124 cm høy

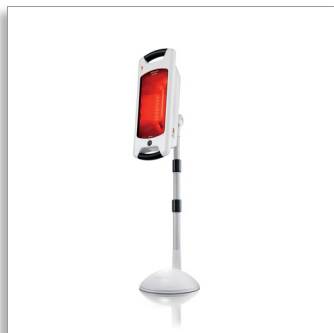

HP3643

## Effektiv smertelindring

Dyp, gjennomtrengende, infrarød varme

Philips InfraCare gir effektiv smertelindring for muskler og ledd. Den infrarøde lampen på 650 watt er veldig behagelig, og den infrarøde varmen trenger dypt inn i huden, forbedrer blodsirkulasjonen og gir effektiv smertelindring for områder på 60 x 40 cm.

### Lett å bruke

- Justerbar vinkel med rotering
- Når enkelt nakke og skuldre

### Effektiv smertelindring

- Dyp, gjennomtrengende, infrarød varme

### Behandling av halve kroppen

- 650 watts infrarød halogenlampe

### Stimulert blodsirkulasjon

- Stimulerer blodsirkulasjonen

**PHILIPS**


# Høydepunkter

## 650 watts infrarød halogenlampe



Philips InfraCare HP 3643 er optimalisert for effektiv smertelindring av områder på 60 x 40 cm, for eksempel ryggen, begge skuldrene og nakken eller låret. InfraCare har en innovativ infrarød halogenlampe-teknologi. Den spesielle optikken, filteret og den kraftige halogenlampen på 650 watt er optimalisert, slik at du kan behandle halve kroppen (60 x 40 cm). Den har mye mer behagelig varme, fordi den infrarøde varmen blir bedre fordelt utover området som blir behandlet.

## Justerbar vinkel med rotering

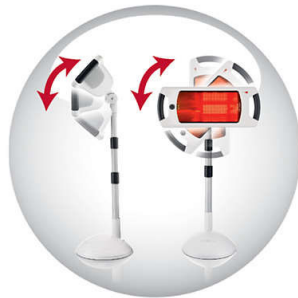

Takket være den store fleksibiliteten er InfraCare HP 3643 enkel å bruke for behandling av halve kroppen og for ulike situasjoner (f.eks. ligge på en seng eller sofa). Ved siden av høydejusteringen, kan lampehuset også enkelt justeres for optimal behandling av den aktuelle kroppsdelen, ved å flytte lampehuset i horisontal eller vertikal stilling (90 grader venstre/høyre) og ved å vippe den opp eller ned (45 grader).

## Når enkelt nakke og skuldre



Med InfraCare HP3643 kan du enkelt nå nakke og skuldre for å gi optimal varmebehandling av ømme muskler. Høyden på lampehuset kan forlenges fra 60 cm til 120 cm, slik at det kan plasseres riktig enten du ligger på en seng eller sitter på en stol.

## Stimulerer blodsirkulasjonen

Infrarødt lys og varme trenger dypt inn i huden din, stimulerer blodsirkulasjonen og utvider blodkarene. I tillegg øker infrarødt lys forbrenningen og fjerner avfallsstoffer fra kroppen.

## Dyp, gjennomtrengende, infrarød varme



Infrarødt lys har vist seg å effektivt lindre smerter og plager som muskelsmerter og stive ledd. Den behagelige varmen fra det infrarøde lyset trenger dypt inn i huden, stimulerer blodsirkulasjonen og varmer opp musklene. Når musklene får denne varmebehandlingen, vil de automatisk løses opp og slappe av. Siden varmen gjør vevet mer elastisk, blir du mindre stiv og leddene mer fleksible.

# Spesifikasjoner

## Lett å bruke

- 2 håndtak: for enkel transport og plassering
- Justeringsmuligheter: 0-40 grader (bakover)
- Av/på-knapp
- Kan utvides i høyden: 62–127 cm
- Enkelt plasserbart lampehus (venstre/høyre): 90
- Enkelt plasserbart lampehus (opp/ned): 45

## Mål og vekt

- Product dimensions: 29 x 124 x 29 cm
- Product weight: 7,2 kg

## Tekniske spesifikasjoner

- Cord length: 300 m
- Power: 650 W
- Frequency: 50–60 Hz

## Mål og vekt

- Vekt på F-boks: 9,1 kg
- Ant. på europall: 24 pcs
- Mål på F-boks (=A-boks): 34,5 x 60 x 39 cm
- Mål på F-boks: 34,5 x 60 x 39 cm
- Vekt på F-boks (=A-boks): 9,1 kg

## Tekniske spesifikasjoner

- Isolasjon: Klasse II (dobbel isolasjon)
- Levetid for lamper: 500 time(r)

## Behandling av halve kroppen

- Infrarød halogenlampe: 650 W
- Behandlingsområde: 60 x 40 cm

## Sikkerhet

- IEC-sertifisert: Samsvarer med IEC 60601 og 60335
- Slår seg av automatisk etter 15 minutter

## Logistiske data

- Opprinnelsesland: Tyskland

## Medisinsk utstyr

- EU-direktivet om medisinsk utstyr (MDD): 2007/47/EF, MDD 93/42/EØS

## Logistiske data

- CTV-kode: 884364301000

## Effektiv smertelindring

- Dyp, gjennomtrengende varme

## Tekniske spesifikasjoner

- Voltage: 220–230 V, Taiwan 110 V



Utgivelsesdato  
2021-06-08

Versjon: 9.2.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)