




Philips  
InfraCare 紅外線燈管

650 瓦  
半身照射  
124 厘米高

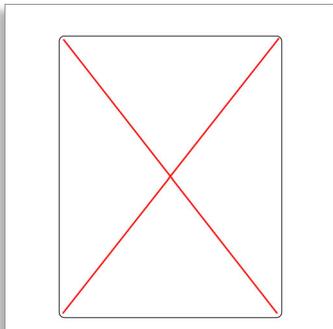

HP3643

## 有效紓緩痛楚

深層滲透的紅外線熱力

Philips InfraCare 有效減輕肌肉及關節痛楚。其 650 瓦的紅外線燈熱力十分舒適並可深入滲透肌膚，促進血液循環，為 60x40 厘米的半身部位帶來紓緩。

### 方便使用

- 可透過旋轉調校角度
- 輕易照射頸部和肩膀

### 有效紓緩痛楚

- 深層滲透的紅外線熱力

### 半身照射

- 650 瓦紅外線鹵素燈管

### 刺激血液循環

- 刺激血液循環

**PHILIPS**

## 規格

### 方便使用

- 2 個手柄：方便攜帶及定位
- 可以調節：0-40 度 (向後)
- 開 / 關掣：是
- 可伸展高度：62-127 厘米
- 易於調整式燈箱 (左 / 右)：90
- 易於調整式燈箱 (上 / 下)：45

### 安全

- 通過 IEC 認證：符合 IEC 60601 和 60335
- 15 分鐘自動斷電功能：是

### 半身照射

- 照射部位：60x40 厘米
- 紅外線鹵素燈管：650 瓦

### 有效舒緩痛楚

- 深層滲透熱力：是

### 技術規格

- 電源：650 瓦

- 電線長度：300 米
- 絕緣層：Class II (雙重隔濾)
- 頻率：50-60 Hz
- 電壓：220-230 伏，中國台灣 110 伏
- 燈泡壽命：500 小時

### 重量與尺寸

- 產品尺寸：29x124x29 厘米
- 產品重量：7.2 千克
- 彩盒重量：9.1 千克
- 歐洲貨板數量：24 件數
- 彩盒尺寸 (與 A- 盒相同)：34.5x60x39 厘米
- 彩盒尺寸：34.5x60x39 厘米
- 彩盒重量 (與 A- 盒相同)：9.1 千克

### 物流數據

- CTV 代碼：884364301000
- 原產地：德國

### 醫療 ? 品

- 醫療器材指令：2007/47/EC, MDD 93/42/EEC

## 產品特點

### 650 瓦紅外線鹵素燈管



Philips InfraCare HP 3643 適用於舒緩疼痛，照射覆蓋範圍可達 60x40 厘米 (如整個背部、雙肩及頸部或大腿)。InfraCare 採用創新的紅外線鹵素燈管技術。特別的光學隔濾技術及強勁的 650 瓦鹵素燈管，可覆蓋半身照射 (60x40 厘米)；同時，由於紅外線熱力均勻散佈在照射區域，可提供更多舒適熱力。

### 可透過旋轉調校角度

InfraCare HP 3643 可簡易方便地在各種情況下 (例如平躺於床上或沙發上) 進行半身照射。除高度調校之外，該燈管還可調校水平或垂直位置 (左 / 右 90 度)，以及上下傾斜 (45 度)，以便輕鬆定位到指定身體部位，進行最佳照射。


### 輕易照射頸部和肩膀

InfraCare HP3643 可輕易照射頸部和肩膀，為酸痛肌肉提供最佳熱力照射。燈管的高度可由 60 厘米延長到 120 厘米，因此，無論你是躺於床上或坐在椅中，亦可方便定位。

### 刺激血液循環

紅外線的熱力照射能夠深入您的皮膚，有助刺激血液循環及擴張血管。更可以促進新陳代謝及從體內排出無用物質。

### 深層滲透的紅外線熱力

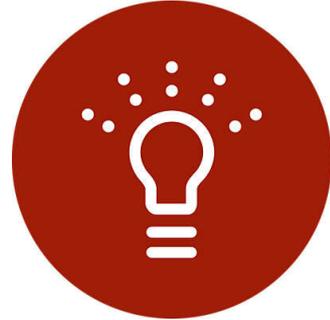

紅外線經驗證能有效舒緩由肌肉酸痛及關節僵硬所引起的不適和痛楚。紅外線的熱力照射能夠深入您的皮膚，刺激血液循環及為您的肌肉保溫。肌肉經舒緩後會自動放鬆。熱力除了讓肌肉組織柔軟之外，更有助減少僵硬及令關節更靈活。

