

PHILIPS

Mascarilla nasal

DreamWisp

Tubo por encima de la cabeza

Almohadilla con autosellado

Arnés fácil de colocar

HH1143/02



Podrá dormir cómodamente en cualquier posición

DreamWisp se ha diseñado para ayudarle a dormir cómodamente sin importar las vueltas que dé. Con la conjunción del diseño de tubo por encima de la cabeza de DreamWear con la almohadilla nasal de mínimo contacto de Wisp, DreamWisp le brinda la libertad de dormir en cualquier posición durante toda la noche. Todos los productos de Philips cumplen con la legislación vigente. Puede consultar el uso previsto en el manual de instrucciones.

Pocas piezas

- Un ajuste perfecto con pocas piezas
- Fácil de colocar, simple de ajustar

Clips magnéticos

- Los clips para arnés y la almohadilla de la mascarilla contienen imanes

Campo de visión abierto

- Leer, ver la televisión o llevar gafas

Libertad de movimientos


- Le permite dormir en cualquier posición

Comodidad y facilidad de uso

- Almohadilla cómoda y fiable

Destacados

Clips magnéticos

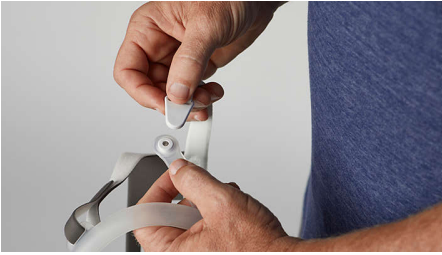

Póngase en contacto con un profesional de la salud antes de utilizar esta mascarilla. Algunos dispositivos médicos pueden verse afectados por los campos magnéticos. Los clips magnéticos de esta mascarilla se deben mantener a al menos 50 mm (2 pulgadas) de distancia de cualquier dispositivo médico activo, especialmente en el caso de dispositivos implantados como marcapasos, desfibriladores o implantes cocleares. Para obtener más información, lea las instrucciones de uso incluidas en el paquete.

Podrá dormir en cualquier posición

Con su diseño revolucionario de mascarilla con tubo por encima de la cabeza, DreamWisp permite mayor libertad de movimiento gracias a que mantiene el tubo al margen. Podrá cambiar de posición mientras duerme durante la noche (de costado, de espalda o boca abajo). Los usuarios manifestaron que estaban satisfechos con la forma en que la mascarilla se mantiene hermética mientras se duerme*.

Diseñado con pocas piezas

El arnés de DreamWisp se ha diseñado para ofrecer un excepcional confort. El diseño del arnés de cuatro posiciones ofrece estabilidad

con menos piezas, al tiempo que su armazón ligero y suave sirve de canal para el flujo de aire de DreamWisp. Esto significa que menos componentes entran en contacto mientras duerme, por lo que podrá disfrutar de un cómodo tratamiento, todas las noches durante toda la noche.

Clips magnéticos

Ayudarle a poder seguir su terapia del sueño implica un diseño lo más práctico posible. DreamWisp incorpora clips magnéticos que son rápidos y fáciles de conectar o desconectar. De esta forma se facilita el poder ponerse o quitarse la mascarilla, en cualquier momento que desee. Los usuarios manifestaron que estaban muy satisfechos con la facilidad de uso de la mascarilla DreamWisp*.

La almohadilla Wisp

DreamWisp combina el rendimiento de una mascarilla nasal con un diseño mínimamente invasivo, un sellado excepcional y la tecnología de almohadillas de Wisp. Los pacientes se encuentran más satisfechos con la forma en que la mascarilla se mantiene hermética durante su uso.

Visión sin obstrucciones

El exclusivo diseño de tubo por encima de la cabeza permite un claro campo de visión. Con DreamWisp, podrá leer, navegar por la red o ver televisión mientras le llega la hora de dormir.

Especificaciones

Detalles del producto

Materiales: Silicona

Materiales: Policarbonato

Materiales: Espuma de poliuretano

Materiales: Nylon

Materiales: Spandex

Materiales: Poliéster

Materiales: Imán (acetálico)

Garantía: 90 días

Operating pressure: 4 - 30 cmH2O

Sound level: 18,7 dBA

Sustitución

Inspect for daily wear: Sustituir al primer signo de desgaste

Finalidad de uso

To be used on patients (<gt/>66 lbs/30kg): a quienes se haya prescrito terapia de CPAP

Advertencia: Interferencias magnéticas

Beware with pacemakers: Lea las instrucciones de uso antes de su uso.

Datos de calibración

Lavar a mano con detergente suave:

Enjuagar en profundidad, colgar o secar al aire

