



Philips Lumea IPL 9000
Series
IPL 彩光脫毛器

採用 SenseIQ 智能感應調控科技

精準護理腋下及比堅尼位、身體、面部
附有 SmartSkin 智能膚色感應器
可無線及有線使用



BRI955/00

享受 6 個月的持久淨滑脫毛效果 *

使用我們最快速、最強效的 IPL 彩光脫毛器

最強效的 IPL 彩光脫毛器，完成整個療程後可享受 6 個月持久的淨滑脫毛效果 **。IPL 彩光脫毛技術配合 SenseIQ 智能感應調控科技，讓您在家中可舒適地享受持久的全身脫毛體驗。Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式提供個人化指導，讓您享受到美容院般專業持久的脫毛體驗。

溫和有效，帶來持久的光滑肌膚

- 只需每 2 週進行療程，即可快速見效
- 可有線及無線操作，方便使用

面部及身體的全面解決方案

- 適用於大部分膚色及毛髮顏色

個人化 IPL 彩光脫毛療程

- SenseIQ 智能感溫調控技術實現溫和舒適的脫毛體驗
- 使用 Philips Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式改善您的日常美容護理

PHILIPS

IPL 彩光脫毛器

採用 SenselQ 智能感應調控科技 精準護理腋下及比堅尼位、身體、面部，附有 SmartSkin 智能膚色感應器，可無線及有線使用

產品特點

每月進行 2 次療程，即可快速見效




初期階段每 2 週只需進行 4 次療程 — 僅其他品牌療程次數的一半。之後，每月修整一次以維持效果。

SenselQ 智能感溫調控技術



Lumea 9000 系列設有 5 種容易調節的彩光設定。我們的 SmartSkin 智能膚色感應器能讀取您的膚色，並協助您找到最舒適的設定。各款智能配件可因應身體各部位提供所需的療程。

可有線及無線操作，方便使用

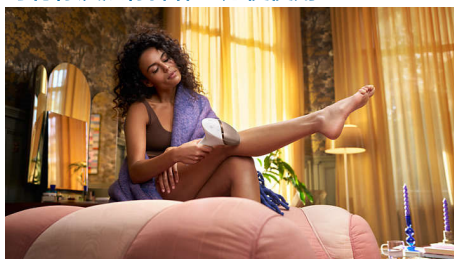

Philips Lumea 以方便易用為設計原則。有線操作方便迅速護理大面積身體部位，例如腿部；而無

線電池模式則方便精準地護理難以觸及的身體部位。

Philips Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式



我們的免費指導應用程式助您計劃並遵守療程時間表，然後陪伴您逐步完成每一次療程。超過 210 萬用戶下載。

適用於大部分皮膚和毛髮類型



使用 IPL 彩光脫毛器的先決條件是毛髮色素和膚色色素之間必須有對比度，因此它適用於天然的深金色、棕色和黑色毛髮，以及淺棕色至深棕色膚色 (I-V)。

BRI955/00

規格

技術規格 配件

- 身體療程配件：形狀：外彎，出光口尺寸：4.1 平方厘米，為身體訂製的療程：腿部、手臂及腹部
- 面部療程配件：形狀：平坦，出光口尺寸：2 平方厘米，額外濾光片，為面部訂製的療程：上唇、下巴和下頷
- 精準療程配件：出光口尺寸：3 平方厘米

安全和可調節設置

- 複合紫外光濾光片：保護您的皮膚免受紫外線傷害
- 5 種光能設定：按您的皮膚性質調整
- 整合式安全設計：防止意外閃動
- 膚色感應器：偵測您的膚色
- SmartSkin 智能膚色感應器：按需要提供正確的設定提示

應用模式

- 滑動閃光：方便快速使用
- 對準閃光：用於細小部位
- 有線 / 無線使用：可無線及有線使用

技術規格

- 高性能燈：持久耐用，450,000 次閃光，等於 39 年燈泡使用壽命 **

服務

- 保養：2 年全球保養 + 於 90 日內註冊產品享 1 年額外保養

內含物件

- 使用說明：用戶手冊
- 儲存：精美收納袋
- 變壓器：19.5V / 4000mA

使用時間

- 腋下：2.5 分鐘
- 比堅尼線：2 分鐘
- 面部：1.5 分鐘
- 小腿：8.5 分鐘

* 完成 12 次療程後，腿部毛髮減少達 78%，比堅尼部位毛髮減少達 64%，腋下毛髮減少達 65%。

** 中位數：完成 12 次療程後，毛髮減少達 58%

*** 根據療程時間表的腿部量度結果，脫毛效果或因人而異

*** 需依照建議的脫毛療程時間表

*** 以用於小腿、比堅尼位、腋下和面部計算。Philips 的全球兩

年保養不會因彩光燈的使用壽命而延長。

***** 根據於荷蘭及奧地利進行的調查結果，46 位女性，經過

3 次腿部、比堅尼部位和腋下療程，經過 2 次面部療程

***** 根據無線使用、出光口尺寸和弧形配件

***** 測試於 2020 年在英國進行，共 190 位受訪者接受測

試



出版日期 2025-01-24

版本：27.0.3

EAN: 87 20689 01558 5

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com