

PHILIPS

Sistem IPL de
îndepărtare a părului

Lumea Essential

Pentru utilizare numai pe corp

15 minute pentru tratarea
gambelor

Durată viață >100.000 impulsuri
lumină

Cablu foarte lung



SC1991/00



Modul ideal de a împiedica creșterea părului pentru a obține o piele catifelată, acasă

Lumea IPL de la Philips este minunat pentru a preveni reapariția părului pe corp. Impulsurile delicate de lumină, aplicate cu regularitate, păstrează pielea netedă ca mătasea în fiecare zi.

Catifelare de durată

- Eficient fără efort
- Piele catifelată în fiecare zi

Îndepărtarea părului cu tehnologia IPL

- Adaptat pentru utilizare sigură în confortul casei tale

Aplicare delicată și eficientă, chiar și pe piele sensibilă

- Pentru utilizarea pe corp
- Reglabil în funcție de tipul de piele
- Cinci setări reglabile de energie luminoasă
- Accesoriu mai mare pentru corp pentru tratament rapid

Design compact, cu fir

- Fără piese de schimb, fără costuri ascunse


Repere

Piele catifelată în fiecare zi



Philips Lumea aplică impulsuri delicate de lumină la rădăcina părului. În consecință, părul cade în mod natural, iar creșterea părului este inhibată. Repetarea regulată a acestui tratament îți va păstra pielea netedă în fiecare zi.

Eficient fără efort

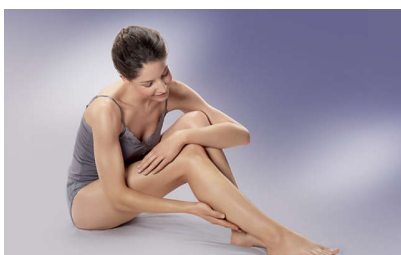

Studiile noastre clinice au arătat o reducere semnificativă a părului după patru tratamente bisăptămânale având ca rezultat o piele netedă fără păr. Pentru menținerea acestor rezultate, ajunge să repeți tratamentul la nevoie. Intervalul de timp dintre tratamente poate varia în funcție de creșterea părului.

Tehnologia IPL



Philips Lumea utilizează o tehnologie inovatoare pe bază de lumină numită IPL (lumină intens pulsată), derivată din tehnologia

utilizată în saloanele profesionale de frumusețe. Philips a adaptat această tehnologie pentru utilizare sigură și eficientă în confortul casei tale. Philips a colaborat cu dermatologi de marcă pentru a dezvolta sistemul nostru inovator de îndepărtare a părului. Timp de peste 10 ani am făcut cercetări de piață extensive pe segmentul consumatori în care am inclus peste 2000 de voluntari.

5 setări de energie luminoasă



Philips Lumea are cinci setări reglabile de energie luminoasă pentru a asigura tratamentul delicat, dar eficient. Utilizat corect, tratamentul IPL cu Philips Lumea este sigur și delicat, putând fi utilizat chiar și în zonele cu piele sensibilă și în zonele sensibile ale corpului.

Zone de aplicare



Utilizează cu încredere pentru a îndepărta părul din zonele corpului aflate sub linia gâtului: picioare, zona axială, zona inghinală, brațe și abdomen.

Accesoriu mai mare pentru corp, 4 cm²




Accesorul mai mare pentru corp permite tratarea pe zone mari cum ar fi picioarele.

Nu sunt necesare piese de schimb



Philips Lumea este o soluție completă, gata de utilizare chiar din cutie. Mai important, nu necesită nicio lampă de schimb sau gel.

Toate tipurile de păr și piele

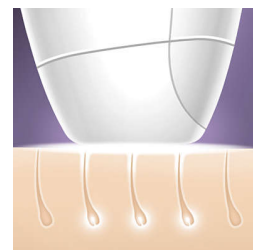

Philips Lumea are acțiune eficientă asupra părului blond închis (natural), șaten și negru. Ca și alte tratamente pe bază de lumină, Philips Lumea NU este eficient pentru părul roșcat, blond deschis sau alb/cenușiu. Philips Lumea NU este adecvat nici pentru pielea închisă la culoare.

Specificații

Zone de aplicare

Zonele corpului: Brațe, Picioare, Ombilic, Zona inghinală, Axile

Siguranță și setări reglabile

Filtru UV integrat: Îți protejează pielea de lumina UV

5 setări pentru energia luminii: Reglabil în funcție de tipul de piele

Sistem de siguranță integrat: Previne pulsarea neintenționată

Mod de aplicare

Pas și pulsație: Pentru tratarea zonelor curbate
Utilizare cu cablu / fără fir: Cu fir

Putere

Voltaj: 100-240 V

Specificații tehnice

Lampă cu performanță idicată: Furnizează > 100.000 pulsații

Atașamente

Fixare corp (4cm2): Pentru utilizare sub linia gâtului

Serviciu

Garanție: 2 ani garanție internațională

Articole incluse

Instrucțiuni de folosire: Ghid de utilizare rapidă, Manual de utilizare

Depozitare: Husă

Adaptor: 24 V/1500 mA

Timp de aplicare

Membrului inferior: 8 min

Subsuoară: 1 min

Zona inghinală: 1 min

