

# PHILIPS

IPL-  
ontharingsapparaat

Lumea IPL 7000  
Series

5 handmatige  
intensiteitsinstellingen

3 opzetstukken: lichaam,  
gezicht, bikini

Lumea IPL-app

Gebruik met snoer



BRI923/00



## Geweldige resultaten en waar voor uw geld

Geniet 12 maanden lang van een haarvrije, gladde huid\*

Krijg een haarvrije, gladde huid met onze Lumea IPL 7000-serie. Zachte en effectieve behandelingen met opzetstukken voor uw lichaam, gezicht en de bikinilijn.

### Zacht en effectief voor een langdurig gladde huid

- Snel resultaat met slechts 1 behandeling per 2 weken.
- Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor gemak en effectiviteit
- Extra lange kabel voor extra flexibiliteit tijdens behandelingen

### Volledige oplossing voor gezicht en lichaam

- Volledige oplossing voor gezicht en lichaam met 3 opzetstukken
- Verkrijgbaag met Satin Compact-pentrimmer
- Geschikt voor een breed scala aan huidtinten en haarkleuren

### Gepersonaliseerde IPL ontharingsbehandeling

- Skin Tone-sensor en 5 intensiteitsinstellingen
- Optimaliseer uw routine met de Philips Lumea IPL-app

# Kenmerken

## 2x per maand voor snelle resultaten



De eerste fase bestaat uit 4 behandelingen om de 2 weken – dat is de helft van het aantal dat u bij andere merken nodig hebt.

## Skin Tone-sensor



Kies uit 5 intensiteitsinstellingen voor een comfortabele ervaring. De Skin Tone-sensor zorgt dat u geen delen van uw huid behandelt die te donker zijn voor IPL-behandeling.

## Extra lange kabel




Handig in gebruik dankzij een extra lange kabel voor eenvoudige toegang en verbeterde beweegbaarheid.

## 3 speciale opzetstukken




Verschillende koppen voor lichaam, gezicht en bikini werken met snelheid en precisie voor zacht gebruik, zelfs op gevoelige gebieden. Het opzetstuk voor het gezicht heeft een geïntegreerd lichtfilter voor nauwkeurige behandeling.

## Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen

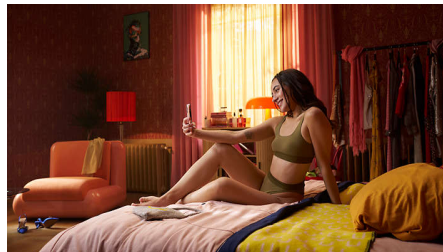

Als leider op het gebied van gezondheidstechnologie heeft Philips Lumea IPL ontwikkeld in overleg met dermatologen, voor eenvoudig en effectief gebruik in de veiligheid van uw huis. Lumea IPL is afgeleid van technologie die in professionele salons wordt gebruikt en biedt een zachte behandeling, zelfs op gevoelige gebieden.

## Philips Lumea IPL-app

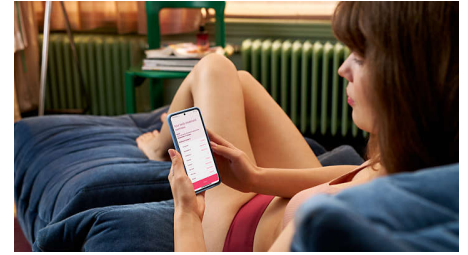

Onze gratis coaching-app helpt u met het plannen en vasthouden van uw behandelingschema, en leidt u stapsgewijs door iedere sessie. Door meer dan 2,1 miljoen gebruikers gedownload.

## Satin Compact-pentrimmer



Voltooi uw schoonheidsroutine: de Satin Compact-pentrimmer is een discreet beauty-hulpmiddel om onderweg snel en eenvoudig zelfs de fijnste gezichtsbehaaring te verwijderen.

## Voor veel huid- en haartypes

Suitable skin tones



Suitable body hair colors



IPL heeft contrast nodig tussen de pigmenten in de haarkleur en de huidtint en werkt daardoor op natuurlijk donkerblond, bruin en zwart haar en op huidtinten van licht tot gemiddeld bruin(I- IV).

# Specificaties

## Veiligheid en aan te passen standen

**Geïntegreerd UV-filter:** Beschermt uw huid tegen UV-straling

**5 lichtsterktes:** Aanpasbaar aan uw huidtype

**Geïntegreerd veiligheidssysteem:** Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

## Toepassingsmodus

**Glij- en flitsmodus:** Voor snelle toepassing

**Stap en Flits:** Voor behandeling op kleine zones

**Met of zonder snoer te gebruiken:** Gebruik met snoer

## Pentrimmer

**Accessoires:** Wenkbrauwkam, Reinigingsborsteltje

**Gebruiksgemak:** Compact handvat

**Vermogen:** AAA-batterij

## Vermogen

Gebruik met snoer

## Technische specificaties

**Lamp met hoge prestaties:** Duurzaam, 250.000 pulsen, gelijk aan een levensduur voor de lamp van 20 jaar\*\*

**Spanning:** 100-240 V

## Accessoires

**Lichaamsopzetstuk (4 cm<sup>2</sup>):** Voor gebruik onder de neklijn

**Gezichtsopzetstuk (2 cm<sup>2</sup>):** Voor gebruik onder de ogen

**Hulpstuk voor bikinilijn (2 cm<sup>2</sup>):** Special treatment bikini hair

## Service

**Garantie:** 2 jaar algemene garantie plus 1 jaar extra garantie bij productregistratie binnen 90 dagen

## Meegeleverde artikelen

**Gebruiksaanwijzing:** Gebruiksaanwijzing

**Opbergen:** Opbergetui

**Adapter:** 24 V / 1500 mA

**Accessoire:** Schoonmaakdoekje

## Behandeltijd

**Bikini:** 4 minuten

**Onderbeen:** 15 min.

**Oksels:** 2,5 min.

**Bikinilijn:** 4 min.

**Delen van het gezicht:** 2 min.

## Technische specificaties hulpstukken

**Hulpstuk voor lichaam:** Venstergrootte: 4,0 cm<sup>2</sup>, Behandeling voor lichaam: benen, armen, buik en onderarmen

**Hulpstuk voor het gezicht:** Venstergrootte: 2 cm<sup>2</sup>, extra filter, Behandeling voor gezicht: bovenlip, kin en kaaklijn

**Hulpstuk voor bikinilijn:** Venstergrootte: 2 cm<sup>2</sup>, Behandeling voor bikinilijn

