




Philips
Infraröd InfraCare-lampa

650 W

Halvkroppsbehandling
124 cm hög

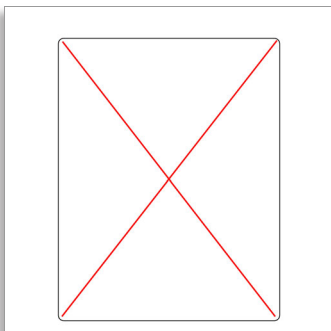

HP3643

Effektiv smärtlindring

Infraröd värme som går på djupet

Philips InfraCare ger effektiv smärtlindring för muskler och leder. Den infraröda lampan på 650 W är mycket behaglig och dess infraröda värme tränger djupt in i huden, stimulerar blodcirkulationen och ger lindring i halvkroppsområden på 60 x 40 cm.

Lättanvänd

- Justerbar vinkel med rotation
- Du når enkelt hals och skuldror

Effektiv smärtlindring

- Infraröd värme som går på djupet

Halvkroppsbehandling

- 650 W infraröd halogenlampa

Stimulerar blodcirkulationen

- Stimulerar blodcirkulationen

PHILIPS

Specifikationer

Vikt och mått

- Product weight: 7,2 kg
- Product dimensions: 29x124x29 cm

Tekniska specifikationer

- Cord length: 300 m
- Power: 650 W
- Frequency: 50-60 Hz

Lättanvänd

- 2 handtag: för enkel transport och placering
- Justerbart: 0–40 grader (bakåt)
- På/av-knapp
- Förlängningsbar höjd: 62-127 cm
- Lamphölje som är lätt att ställa in (vänster/höger): 90
- Lamphölje som är lätt att ställa in (upp/ner): 45

Vikt och mått

- F-låda, vikt: 9,1 kg
- Kvantitet på europall: 24 pcs
- F-låda, mått (= A-låda): 34,5x60x39 cm
- F-låda, mått: 34,5x60x39 cm
- F-låda, vikt (= A-låda): 9,1 kg

Tekniska specifikationer

- Isolering: Klass II (dubbel isolering)
- Livslängd för lampor: 500 timmar

Säkerhet

- 15 minuters automatisk avstängning
- IEC-certifierad: Uppfyller IEC 60601 och 60335

Halvkroppsbehandling

- Infraröd halogenlampa: 650 W
- Behandlingsområde: 60 x 40 cm

Logistisk information

- Ursprungsland: Tyskland

Medicinsk utrustning

- Direktiv om medicintekniska produkter: 2007/47/EG, MDD 93/42/EEG

Logistisk information

- CTV-kod: 884364301000

Effektiv smärtlindring

- Värme som går på djupet

Tekniska specifikationer

- Voltage: 220–230 V, Taiwan 110 V

Funktioner

650 W infraröd halogenlampa

Philips InfraCare HP 3643 har optimerats för att effektivt lindra smärta i områden på 60 x 40 cm, t.ex. hela ryggen, båda axlarna + nacken eller ett lår. InfraCare har en innovativ infraröd halogenlamptechnik. Den särskilda optiken, filtret och den kraftfulla halogenlampan på 650 W har optimerats för halvkroppsbehandling (60 x 40 cm), och ger mycket behagligare värme eftersom den infraröda värmen är jämnare fördelad över behandlingsområdet.

Justerbar vinkel med rotation

Det är enkelt att använda InfraCare HP 3643 för halvkroppsbehandling och i olika situationer (t.ex. när du ligger på en säng eller soffan) eftersom den är så flexibel. Förutom höjjusteringen kan även lamphöljet enkelt ställas in så att rätt kroppsdel behandlas. Flytta lamphöljet till ett horisontellt eller vertikalt läge (vänster/höger 90 grader) och luta det uppåt eller nedåt (45 grader).

Du når enkelt hals och skuldror

Med InfraCare HP3643 når du enkelt hals och skuldror och ger dig själv en optimal värmebehandling av ömma muskler. Lamphusetets höjd kan ställas in från 60 till 120 cm, så att du får en bekväm position vare sig du ligger på sängen eller sitter i fåtöljen.

Stimulerar blodcirkulationen

Infrarött ljus och värme tränger djupt in i huden, stimulerar blodcirkulationen och vidgar blodkärlen. Dessutom ökar infrarött ljus ämnesomsättningen och främjar kroppens rensning från avfallsprodukter.

Infraröd värme som går på djupet

Infrarött ljus ger beprövat effektiv smärtlindring vid muskelsmärter och stela leder. Den behagliga värmen som skapas av infrarött ljus tränger djupt in i huden, stimulerar blodcirkulationen och värmer upp musklerna. Behandlingen lösgör automatiskt musklerna och får muskelspänningar att släppa. Eftersom värmen gör vävnaden smidigare minskar även problem med stela leder.

