



Philips
紅外線燈

650 瓦
獨特半身照射
可調校角度及旋轉



PR3140/00

有效 * 減低痛楚，無需藥物

臨床實證技術 *

採用紅外線技術，有效舒緩痛楚，無需藥物。經臨床實證技術有助改善肌肉和關節疼痛，例如下背痛和類風濕性關節炎非炎症期等病徵。

有效 * 治療

- 舒緩痛楚，提升活動能力
- 有助身體自然康復

強效舒緩痛楚

- 獨特半身照射
- 專為舒適居家使用而設

經證明對健康有益

- 經臨床證實
- 分類醫療器材

PHILIPS

產品特點

有效 * 減低痛楚




採用無需藥物和非侵入性的紅外線技術，適用於紓緩關節和肌肉痛楚。InfraCare PR3140 有助均勻分佈光線和熱力，提供有效獨特的半身照射。裝置可配合最適合您的方式使用，以提供有效舒適的治療，讓您享受活動自如的活躍生活。

強效半身照射



InfraCare 可確保對身體作出自然反應，有效紓緩痛楚，其設計旨在傳送最高的紅外線波段水平至最深層的皮膚，提供紓緩痛楚的完美半身照射。

經臨床證實

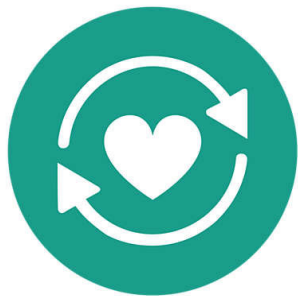

備受專業人士信賴和使用的科技。經臨床驗證可以客觀方式改善活動關節*。InfraCare 經證實可


為 71% 類風濕性關節炎患者及 72% 腰背痛患者大幅減輕痛楚*。

分類醫療器材



以安全有效的方法治療痛楚。InfraCare 符合 IEC 60601-1 第 3 版對醫療器材的標準。

可調校角度

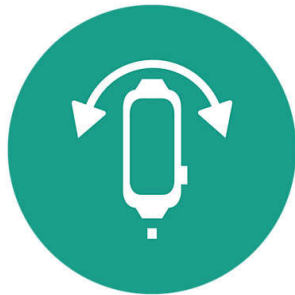

InfraCare 650 瓦燈管可以輕鬆上下左右調整，無論是躺在床上還是坐在沙發，都能方便調整合適的半身照射位置。

獨特半身照射

InfraCare 650 瓦燈管可配合最適合您的方式使用，以提供有效舒適的治療，更可輕鬆在整個背部和更大的身體範圍使用，以提供最佳的治療。

規格

重量與尺寸

- Product weight: 7 kg
- 電源: 650 瓦
- 產品尺寸: 29 x 124 x 29 (最低位置) 厘米
- 電壓: 110 伏或 220 - 230 V
- 電線長度: 300 m
- 頻率: 50-60 Hz
- 可伸展高度: 65-130 厘米

重量與尺寸

- 彩盒尺寸 (與 A- 盒相同): 40.1 x 51.4 x 41.3 厘米
- 計時器: 可調校 0 至 30 分鐘的計時器
- 靈活調整: 上下: -20 至 +40 度及左右: -40 至 +40 度。旋轉範圍達 90 度 (左 / 右)

技術規格

- 絕緣層: Class II (雙重絕緣層)
- 燈泡壽命: 500 小時

物流數據

- 原產地: 匈牙利
- 紅外線鹵素燈管: 650 瓦
- 照射部位: 60 x 40 厘米
- 通過 IEC 認證: IEC 60601-1, 第 3 版

醫療產品

- 醫療器材指令: 2007/47/EC, MDD 93/42/EEC

安全

- 30 分鐘自動斷電安全裝置: 是

重量與尺寸

- 底部直徑: 39.4 厘米
- 最高高度: 15.4 厘米
- 包裝尺寸: 41.5 x 40.0 x 51.5 厘米



出版日期 2021-06-09

版本: 2.0.2

EAN: 08 71010 38029 14

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* W. Siems, et al (2010 年): 「照射紅外線 A 後，可改善痛楚、活動能力、退化性關節炎患者的 MDA 血漿水平、腰背痛及類風濕性關節炎」 Acta Biochimica Polonica 57(3), 313-319