

PHILIPS


Verzachting van
spierpijn met infrarood

650 W

Behandeling van het halve
lichaam

63,5 cm hoog

HP3641

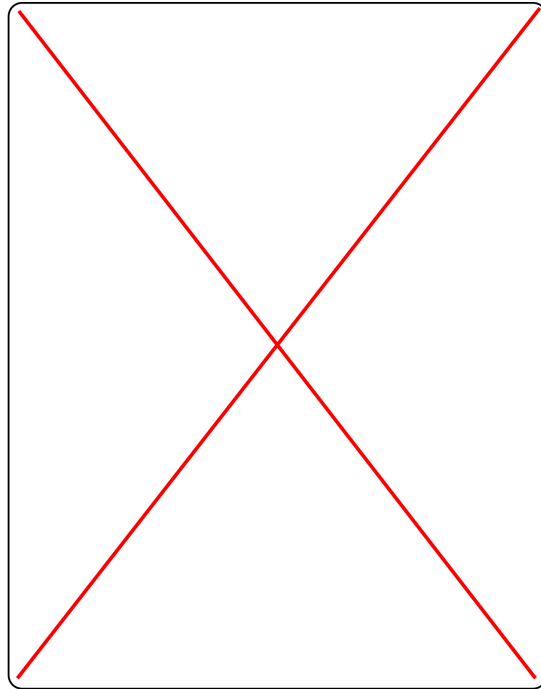

Effectieve verzachting van pijn

Diep doordringende infraroodwarmte

Philips InfraCare verzacht pijn in de spieren en gewrichten. De infraroodwarmte van 650 watt voelt zeer comfortabel aan en dringt diep door in de huid, waardoor de bloedsomloop wordt gestimuleerd. Dit biedt gerichte verzachting voor gebieden van 60 x 40 centimeter, oftewel het halve lichaam.

Gebruiksvriendelijk

- Instelbare hoek met rotatie

Bewezen gezondheidsvoordelen

- Ondersteund door de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD)

Behandelingsbediening

- Digitale timer met automatische uitschakeling

Kenmerken

Instelbare hoek met rotatie

De InfraCare HP 3643 is eenvoudig te gebruiken voor behandelingen van het halve lichaam en in verschillende situaties (bijvoorbeeld wanneer u op een bed of bank ligt), dankzij de maximale flexibiliteit. De hoogte is instelbaar. Daarnaast is het ook mogelijk de lampbehuizing eenvoudig horizontaal en verticaal te verstellen (links/rechts 90 graden) en te kantelen (45 graden) om het pijnlijke lichaamsdeel optimaal te behandelen.

Digitale timer met automatische uitschakeling

De behandeltijd kan eenvoudig worden beheerd door het geadviseerde aantal minuten of het gewenste aantal minuten in te stellen.

De digitale timer telt automatisch af en schakelt ook automatisch uit wanneer de sessie is afgelopen.

Ondersteund door de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD)

Dit apparaat heeft bewezen gezondheidsvoordelen te hebben, zoals gecertificeerd door de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD).

Specificaties

Gewicht en afmetingen

Product dimensions: 29,0 x 63,5 x 29,0 (W x H x D) cm

Product weight: 5,5 kg

Gebruiksvriendelijk

2 handgrepen: voor gemakkelijke plaatsing en vervoer

Aan/uitschakelaar

Digitale gebruikersinterface: voor het aanpassen van de duur en de intensiteit

Extendable height: 45-80 cm

Eenvoudig verstelbare lampbehuizing (links/rechts): 90

Eenvoudig verstelbare lampbehuizing (omhoog/omlaag): 45

Technische specificaties

Power: 650 W

Voltage: 220 V

Cord length: 3 m

Frequency: 50 en 60 Hz

Gewicht en afmetingen

Aant. op Europallet: 18 pcs

F-box dimensions (=A-box): 33,9 x 80,0 x 36,5 (W x H x D) cm

Gewicht F-box (= A-box): 6,5 kg

Technische specificaties

Insulation: Klasse II (dubbel geïsoleerd)

Levensduur van lampen: 500 hr

Veiligheid

IEC certified: Voldoet aan IEC 60601 en 60335

Logistieke gegevens

Country of origin: Duitsland

Behandeling voor het halve lichaam

Infrared halogen lamp: 650 W

Treatment area: 60 x 40 cm

Logistieke gegevens

CTV-code: 884364101000

Effectieve verzachting van pijn

Diep doordringende warmte

Gelijkmatige warmteverdeling: Nu een veel aangename warmte

Medische apparatuur

Bewezen gezondheidsvoordelen: ondersteund door een certificaat van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD)

Behandelingsbediening

Digitale timer: met automatische uitschakelfunctie

Dimmer met 3 warmtestanden

Pauzefunctie

