

# PHILIPS

## InfraCare- infraroodlamp

650 W

Behandeling van het halve  
lichaam

63,5 cm hoog

HP3641



## Effectieve verzachting van pijn

### Diep doordringende infraroodwarmte

Philips InfraCare verzacht pijn in de spieren en gewrichten. De infraroodwarmte van 650 watt voelt zeer comfortabel aan en dringt diep door in de huid, waardoor de bloedsomloop wordt gestimuleerd. Dit biedt gerichte verzachting voor gebieden van 60 x 40 centimeter, bijvoorbeeld de bovenste helft van uw rug.

#### **Gebruiksvriendelijk**

- Instelbare hoek met rotatie

#### **Effectieve verzachting van pijn**

- Diep doordringende infraroodwarmte

#### **Behandeling voor het halve lichaam**

- Infrarood halogeenlamp (650 watt)


## Kenmerken

### Infrarood halogeenlamp (650 watt)



De Philips InfraCare HP 3643 is geoptimaliseerd voor een effectieve verlichting van pijn in gebieden van 60 x 40 cm, zoals de gehele rug, beide schouders en de nek, of de dijen. De InfraCare is voorzien van innovatieve technologie op het gebied van infrarood halogeenlicht. De speciale lenzen, het speciale filter en de krachtige halogeenlamp van 650 watt zijn geoptimaliseerd voor de behandeling van het halve lichaam (60 x 40 cm), waarbij de infraroodwarmte gelijkmatig over het te behandelen gebied wordt verspreid.

### Instelbare hoek met rotatie

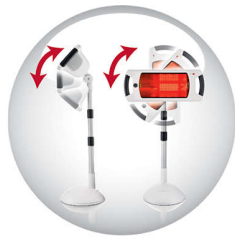

De InfraCare HP 3643 is eenvoudig te gebruiken voor behandelingen van het halve lichaam en in verschillende situaties

(bijvoorbeeld wanneer u op een bed of bank ligt), dankzij de maximale flexibiliteit. De hoogte is instelbaar. Daarnaast is het ook mogelijk de lampbehuizing eenvoudig horizontaal en verticaal te verstellen (links/rechts 90 graden) en te kantelen (45 graden) om het pijnlijke lichaamsdeel optimaal te behandelen.

### Diep doordringende infraroodwarmte



Onderzoek heeft aangetoond dat infraroodlicht spierpijn en andere pijnen veroorzaakt door stijve gewrichten effectief verzacht. De aangename warmte die het infraroodlicht genereert, dringt diep door in uw huid, en helpt de bloedcirculatie stimuleren en uw spieren verwarmen. Hierdoor worden uw spieren zachter en ontspannen zij zich. Omdat de warmte het weefsel soepeler maakt, worden uw gewrichten flexibeler en voelt u zich minder stijf.

### Gewicht en afmetingen

**Product dimensions:** 29,0 x 63,5 x 29,0 (W x H x D) cm

**Product weight:** 5,5 kg

### Gebruiksvriendelijk

**2 handgrepen:** voor gemakkelijke plaatsing en vervoer

**Aan/uitschakelaar**

**Digitale gebruikersinterface:** voor het aanpassen van de duur en de intensiteit

**Extendable height:** 45-80 cm

**Eenvoudig verstelbare lampbehuizing (links/rechts):** 90

**Eenvoudig verstelbare lampbehuizing (omhoog/omlaag):** 45

### Technische specificaties

**Power:** 650 W

**Voltage:** 230 V

**Cord length:** 300 m

**Frequency:** 50/60 Hz

### Gewicht en afmetingen

**Aant. op Europallet:** 18 pcs

**F-box dimensions (=A-box):** 33,9 x 80,0 x 36,5 (W x H x D) cm

**Gewicht F-box (= A-box):** 6,5 kg

### Technische specificaties

**Insulation:** Klasse II (dubbel geïsoleerd)

**Levensduur van lampen:** 500 hour(s)

### Veiligheid

**IEC certified:** Voldoet aan IEC 60601 en 60335

### Logistieke gegevens

**Country of origin:** Duitsland

### Behandeling voor het halve lichaam

**Treatment area:** 60 x 40 cm

**Infrared halogen lamp:** 650 W

### Logistieke gegevens

**CTV-code:** 884364101000

### Medische apparatuur

**Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD):** 2007/47/EG, MDD 93/42/EG

### Effectieve verzachting van pijn

Diep doordringende warmte

### Behandelingsbediening

**Digitale timer:** met automatische uitschakelfunctie

**Dimmer met 3 warmtestanden**

**Paufunctie**

