

PHILIPS

Næsemaske med
minimal kontakt

DreamWear

Pakke

og 4 pudestørrelser

1 ramme, størrelse medium



HH1111



Som ikke at have noget på*

Med friheden og komforten ved DreamWear kan du sove, som du ønsker det
*2015 Philips spørgeskema om brugerpræference

Nem at anvende

- Komfortabel og blød

Frit synsfelt

- Det åbne design giver et ekstremt bredt synsfelt

Det bedste af puder og næsemasker

- Komfort og ydelse

Innovativt design

- Pude til under næsen
- Tilslutning af luftslange øverst på hovedet
- Modulært design i 4 dele

Behageligt design

- Slankt hovedtøj
- Blød, fleksibel ramme

Vigtigste nyheder

Innovativ maske til under næsen



Forhindrer røde mærker, ubehag eller irritation i næseborene eller på næseryggen *

Bevægelsesfrihed



Ved at flytte slangens placering til toppen af hovedet giver DreamWear større bevægelsesfrihed i løbet af natten. Brugere udtalte, at de ikke behøvede at vælge én sovestilling, når de bar DreamWear.*

Modulært design i 4 dele



Modulært design til hurtig samling og rengøring, med udskiftelige puder, som fås i fire størrelser.

Slankt hovedtøj




DreamWear kombinerer komfort med æstetik: Ikke alene vil du knapt kunne mærke masken, den er også diskret af udseende.

Bløde stofstropper



Giver en blød berøring af din kind

Blød, fleksibel ramme

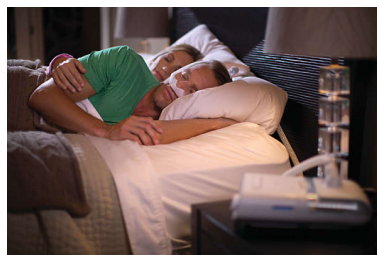


Det fleksible materiale, luften strømmer igennem, anbringes forsigtigt på huden og er behagelig at have på.

Pude til under næsen



Forhindrer de røde mærker og irritation af næseryggen, som mange patienter oplever, når de er iført en traditionel fuld ansigtsmaske

Frit udsyn

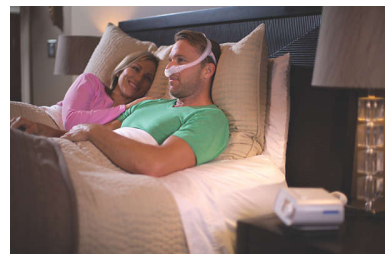

Det er nemt at bære briller, læse, se TV eller bruge en computer eller tablet, før du falder i søvn.

Specifikationer

Innovativt design

Frit synsfelt: Brug briller, læs eller se TV

Specifikationer

Driftstryk: 4 – 20 cmH₂O

Lydtryksniveau: 18 dBA

Antal dele: Fem

Pudemateriale: Silikone

Hovedtøjsmateriale: Polyuretanskum,
nylon/Spandex

Rammemateriale: Polykarbonat

Rengøringsinstruktioner: maske: Hand wash
with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

Rengøring: hovedtøj, slanger: Hand wash with
mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Vinkel-/drejeledsmateriale: Polykarbonat

Stofærme-materiale: Polyester/Spandex

Komfort

Pude til under næsen: Forhindrer røde
mærker i næseborene

Bløde stofstropper: Blød mod kinden

Blød, fleksibel ramme: Giver en blød berøring
af ansigtet

Brugsformål

Skal bruges på patienter <gt/> 30 kg: with
CPAP prescription

Service

Garanti: 90-days

