

PHILIPS

Forstøverkammer
med ventil og maske

OptiChamber
Diamond

Stor LiteTouch-maske medfølger

Kompakt design 140 ml volumen

Til almindelig astmamedicin



HH1308



Hjælper dig med at bevare styringen

Designet til at forbedre medicinlevering

OptiChamber Diamond er designet til at levere mere medicin til lungerne. Det antistatiske materiale inde i slangen lader aerosolen være suspenderet i længere tid, så du får mere tid til at inhalere.(1,2)

Komfort

- Valgfri maskekanturer mod ansigtet for at gøre den lettere at tilpasse
- Én størrelse mundstykke kan bruges til alle

Effektiv behandling

- Få medicin til lungerne**

Designet til at give resultater

- Særlige funktioner gør den nem at bruge og vedligeholde
- Lavmodstandsventiler gør det nemmere for dig at ånde
- Antistatisk opholdskammer med ventiler giver dig mere tid

Til almindeligt ordineret medicin

- Til almindeligt ordineret medicin

Vigtigste nyheder

Få medicin til lungerne



OptiChamber Diamond er udviklet for at forbedre med aerosol levering til lungerne og kan hjælpe dig med at maksimere effektiviteten af dine inhalationsbehandlinger.

Træk vejret nemmere

Low resistance valves



Lavmodstandsventiler åbner sig nemt, selv ved lave flowhastigheder fra børn, så du eller dit barn nemt kan trække vejret gennem kammeret.*

Kompatibel



OptiChamber Diamond er designet til brug med alle dine almindeligt ordinerede inhalatorlægemidler.

Nem at bruge, nem at vedligeholde



High-flow whistle

Adapteren sørger for at din inhalator sidder sikkert på plads, alt i mens den indbyggede fløjte giver dig besked, hvis du indånder for hurtigt. Både mundstykket og adapteren er nemme at afmontere for at rengøre.


Tid til at trække vejret



Anti-static chamber

OptiChamber Diamond forstøverkammer er designet til at levere mere medicin til lungerne. Det antistatiske materiale inde i slangen lader aerosolen være suspenderet i længere tid, så du får mere tid til at inhalere.*

Komfort

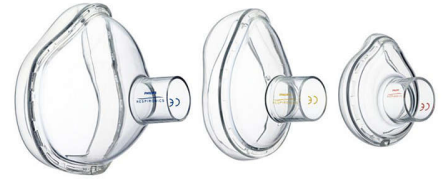

Den aftagelige LiteTouch-ansigtsmaske har en blød kontureret pude, der passer nemt og hviler let på ansigtet med henblik på at give en mere komfortabel behandling. SoftTouch-forsøglingen hjælper med at reducere lækage.**

Til børn og voksne



OptiChamber Diamond er designet med et trindeligt mundstykke, så den kan bruges af både børn og voksne.

Specifikationer

Pakkens indhold

Omfatter: Large LiteTouch Mask, OptiChamber Diamond

Materiale

Kammer: Acrylonitril-butadienstyren

LiteTouch-maske: Polyetylenerephthalat (PET), silikone

Ventiler: Silicone

Vedligeholdelse

Rengøring: Warm water and liquid soap

Levetidsdata: Replace after one year

Produktoplysninger

Længde: 14.2 cm (5.6")

Mundstykke: Interfaces w 22 mm connectors

Lydstyrke: 140 ml

Til brug sammen med: Adults



* **Slator L., von Hollen D., Sandell D., Hatley R.H.M. In vitro comparison of the Effect of Inhalation Delay and flow rate on the emitted dose from three valved holding chambers. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 2014, 27(S1): 37-43.

* (1)Berlinski A., von Hollen D., Hatley R.H.M., Hardaker L.E.A., Nikander K. Drug delivery in asthmatic children following coordinated and uncoordinated inhalation maneuvers: a randomized crossover trial. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 2017, 30(3): 182-189.

** **Hatley R.H.M., von Hollen D., Sandell D., Slator L. In-vitro Characterization of the OptiChamber Diamond valved holding chamber. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 2014, 27(S1): 24-36.