

PHILIPS

Ventilförsedd
andningsbehållare med mask

OptiChamber Diamond

LiteTouch-mask (Large)
medföljer

Kompakt design 140 ml volym
För vanliga astmaläkemedel



HH1308



Hjälper dig att behålla kontrollen

Utformad för att förbättra tillförseln av läkemedel

Med OptiChamber Diamond kan mer läkemedel tillföras till lungorna. Det antistatiska materialet inuti röret gör att den aerosola medicineringen avges under längre tid, vilket ger dig mer tid att inhalera läkemedlet.(1,2)

Komfort

- Tillbehörsmask anpassar sig till ansiktets konturer så att den passar bättre
- Munstycke i en storlek passar alla

Effektiv behandling

- Få läkemedel till lungorna**

Utformad för god effekt

- Specialfunktioner gör den enkel att använda och underhålla
- Ventiler med lågt motstånd gör att du kan andas utan problem
- Antistatisk ventilförsedd andningsbehållare ger dig mer tid

För vanligt förekommande läkemedel

- För vanligt förekommande läkemedel

Funktioner


Få läkemedel till lungorna



OptiChamber Diamond är utformad för att förbättra aerosoladministrering till lungorna och kan hjälpa dig att maximera effektiviteten av inhalationsbehandlingar.

Andas lättare

Low resistance valves

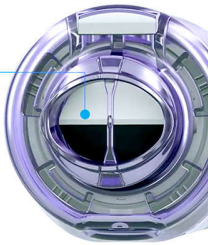

Ventiler med lågt motstånd öppnas obehindrat, även vid låga flödes hastigheter från barn, vilket gör att du eller ditt barn enkelt kan andas genom kammaren.*

Kompatibel



OptiChamber Diamond är utformad för alla vanligt förekommande inhalationsläkemedel.

Enkel användning, enkelt underhåll



High-flow whistle

Adaptorn håller inhalatorn säkert på plats, medan den inbyggda visselpipan ljuder om du andas in för fort. Både munstycket och adaptorn kan enkelt tas bort för rengöring.

Tid att andas




Anti-static chamber

Med OptiChamber Diamond kan mer läkemedel tillföras till lungorna. Det antistatiska materialet inuti röret gör att den

aerosola medicineringen avges under längre tid, vilket ger dig mer tid att inhalera läkemedlet.*1

Komfort

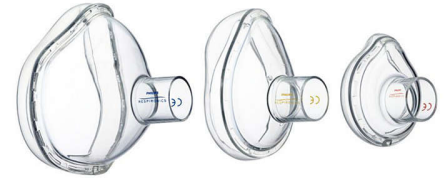

Den löstagbara LiteTouch-masken har en mjuk konturformad kudde som enkelt passar och ligger mjukt mot ansiktet för att ge en bekvämare behandling. SoftTouch-tätningen hjälper till att minska läckage.**3

För vuxna och barn



OptiChamber Diamond är utformad med ett stegvist munstycke och kan användas av både barn och vuxna.

Specifikationer

Förpackningen innehåller

Inklusive: Large LiteTouch Mask, OptiChamber Diamond

Material

Kammare: Akrylnitril-butadien-styren

LiteTouch-mask: Polyester, silikon

Ventiler: Silicone

Underhåll

Rengöring: Warm water and liquid soap

Information om livslängd: Replace after one year

Produktdetaljer

Längd: 14.2 cm (5.6")

Munstycke: Interfaces w 22 mm connectors

Volym: 140 ml

För användning med: Adults



* **Slator L., von Hollen D., Sandell D., Hatley R.H.M. In vitro comparison of the Effect of Inhalation Delay and flow rate on the emitted dose from three valved holding chambers. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 2014, 27(S1): 37-43.

* (†)Berlinski A., von Hollen D., Hatley R.H.M., Hardaker L.E.A., Nikander K. Drug delivery in asthmatic children following coordinated and uncoordinated inhalation maneuvers: a randomized crossover trial. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 2017, 30(3): 182-189.

* **Hatley R.H.M., von Hollen D., Sandell D., Slator L. In vitro Characterization of the OptiChamber Diamond valved holding chamber. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 2014, 27(S1): 24-36.

* ***Tong, K. et al. An instrumented Valved Holding Chamber with facemask to measure application forces and flow in young asthmatic children. Journal of Aerosol Med and Pulm Drug Del. 2014; 27 (Suppl 1): S55-62.