

# PHILIPS

## AVENT

親餵重現單邊電動吸乳器

隨附一個 4 盎司/120 毫升奶瓶

4 種吸乳設定

SCF315/02



## 舒適且有效率的吸乳

以嬰兒的吸吮為靈感來源的主動式按摩

模擬寶寶真實吸吮頻率與觸感，喚醒泌乳本能，帶給媽媽最貼近自然舒適的泌乳過程，並具備快速有效的吸乳便利性

### 更舒適且有效率的吸乳

- 獨特設計讓您擁有舒適的吸乳姿勢
- 親餵重現科技，吸乳韻律像嬰兒吸吮一樣自然
- 包覆貼合乳房，柔軟按摩刺激泌乳
- 吸乳力道最佳化，給您恰到好處的吸力
- 以嬰兒吸吮為靈感來源的主動式按摩

### 更便利且有效率的吸乳

- 低運轉分貝與背光顯示，讓您在夜間輕鬆吸乳，且不擔心吵醒寶寶
- 數位顯示器，輕鬆選擇模式與吸力
- 重量輕，內附攜袋輕鬆帶著走
- 長效馬達兼顧品質與耐用性
- 自然含吮動作，就像親餵
- 防母乳回流設計，不含 BPA
- 自動儲存偏好設定，吸乳輕鬆不煩惱

# 焦點

## 輕鬆的吸乳姿勢



吸乳器具備獨特設計，即使您坐直，也能讓乳汁直接從胸部流入奶瓶或容器。如此一來您在吸乳時便可舒服地坐著：無需向前傾，也能確保所有乳汁流入奶瓶中。吸乳時放鬆舒服地坐著，可幫助乳汁更好分泌。

## 真實自然的吸吮動作與觸感



寶寶就是最棒的泌乳專家。他們含住媽媽的乳頭及乳暈，接著透過舌頭蠕動來刺激乳汁分泌。上述過程賦予我們靈感設計出能主動按摩乳頭和乳暈的親餵重現科技與仿親吮按摩矽膠軟墊。結合主動按摩和模仿真實自然吸吮的馬達吸力，讓母乳源源不絕。

## 親餵重現科技 自然韻律



親餵重現科技創造跟真實在胸前自然吸吮與吞嚥母乳一樣的吸乳方式，快而淺的刺激後接著慢而深層的波動，還原自然的吸吮韻律，讓吸乳體驗更加舒適，同時提升泌乳效率，減少吸乳時間。

## 仿親吮按摩墊

創新仿親吮按摩墊，柔軟矽膠，主動貼合包覆乳房，模擬真實吸吮觸感，吸乳同時按摩與刺激乳腺，幫助刺激快速泌乳。兼顧吸乳舒適度與效率。

## 吸乳力道最佳化

我們全新的單邊電動吸乳器專為提供正確的吸力而設計。有四種刺激模式可供選擇，以刺激更快的泌乳，而四種吸乳模式則可輕鬆舒適地快速吸出母乳。

## 記憶、計時與暫停/開始



智能與直覺化設計。自動記憶模式與吸力偏好設定，隨時以最適合的方式吸乳。

## 安全衛生



吸乳器特殊設計，矽膠隔膜阻隔乳汁與導氣管，防止乳汁回流汙染。所有與母乳接觸的產品都是使用不含 BPA 的安全材質，不含任何可能有有害的化學物質。

## 長效馬達、雙電源




長效馬達設計，能以持久的效能支援吸乳。雙電源採用 4 顆 AA 電池／充電電池與電源供電，讓媽媽隨時隨地都能集乳。

## 安靜馬達、背光顯示器



背光顯示器讓媽媽即使在夜間也能輕鬆吸乳，且不再有惱人或吵雜的噪音。親餵重現電動吸乳器的智能設計，不管在哪個設定值中吸乳都保持安靜，讓媽媽隨時隨地隱密地集乳。

## 智能顯示器

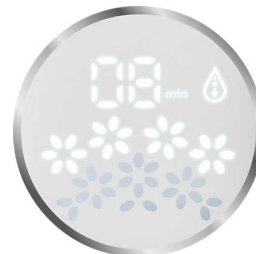

易讀的數位顯示器，搭配直覺式花瓣造型的 LED 指示燈。輕鬆地從按摩模式切換到泌乳模式，並記憶吸力設定且具備計時功能，輕鬆追蹤吸乳時間與電池電力提示。

## 重量輕，方便隨身攜帶

主機僅手掌大小，可使用電池供電，方便隨身攜帶，隨時隨地使用。

## 親乳感奶瓶和奶嘴



自然含吮動作，就像親餵

# 規格

## 吸乳器

材質: 不含 BPA\*

## 設計

奶瓶設計: 人體工學外形, 寬口

吸乳器設計: 輕巧設計

## 原產地

中國: 是

## 材質

奶瓶: 不含 BPA\*, 聚丙烯

吸乳器: 聚丙烯, 不含 BPA\*

奶嘴: 不含 BPA\*, 矽膠

## 產品內容

超柔軟新生兒流量奶嘴: 1 件

奶水儲存杯的密封蓋: 1 件

標準尺寸的襯墊: 1 件

吸乳器本體: 1 件

電源線: 1 條

底座裝置含軟管: 1 件

旅行用外蓋: 1 件

Natural 奶瓶 4 盎司: 1 個奶瓶

吸乳器蓋: 1 件

## 使用簡單

吸乳器使用方式: 與奶瓶和杯子完全相容的系列產品

## 功能

節律波技術: 接近寶寶的自然吸吮模式, 能在更短的時間內得到更多乳汁

設定: 4 種促乳設定與 4 種泌乳設定

柔軟按摩襯墊: 溫和刺激

## 發育階段

階段: 哺乳開始階段

