

PHILIPS

AVENT

Накладки на соски

Тепло материнской груди при кормлении

Защита сосков от раздражения

Средние (21 мм)

2 шт.



SCF153/03



Для долгого и комфортного кормления грудью*

Удобный захват для малыша и бережный контакт с вашей кожей*

Накладки на соски созданы для кормления грудью при возникновении проблем с кормлением или захватом. Сверхтонкая накладка в форме бабочки обеспечивает контакт малыша с материнской грудью кожа к коже.

Футляр для обеспечения гигиены

- Легко содержать чистыми в гигиеничном футляре для переноски и стерилизации

Легкий захват для малыша*

- Созданы для устранения проблем с захватом

Функции устройства


- Удобная форма
- Во время кормления малыш будет ощущать тепло материнской груди

Когда использовать накладку на сосок

- Малыш сможет пить с удобной ему скоростью
- Создано для матерей, испытывающих дискомфорт при кормлении грудью


Особенности

Уникальная форма бабочки

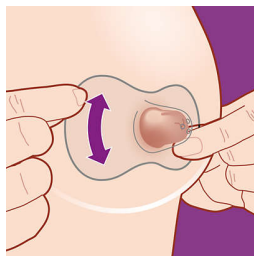


Наши накладки на соски имеют форму бабочки и предназначены для контакта малыша с кожей матери. Благодаря особой форме возможен контакт с грудью не только носом, но и подбородком, что поможет малышу почувствовать запах и кожу матери. Просто разместите накладку по центру соска — так малыш сможет захватить всю ареолу. Защитите свои соски и поддерживайте тактильную связь с вашим малышом.

Созданы для легкого захвата*

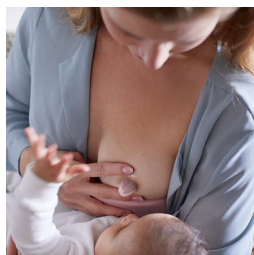

Наши накладки на соски помогут малышам справиться с захватом, а вам — дольше кормить грудью*. Накладки помогут мамам с плоскими и втянутыми сосками, а также малышам, которым трудно сосать: накладки обеспечат легкий захват и стабильную форму соска при паузах во время кормления.

Защита сосков во время кормления

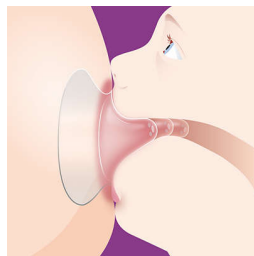


Накладки на соски созданы для комфортного кормления и подойдут для мам, которые испытывают раздражение, боль или воспаление сосков. Накладки помогут сократить вытягивание сосков во время кормления и кормить ребенка с максимально комфортными ощущениями.

Кормите в темпе, удобном малышу



Если поток грудного молока необходимо контролировать либо у ребенка не хватает сил, чтобы пить его, накладки для сосков также помогут вам решить возникшую проблему. Три отверстия на кончике накладки помогут стабилизировать поток в случае чрезмерного количества молока. Таким образом малыш сможет пить в удобном темпе даже в случае слишком большого количества молока у матери.

Доступно в двух размерах

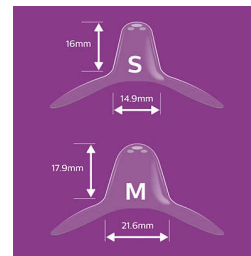

Накладки на соски доступны в двух размерах, чтобы вы могли подобрать их под размер своей груди. Маленькие накладки подойдут для сосков от 12 мм, а средние — до 21 мм. Для определения размера просто расположите одно из специальных колец поверх соска. Поверните накладку по часовой стрелке и направьте сосок в отверстие. Затем растяните основание накладки по ареоле. Если между соском и силиконовой накладкой есть зазор 2 мм, этот размер вам подходит. Совет: размеры основаны на размерах непосредственно соска, а не ареолы.

Легкая очистка



Перед каждым использованием накладки на соски нужно очищать; это занимает менее 10 минут. Поместите их в кипящую воду на 5 минут либо используйте гигиеничный футляр. Поместите хорошо промытые накладки в футляр и добавьте 25 мл воды. Затем поместите футляр в микроволновую печь мощностью 750–1000 Вт на три минуты. Дайте накладкам остыть в течение пяти минут. Затем вылейте воду; накладки готовы к использованию. Используйте удобный гигиеничный футляр в поездках, чтобы хранить накладки в чистоте.

Характеристики

Дизайн
Дизайн в форме бабочки

Consumer Trade Item
Height: 12.4
Width: 7.8
Length: 4.8
Net Weight: 0.023
Gross Weight: 0.027

GTIN: 8710103907787
Country of origin: GB
Harmonized system code: 39269097

Внешняя картонная тара
Height: 13.9
Width: 8.8
Length: 18.8

Net Weight: 0.138
Gross Weight: 0.202
GTIN: 18710103907784

Материал
Накладки на соски: Без бисфенола-А**, силикон

Что входит в комплект поставки
Накладки на соски 21 мм: 2 шт.
Гигиеничный футляр для переноски: 1 шт.



* при плоских или втянутых сосках, чрезмерной чувствительности и болевых ощущениях при кормлении, проблемах с захватом у детей

** Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011

*** Этот раздел содержит мнения пользователей о данном продукте. Компания Philips не несет ответственности за содержимое оставленных пользователями в этом разделе комментариев и содержащихся в них технических сведений и рекомендаций, а также не считает их официальной информацией Philips.

**** Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

***** RU № 2021/15810 от 22.11.2021