

PHILIPS

EnergyLight



HF3309



Voel u fit

als op een zomerdag

Speciale lichtapparatuur met intensiteitsdimmer, die u het nodige daglicht én de nodige energie geeft, ongeacht het seizoen, zonder dat uw dagelijkse routine wordt verstoord.

Voel u fit in slechts 30 minuten per dag

- Originele Philips EnergyLight-lampen

Digitale feedback over toegenomen energie

- Digitale timer en display

Comfortabele lamp

- Dimmer voor de lichtintensiteit

Eenvoudig instelbaar naar persoonlijke voorkeur


- Instelbare hoek

Veilig in gebruik

- Zonder UV-stralen

Kenmerken

Originele Philips EnergyLight-lampen

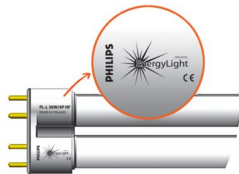

De EnergyLight is voorzien van originele Philips EnergyLight-lampen die zorgen voor licht met de intensiteit en kwaliteit van natuurlijk daglicht. Deze lampen bieden maximaal 10.000 lux, maar dan zonder onaangename schittering of verblinding. Als u de EnergyLight 30 minuten per dag gebruikt (u hoeft niet de hele tijd in de lamp te staren) met een licht intensiteit van 10.000 lux, dan merkt u al na 5 dagen een verbetering in uw energieniveau en stemming.

Digitale timer en display



De EnergyLight HF 3309 is voorzien van een digitale gebruikersinterface met een ingebouwd gebruikersprotocol voor eenvoudig

gebruik en biedt in tegenstelling tot andere apparaten direct feedback over de toegenomen energie.

Dimmer voor de lichtintensiteit



Ga winterdepressie tegen en krijg energie alsof het zomer is terwijl u het apparaat gebruikt op een aangenaam lichtniveau dat u nodig hebt wanneer u bijvoorbeeld wilt lezen. De EnergyLight is voorzien van een dimmer voor de lichtintensiteit zodat deze eenvoudig kan worden aangepast tussen 0 tot ongeveer 10.000 lux (bij 15 tot 20 cm) al naar gelang de gewenste intensiteit.

Instelbare hoek



Voor optimaal gebruiksgemak kan het apparaat in meerdere standen worden geplaatst.

Zonder UV-stralen

UV-free

De EnergyLight gebruikt het volledig natuurlijke daglichtspectrum. Daarnaast voldoet het apparaat aan Europese veiligheidseisen en heeft het een UV-filterscherm. De EnergyLight is daarom volledig veilig in gebruik.

Ondersteund door de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD)



Dit apparaat heeft bewezen gezondheidsvoordelen te hebben, zoals gecertificeerd door de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD).

Specificaties

Technische specificaties

Vermogen: 72 W

Voltage: 220/230

Frequentie: 50/60 Hz

Type lampen: 2PL-L 36-W Philips-EnergyLight

Levensduur van lampen: 10.000

Type ballast: HF-R 232PLT (hoge frequentie)

Ballastfrequentie: 42.000 kHz

Isolatie: Klasse II (dubbel geïsoleerd)

Snoerlengte: 3 m

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van het product: 33 x 57 x 18
(B x H x D) cm

Gewicht van het product: 3,5 kg

Afmetingen F-box (= A-box): 36 x 62,2 x 21,5
(B x H x D) cm

Gewicht F-box (= A-box): 4,4 kg

Aant. op Europallet: 30 (UK 39) stk

Logistieke gegevens

CTV-code: 884330901000

Land van herkomst: Duitsland

Veiligheid

Zonder UV-stralen: komen er geen UV-stralen door het filterscherm

Geen trillingen: om hoofdpijn te voorkomen die ontstaat bij een hoge frequentie

Cenelec-gecertificeerd

Eenvoudig te gebruiken

Gebruikersprotocol op product

Digitale gebruikersinterface: voor feedback over energie en tijd

Energiebalk: geeft de toegenomen energie aan

Digitale timer

Pauzefunctie

Aan/uit-schakelaar

Voel u fit in slechts 30 minuten per dag

Origineel Philips-EnergyLight: lampen: 10.000 lux bij 20 cm, 2500 lux bij 60 cm

Comfortabele lamp

Dimmer voor de lichtintensiteit

Eenvoudig instelbaar

Instelbare hoek: 20 graden

Compact formaat: 18 x 33 (D x B) cm

Tevredenheidsindicator

94% tevreden gebruikers

Beste koop: STIWA-award (2003) als opvolger van de HF 3305

Medische apparatuur

Bewezen gezondheidsvoordelen

