

# PHILIPS

## EnergyLight



HF3319



## Føl deg energisk

Øker energinivået ditt på samme måte som en solfylt dag

Philips Energy Light er en spesiell lysterapienhet som gir deg dagslyset og energien du trenger for å beholde sommerfølelsen hele året, på en måte som enkelt passer med den daglige rutinen din.

### Slå tilbake mot vinterens nedstemthet og øk energinivåene

- Bidrar til å lindre symptomene ved vinterdepresjon
- 10 000 lux lysintensitet
- Bruk det 30 minutter per dag

### Lampe som er komfortabel og enkel å bruke

- Indikator for behandlingstid
- Lysintensitetsdimmer
- Justerbar vinkel
- UV-fri

### Beviste fordeler

- 94 % er enige i at EnergyLight bekjemper vinterdepresjoner
- 91 % av brukerne er fornøyd med EnergyLight
- Klinisk bevist å bekjempe vinterdepresjon
- 100 år med Philips-ekspertise innen lysteknologi



asimpleswitch.com

# Høydepunkter

## Bekjemp vinterdepresjoner



I land med lange vintre opplever mange redusert energi og nedstemthet på grunn av lysmangel. Disse symptomene omtales gjerne som vinterdepresjoner. De begynner som oftest på høsten og kan vare i flere uker. Philips EnergyLight er en enkel og naturlig måte å redusere disse symptomene på og gir deg sommerens humør og energinivå tilbake.

## 10 000 lux lysintensitet



EnergyLight produserer et lys som har samme intensitet og kvalitet som naturlig dagslys. Faktisk kan det gi deg opptil 10 000 lux, men uten at du blir blendet.

## Brukes 30 minutter per dag



Hvis du bruker Philips EnergyLight på full intensitet i bare 30 minutter om dagen får du bedre humør og mer energi. Det er også helt trygt å bruke den lenger. Plasser EnergyLight i synsfeltet – du trenger ikke se direkte inn i

lyset. Regelmessig bruk hver morgen i vintermånedene bidrar til å lindre symptomene ved vinterdepresjon.

## Indikator for behandlingstid




EnergyLight har en LED-timer som indikerer hvor lenge produktet har blitt brukt.

## Lysintensitetsdimmer



Bekjemp vinterdepresjoner og få like mye energi som om sommeren, mens du bruker apparatet på et lysnivå som for eksempel tilsvarer leselys. EnergyLight har en lysintensitetsdimmer, slik at den enkelt kan justeres mellom null og ca. 10 000 lux (ved 15–20 cm), og som passer intensiteten du foretrekker.

## Justerbar vinkel

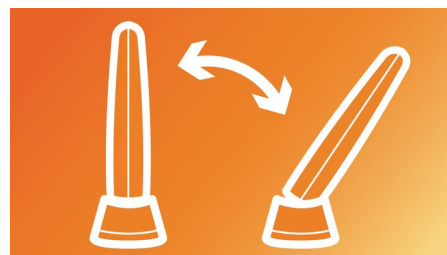

Apparatet kan plasseres i ulike vinkler for komfortabel bruk.

## UV-fri



EnergyLight bruker hele spekteret av naturlig dagslys. Den oppfyller europeiske sikkerhetsstandarder og har et UV-filter. EnergyLight er derfor trygg å bruke.

## Brukere sier den virker

94 % av brukerne er enige i at EnergyLight fra Philips bekjemper vinterdepresjoner. Testet i USA, Canada, Storbritannia og Nederland (MetrixLab) på 286 forbrukere.

## Høy tilfredshet blant brukere

91 % av brukerne er fornøyd med Philips EnergyLight-produktet. Testet i USA, Canada, Storbritannia og Nederland (MetrixLab) på 286 forbrukere.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO<sub>2</sub>-utslipp. Hvordan? De tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet, emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering og kassering og livstidspålitelighet.

# Spesifikasjoner

## Velvære med lys

Bekjemp vinterdepresjoner  
Få mer energi  
Bli mer våken

## Komfortabelt lys

Naturlig hvitt lys  
Lysintensitet: 10 000 lux  
Lysintensitetsdimmer  
Jevn skjermlyuminans  
Lampe som kan byttes

## Lett å bruke

Av/på-knapp  
Indikator for behandlingstid  
Justerbar vinkel: 20 grader

## Enkel å plassere

Justerbar vinkel: 20 grader

## Medisinsk utstyr

EU-direktivet om medisinsk utstyr (MDD):  
2007/47/EF, MDD 93/42/EØS

## Sikkerhet og forskrifter

CE 0344-sertifisert  
Samsvarer med IEC 60601-1 Ed. 3  
Ikke for almenbelysning  
UV-fri: Ingen stråling av UV eller nesten-UV

## Tekniske spesifikasjoner

Driftsfrekvens for ballast: 45 kHz...125 kHz  
Drift: 75 W  
Frekvens: 50 Hz

Isolasjon: Klasse II (dobbel isolasjon)

Type lamper: 2 PL-L 36 W Philips EnergyLight  
Spenning: 230 V  
Levetid for lamper: 1700 timer (10 000 lux)  
Ledningslengde: 200 cm

## Mål og vekt

Vekt på F-boks (=A-boks): 4,4 kg  
Mål for esken (B x H D): 36 x 62,2 x 21,5 cm  
Vekt for esken: 4,4 kg

## Logistiske data

Opprinnelsesland: Tyskland  
CTV-kode: 884331901

