

PHILIPS

EnergyLight



HF3309



Få ny energi som på en solig dag

Särskild ljusapparat med intensitetsdimmer som ger dig det dagsljus och den energi som du behöver, oavsett årstid, på ett sådant sätt att du lätt kan göra användningen till en del av dina dagliga rutiner.

Få ny energi på 30 minuter om dagen

- Philips EnergyLight-originallampor

Digital information om ökad energi

- Digital timer och teckenfönster

Behagligt ljus

- Dimmer för ljusintensitet

Enkel att placera efter dina önskemål


- Justerbar vinkel

Säker användning

- UV-fri

Funktioner

Philips EnergyLight-originnlampor

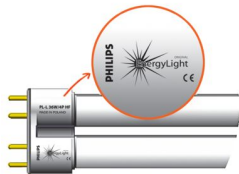

EnergyLight har Philips EnergyLight-originnlampor som producerar ljus med samma intensitet och kvalitet som dagsljus. Den kan faktiskt ge upp till 10 000 lux, men utan att du blir bländad. Om du använder EnergyLight i bara 30 minuter om dagen (du behöver inte titta in i lampan hela tiden) med en ljusintensitet på 10 000 lux kommer du att märka att du får mer energi och blir på bättre humör efter bara fem dagars användning.

Digital timer och teckenfönster



EnergyLight HF 3309 har ett digitalt användargränssnitt med ett lättanvänt inbyggt användarprotokoll som bl.a. ger direkt information om hur mycket energi du har fått.

Dimmer för ljusintensitet



Använd apparaten vid en bekväm ljusnivå (som du tex. använder när du läser) och få samma energi som du får på sommaren. EnergyLight

HF har en dimmer för ljusintensitet så att du enkelt kan justera den mellan 0 och cirka 10 000 lux (vid 15–20 cm) så att den passar dina önskemål.

Justerbar vinkel



Apparaten kan placeras i olika vinklar utifrån behov.

UV-fri



I EnergyLight används hela dagsljusspektrumet. Den uppfyller europeiska säkerhetsstandarder och har en skärm med UV-filtrer. EnergyLight är därför helt säker att använda.

Uppfyller direktivet för medicinska enheter (MDD)



Den här enheten har dokumenterade hälsofördelar, och är certifierad enligt direktivet för medicinska enheter (MDD).

Specifikationer

Tekniska specifikationer

Effekt: 72 W

Spänning: 220/230

Frekvens: 50/60 Hz

Typ av lampor: 2 PL-L 36 W Philips

EnergyLight

Livslängd för lampor: 10 000

Typ av ballast: HF-R 232PLT (hög frekvens)

Ballastfrekvens: 42 000 kHz

Isolering: Klass II (dubbel isolering)

Sladdlängd: 3 m

Vikt och mått

Produktstorlek: 33 x 57 x 18 (B x H x D) cm

Produktvikt: 3,5 kg

F-låda, mått (= A-låda): 36 x 62,2 x 21,5 (B x H

x D) cm

F-låda, vikt (= A-låda): 4,4 kg

Kvantitet på europall: 30 (Storbrit. 39) delar

Logistisk information

CTV-kod: 884330901000

Ursprungsland: Tyskland

Säkerhet

UV-fri: ingen UV-strålning kommer genom filtreringsskärmen

Inget flimmer: tack vare ballast med hög frekvens för att undvika huvudvärk

Cenelec-certifierad

Lättanvänd

Användarprotokoll på produkten

Digitalt användargränssnitt: för information om energi och tid

Energimätare: , anger hur mycket energi du får

Digital timer

Pausfunktion

På/av-knapp

Få ny energi på 30 minuter om dagen

Philips EnergyLight, original: lampor: 10 000 lux vid 20 cm, 2 500 lux vid 60 cm

Behagligt ljus

Dimmer för ljusintensitet

Enkel att placera

Justerbar vinkel: 20 grader

Kompakt format: 18 x 33 (D x B) cm

Nöjdhetsindikator

94 % nöjda användare

Bästa köp: utmärkelse från STIWA (2003) som efterträdare till HF 3305

Medicinsk utrustning

Dokumenterade hälsofördelar

