

# PHILIPS

## EnergyLight



HF3308



## Faites le plein d'énergie

comme lors d'une journée ensoleillée

Appareil d'éclairage spécial qui vous offre la lumière naturelle et l'énergie dont vous avez besoin, quelle que soit la saison, à tout moment de la journée.

### **Le plein d'énergie en seulement 30 minutes environ par jour**

- Lampes Philips EnergyLight

### **Positionnement simple selon vos préférences**

- Angle réglable

### **Utilisation sûre**

- Sans UV


### **Effets bénéfiques sur le bien-être reconnus**

- Conforme à la directive relative aux dispositifs médicaux



# Points forts

## Lampes Philips EnergyLight

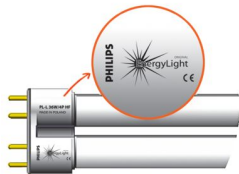

L'EnergyLight est dotée de lampes Philips EnergyLight, qui produisent de la lumière avec une intensité et une qualité quasi identiques à la lumière diurne naturelle. En fait, elle vous offre jusqu'à 10 000 lux, sans aucun scintillement ni reflet désagréable. Si vous utilisez l'EnergyLight pendant 30 minutes par jour (il est inutile de fixer la lampe pendant toute la séance) à une intensité lumineuse de 10 000 lux, vous pourrez vous sentir revitalisé après seulement 5 jours d'utilisation.

## Angle réglable



L'appareil peut être orienté à votre guise pour plus de confort.

## Sans UV



L'EnergyLight utilise tout le spectre de lumière diurne naturelle. Elle répond aux normes de sécurité européennes et possède un filtre UV, ce qui rend son utilisation totalement fiable.

## Conforme à la directive relative aux dispositifs médicaux



Les effets positifs sur le bien-être de ce dispositif ont été certifiés conformément à la directive relative aux dispositifs médicaux.

# Caractéristiques

## Spécificités techniques

Puissance: 72 W

Tension: 220/230

Fréquence: 50/60 Hz

Type de lampes: Philips EnergyLight 2 PL-L 36 W

Durée de vie des lampes: 10,000

Type de ballast: HF-K 236TLD (haute fréquence)

Fréquence de fonctionnement du ballast: 42,000 kHz

Isolation: Classe II (double isolation)

Longueur du cordon: 3 m

## Poids et dimensions

Dimensions du produit: 33 x 57 x 18 (L x H x P) cm

Poids du produit: 3,5 kg

Dimensions de l'unité de vente (= unité d'emballage): 36 x 62,2 x 21,5 (L x H x P) cm

Poids de l'unité de vente (= unité d'emballage): 4,4 kg

Qté sur europalette: 30 (R.-U. : 39) Pièce(s)

## Informations logistiques

Code CTV: 884330801000

Pays d'origine: Allemagne

## Sécurité

**Sans UV:** quasiment aucun rayonnement UV ne s'échappe du filtre

**Scintillement limité:** grâce au ballast haute fréquence permettant de limiter les maux de tête

Certification Cenelec

## Facile à utiliser

**Protocole utilisateur sur le produit:** Indique le temps d'utilisation en fonction de la distance

**Bouton marche/arrêt**

## Le plein d'énergie, en 30 petites minutes par jour

Philips EnergyLight: lampes : 10 000 lux à 20 cm, 2 500 lux à 60 cm

## Positionnement simple

Angle réglable: 20 degrés

Taille compacte: 18 x 33 (P x l) cm

## Indicateur de satisfaction

94 % d'utilisateurs satisfaits

## Conforme à la directive européenne sur les appareils médicaux

Effets bénéfiques sur le bien-être reconnus

