



Philips
EnergyLight



HF3309

Ole yhtä energinen

kuin aurinkoisena päivänä

Valoterapialaite, joka antaa sinulle tarvitsemaasi päivänvaloa ja energiaa, ja jota voit käyttää juuri silloin kuin sinulle sopii.

Ammenna energiaa 30 minuuttia päivässä

- Original Philips EnergyLight -lamput

Digitaalinen näyttö ilmaisee energiatason

- Digitaalinen ajastin ja näyttö

Miellyttävä valo

- Valotehon himmennin

Helppo sijoittaa sopivalle etäisyydelle

- Säädetty kallistuskulma

Turvallinen


- Ei UV-säteilyä

PHILIPS

sense and simplicity

Kohokohdat

Original Philips EnergyLight -lamput

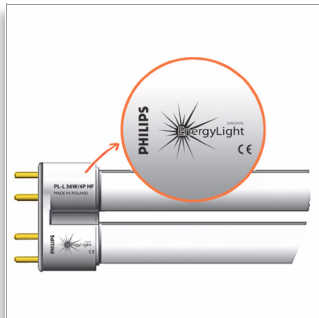

EnergyLight-valoterapialaitteessa on Philips EnergyLight -lamput, jotka tuottavat luonnollista päivänvaloa tehokkaasti ja laadukkaasti. Enimmäisteholtaan 10 000 luksin lamput eivät häikäise tai heijasta. Jo 30 minuutin päivittäinen EnergyLight-laitteen käyttö (lamppua ei tarvitse katsoa koko ajan) 10 000 luksin teholla nostaa energiatasoasi ja piristää mieltäsi jo viidessä päivässä.

Digitaalinen ajastin ja näyttö



EnergyLight HF 3309 -kirkasvalolampussa on digitaalinen käyttöliittymä ja käyttöä helpottavat kiinteät pikakäyttöohjeet, joiden avulla näet, kuinka paljon energiaa saat hoitokerran aikana.

Valotehon himmennin



Tämän laitteen avulla saat yhtä paljon energiaa kuin kesällä, ja voit käyttää sitä miellyttävällä etäisyydellä

vaikka lukuvalona. EnergyLight-valoterapialaitteessa on himmennin, josta valotehoa voi säätää nolasta 10 000 luksiin (20 cm:n etäisyydellä) tarpeesi mukaan.

Säädettävä kallistuskulma



Laite voidaan säätää useisiin eri asentoihin.

Ei UV-säteilyä

EnergyLightissa käytetään luonnonvalon koko aallonpituutta. Laite on eurooppalaisten turvallisuusstandardien mukainen ja siinä on UV-suodatinlevy. Tämän vuoksi EnergyLight on täysin turvallinen.

EU:n lääketieteellisiä laitteita koskevan direktiivin mukainen



todistetusti terveysvaikutteinen ja Euroopan unionin lääketieteellisiä laitteita koskevan direktiivin (MDD) mukaisesti sertifioitu laite

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

- Virta: 72 W
- Jännite: 220/230
- Taajuus: 50/60 Hz
- Lamppujen tyyppi: 2PL-L 36 W Philips EnergyLight
- Lamppujen käyttöikä: 10,000
- Liitäntälaitteen tyyppi: HF-R 232PLT (korkeataajuuksinen)
- Liitäntälaitteen käyttötaajuus: 42,000 kHz
- Lämmöneristys: II-luokka (kaksoiseristetty)
- Johdon pituus: 3 m

Paino ja mitat

- Tuotteen mitat: 33 x 57 x 18 (LxKxS) cm
- Tuotteen paino: 3,5 kg
- Tuotepakkauksen mitat (=tukkupakkaus): 36 x 62,2 x 21,5 (LxKxS) cm
- Tuotepakkauksen paino (=tukkupakkaus): 4,4 kg
- Euro-lavan kpl-määrä: 30 (UK 39) kpl

Logistiset tiedot

- CTV-koodi: 884330901000
- Alkuperämaa: Saksa

Turvallisuus

- Ei UV-säteilyä: UV-säteitä läpäisemätön UV-suodatinlevy
- Ei välky: korkea taajuus estää päänsäryn
- Cenelec-sertifioitu

Helppokäyttöinen

- Pikakäyttöohjeet laitteessa
- Digitaalinen näyttö: näyttää energiatason ja hoitoajan
- Energiatason ilmaisin: näyttää energiatason hoitokerran aikana
- Digitaalinen ajastin
- Taukotoiminto
- Virtapainike

Ammenna energiaa 30 minuuttia päivässä

- Original Philips EnergyLight: lamput: 10,00 luksia/ 20 cm, 2500/60

Miellyttävä valo

- Valotehon himmennin

Helppo sijoittaa

- Säädettävä kallistuskulma: 20 astetta
- Pienikokoinen: 18 x 33 (SxL) cm

Tyytyväisyysilmaisin

- 94 % asiakkaista tyytyväisiä
- Best Buy: STIIVA (2003) -palkittu HF 3305 -kirkasvalolampun seuraaja

Terveystuotelaite

- Todistetusti terveysvaikutteinen



Julkaisupäivä 2009-07-28

Versio: 3.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com