

# PHILIPS

## EnergyLight



HF3319/01



## Voel u fit

### Geeft u meer energie, zoals op een zonnige dag

De EnergyLight van Philips is een speciale lichttherapielamp die u het hele jaar door een zomer gevoel geeft en die u eenvoudig in uw dagelijkse routine inpast.

#### **Zeg nee tegen de winterblues en verhoog uw energieniveau**

- Helpt de symptomen van winterblues te bestrijden
- Lichtintensiteit van 10.000 lux
- Gebruik de EnergyLight 30 minuten per dag

#### **Eenvoudig en comfortabel in het gebruik**

- Behandeltijdindicator
- Dimmer voor de lichtintensiteit
- Instelbare hoek
- Zonder UV-stralen

#### **Bewezen voordelen**

- 94% is van mening dat de EnergyLight winterblues bestrijdt
- 91% van de gebruikers is tevreden met de EnergyLight
- Klinisch aangetoond dat winterblues worden bestreden
- 100 jaar aan Philips-expertise in verlichtingstechnologie



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Kenmerken

## Biedt weerstand tegen de winterblues




In landen waar de winters lang zijn en maar weinig daglicht is, hebben veel mensen last van een verlaagd energieniveau. Dit wordt ook wel de winterblues genoemd. De winterblues beginnen meestal in de herfst en kunnen enkele weken duren. Met de EnergyLight van Philips kunt u de klachten eenvoudig verlichten, zodat u zich weer net zo energiek voelt als in de zomer.

## Lichtintensiteit van 10.000 lux



De EnergyLight produceert een soort licht met de intensiteit en kwaliteit van natuurlijk daglicht. De EnergyLight kan zelfs een lichtintensiteit tot 10.000 lux geven zonder dat het licht fel is en zonder schittering.

## 30 min per dag gebruiken

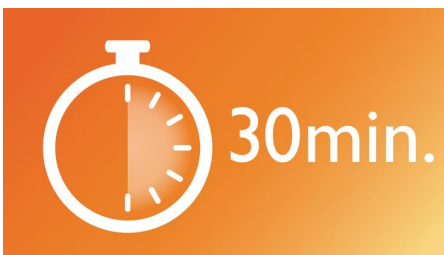

Als u de Philips EnergyLight 30 minuten per dag gebruikt met de volle lichtintensiteit verbeteren uw stemming en energieniveau op natuurlijke wijze. Langer gebruik is absoluut veilig. Plaats de EnergyLight in uw blikveld - u hoeft niet direct in het licht te kijken.

Regelmatig gebruik, iedere morgen tijdens wintermaanden, zal helpen de symptomen van de winterblues te verlichten.

## Behandeltijdindicator




De EnergyLight heeft een LED-timer die aangeeft hoe lang het product ingeschakeld is geweest.

## Dimmer voor de lichtintensiteit



Ga winterdepressie tegen en krijg energie alsof het zomer is terwijl u het apparaat gebruikt op een aangenaam lichtniveau dat u nodig hebt wanneer u bijvoorbeeld wilt lezen. De EnergyLight is voorzien van een dimmer voor de lichtintensiteit zodat deze eenvoudig kan worden aangepast tussen 0 tot ongeveer 10.000 lux (bij 15 tot 20 cm) al naar gelang de gewenste intensiteit.

## Instelbare hoek

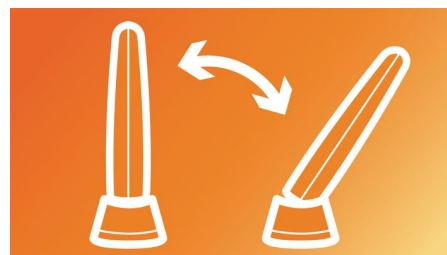

Voor optimaal gebruiksgemak kan het apparaat in meerdere standen worden geplaatst.

## Zonder UV-stralen



De EnergyLight gebruikt het volledig natuurlijke daglichtspectrum. Daarnaast voldoet het apparaat aan Europese veiligheidseisen en heeft het een UV-filterscherm. De EnergyLight is daarom volledig veilig in gebruik.

## Gebruikers tonen aan dat het werkt

94% van de gebruikers is van mening dat de Philips EnergyLight winterblues met succes bestrijdt. Getest in de VS, CA, VK, NL (metrix lab) onder 286 consumenten.

## Hoge tevredenheid van gebruikers

91% van de gebruikers is tevreden met de Philips EnergyLight. Getest in de VS, CA, VK, NL (metrix lab) onder 286 consumenten.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO<sub>2</sub>-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

# Specificaties

## Welzijn door licht

Biedt weerstand tegen de winterblues  
Verhoogt het energieniveau  
Verhoogt uw alertheid

## Comfortabele lamp

Natuurlijk wit licht  
Lichtintensiteit: 10.000 lux  
Dimmer voor de lichtintensiteit  
Gelijkmatige schermhelderheid  
Vervangbare lamp

## Gebruiksvriendelijk

Aan/uit-schakelaar  
Behandeltijdindicator  
Instelbare hoek: 20 graden

## Eenvoudig instelbaar

Instelbare hoek: 20 graden

## Medische apparatuur

Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD):  
2007/47/EG, MDD 93/42/EG

## Veiligheid en voorschriften

CE 0344-gecertificeerd  
Voldoet aan IEC 60601-1 Ed. 3  
Niet voor algemene verlichting  
Zonder UV-stralen: Geen UV- of bijna-UV-  
straling

## Technische specificaties

Ballastfrequentie: 45 kHz ... 125 kHz  
Vermogen: 75 W  
Frequentie: 50 Hz

Isolatie: Klasse II (dubbel geïsoleerd)

Type lampen: 2PL-L Philips EnergyLight van  
36W

Voltage: 230 V

Levensduur van lampen: 1700 uur (10.000 lux)

Snoerlengte: 200 cm

## Gewicht en afmetingen

Gewicht F-box (= A-box): 4,4 kg

Afmetingen doos (l x h x d): 36 x 62,2 x 21,5  
cm

Gewicht doos: 4,4 kg

## Logistieke gegevens

Land van herkomst: Duitsland

CTV-code: 884331901

