

# PHILIPS

## sonicare

Elektrische  
Schallzahnbürste

ProtectiveClean  
4300

Integrierter Drucksensor

1 Putzprogramm

BrushSync Funktion



HX6800/28



## Saubere Zähne. Ganz sanft.

Entfernt bis zu 7x mehr Plaque als eine Handzahnbürste

Spüren Sie den Unterschied einer sanften Reinigung mit unserem Drucksensor, während Sie bis zu 7x mehr Plaque entfernen als mit einer Handzahnbürste

### Für eine gute Mundgesundheit

- Weißere Zähne in nur einer Woche
- Sicher und sanft bei empfindlichen Bereichen, Zahnspangen und Zahnersatz

### Innovative Technologie

- Informiert Sie, wenn Sie zu viel Druck ausüben
- Verbindet das intelligente Handstück mit den intelligenten Bürstenköpfen
- Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie

### Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- So wissen Sie immer, wann Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten
- Easy-Start-Programm entwickelt Ihre Philips Sonicare-Routine
- Förderung einer gründlichen Reinigung

# Besonderheiten

## Natürlich weiße Zähne



Stecken Sie den W2 Optimal White Bürstenkopf auf, um oberflächliche Verfärbungen zu entfernen und ein strahlend weißes Lächeln zu erhalten. Mit seinen dicht platzierten, zentralen Borsten zur Entfernung von Verfärbungen macht dieser Bürstenkopf Ihre Zähne klinisch erwiesen in nur einer Woche weißer.

## Sicher und sanft



Eine sichere Zahnreinigung: Unsere Schalltechnologie ist geeignet für den Gebrauch mit Zahnsparren, Füllungen, Kronen und Veneer und hilft dabei, Karies zu vermeiden und die Gesundheit Ihres Zahnfleisches zu verbessern.

## Philips Sonicare-Technologie




Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

## BrushSync Erinnerungsfunktion



Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab. Aber unsere BrushSync Technologie merkt sich, wie lange Sie Ihren Bürstenkopf bereits verwenden und wie intensiv Sie putzen. Wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf zu ersetzen, machen eine Leuchte auf dem Handstück und ein kurzer Signalton Sie darauf aufmerksam. So können Sie sicher sein, dass Ihr Bürstenkopf immer hervorragende Arbeit leistet.

## Überwachen Sie Ihren Putzdruck

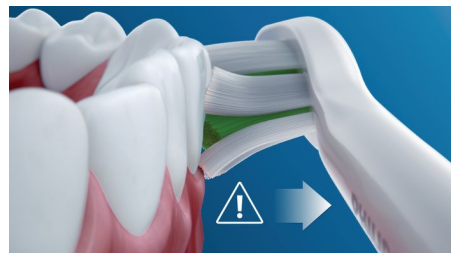

Zu hartes Zähneputzen kann Zähne und Zahnfleisch schädigen. Um dies zu vermeiden, gibt Ihre Philips Sonicare ProtectiveClean ein sanftes, pulsierendes Geräusch aus, das Sie daran erinnert, den Druck zu reduzieren.

## BrushSync Technologie



Eine mikrochipgesteuerte Technologie erkennt und synchronisiert den intelligenten Bürstenkopf mit dem intelligenten Handstück. Das intelligente Handstück und der intelligente

Bürstenkopf sind eine leistungsstarke Kombination. So sind intelligente Erinnerungsfunktionen möglich.

## Starten Sie einfach Ihre neue Routine



Etwas Neues zu beginnen, kann etwas gewöhnungsbedürftig sein. Unser Easy-Start-Programm bietet Ihnen die Möglichkeit einer schrittweisen, sanften Erhöhung der Putzleistung für die ersten 14 Anwendungen Ihrer neuen Zahnbürste.

## Hilfreiche Timer



Sie möchten eine elektrische Zahnbürste mit Timer? Unser 4-Quadranten-Timer teilt Ihnen mit, wenn Sie ausreichend Zeit mit der Reinigung jeder Mundpartie verbracht haben, während unser 2-Minuten-Timer anzeigt, wann Sie die empfohlenen zwei Minuten erreicht haben.

# Daten

## Programme

**Clean:** Für ausgezeichnete tägliche Reinigung  
**2 Intensitätsstufen:** Niedrig, Hoch

## Artikel enthalten

**Handstück:** 1 ProtectiveClean  
**Bürstenköpfe:** 1 W2 Optimal White  
**Ladegerät:** 1

## Design und Materialausführung

**Farbe:** Klavierlack-Schwarz

## Reinigungsleistung

**Geschwindigkeit:** Bis zu 62.000  
Bürstenkopfbewegungen/Min.  
**Leistung:** Entfernt bis zu 7 x mehr Plaque\*  
**Vorteile für die Gesundheit:** Verringert  
Kariesbildung  
**Druck-Feedback:** Vibrierendes Handstück zur

Warnung des Benutzers

**Timer:** 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

## Intelligente Sensor-Technologie

**Drucksensor:** Warnmeldungen bei zu starkem Druck

**BrushSync Erinnerungsfunktion:** So wissen Sie immer, wann, Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

## Benutzerfreundlichkeit

**Handstück-Kompatibilität:** Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe  
**Akkuanzeige:** Anzeige zeigt Akkustatus an  
**Handstück:** Schlankes, ergonomisches Design  
**Reinigungsdauer:** Bis zu 2 Wochen

## Technische Daten

**Batterie:** Wiederaufladbar  
**Batterietyp:** Lithium-Ionen  
**Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):** Bis zu 2 Wochen

## Power

**Spannung:** 110 bis 220 V

## Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre eingeschränkte Garantie

