

PHILIPS

sonicare

Sonična električna
zobna ščetka z aplikacijo

DiamondClean Smart

Prilagojeno svetovanje

Senzorji pametne glave ščetke

Pametno prepoznavanje glave
ščetke

5 načinov, 3 intenzivnosti



HX9924/47



Naša najboljša zobna ščetka za celovito ustno nego

Bodite samozavestni s popolno ustno nego

DiamondClean Smart je naša najboljša zobna ščetka, ki poskrbi za popolno ustno nego. S štirimi visokozmogljivimi glavami ščetke se lahko osredotočite na vse predele ustne votline, naša tehnologija pametnega senzorja pa vam prinaša prilagojene povratne informacije in nasvete.

Dokazano izboljšuje zdravje ust

- Za globinsko čiščenje odstrani do 10-krat več zobnih oblog*
- Do 7-krat bolj zdrave dlesni* v samo 2 tednih
- Odstranite do 100 % več madežev** v samo 3 dneh
- Uživate v dolgotrajnem svežem dahu

Prilagojeni nasveti v aplikaciji za popolne rezultate ščetkanja

- Vodi vas pri ščetkanju in označuje izpuščene predele
- Začnite bolj skrbeti za težavna področja
- Opozori vas, če pri ščetkanju pritiskate premočno
- Poskrbi za zmanjšanje drgnjenja
- Usmeri vas na zgrešena mesta za popolno ustno nego

Izboljšajte ščetkanje


- Glave ščetke samodejno izberejo optimalne nastavitve
- Poskrbite, da čim bolj izkoristite glavo ščetke
- Izbirajte med 5 načini in 3 nastavitvami intenzivnosti



asimpleswitch.com


Značilnosti

Poslovite se od zobnih oblog

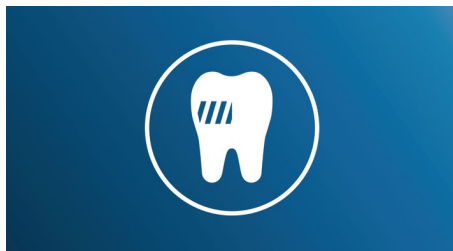


Pritrdite glavo ščetke Premium Plaque Control C3 in doživite najgloblje čiščenje. Zahvaljujoč mehkim in prilagodljivim stranicam se ščetine prilagodijo obliki površin zob in zagotavljajo 4-krat boljši stik s površino**, poleg tega pa odstranijo do 10-krat več zobnih oblog na težko dostopnih mestih*.

Nega vaših dlesni

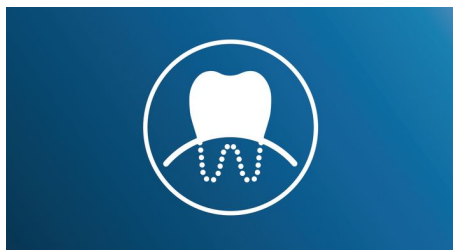

Pritrdite glavo ščetke Premium Gum Care G3 in izboljšajte zdravje dlesni. Manjša velikost in usmerjene ščetine za rob dlesni omogočajo nežno, a učinkovito čiščenje ob dlesni, kjer se lahko začne bolezen dlesni. Klinično je dokazano, da glava ščetke zagotavlja do 100 % manj vnetij dlesni* in do 7-krat bolj zdrave dlesni v samo dveh tednih.*

Hitreje do bolj belih zob

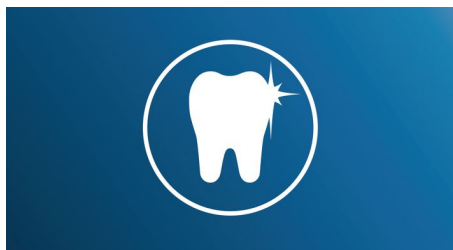


Pritrdite glavo ščetke Premium White W3, da odstranite površinske madeže in dosežete najbolj bel nasmech. Klinično je dokazano, da goste osrednje ščetine za odstranjevanje madežev odstranijo do 100 % več madežev v samo treh dneh.**

Strgalo za jezik TongueCare+




Pritrdite strgalo za jezik TongueCare+ in nežno odstranite bakterije, ki povzročajo slab zadah, iz por vašega jezika. Strgalo ima 240 posebno zasnovanih mikro ščetin, ki čistijo med izboklinami in vboklinami jezika ter odstranjujejo bakterije in ostanke hrane, ki povzročajo slab zadah. Strgalo uporabite v kombinaciji z našim antibakterijskim razpršilom BreathRx za vrhunsko čiščenje in izrazito svež dah.

Pomembna področja in nastavev cilja

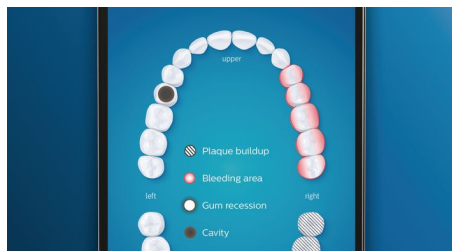

Vas je zobozdravnik opozoril na težavne predele? Označili jih bomo v 3D-prikazu ust v vaši aplikaciji in vas opomnili, da morate tem predelom posvetiti več pozornosti.

Ne zgrešite niti enega kotička

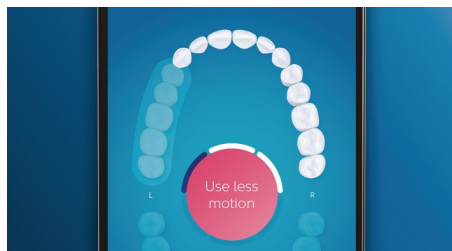


Z aplikacijo Philips Sonicare točno veste, kdaj dosežete temeljito čiščenje, in pridobite nasvete, kako se izpopolniti in postati bolj pozorni pri ščetkanju.

Nič lažjega kot to



Ob uporabi električne zobne ščetke vse delo opravi ščetka. V ročaj smo vgradili senzor drgnjenja, ki vas nežno opomni, da morate manj drgniti. Tako lahko izboljšate tehniko in dosežete nežnejše in učinkovitejše čiščenje.

Združevalni način BrushSync

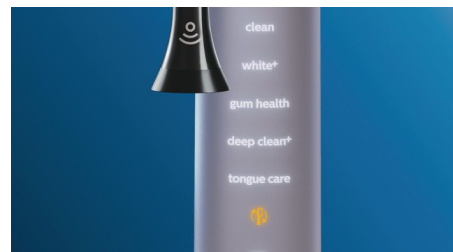

Se sprašujete, kateri način in intenzivnost sta praviša za vas? Odgovor je na dlani. Mikročip v glavi ščetke zobni ščetki DiamondClean Smart pove, katero nastavev uporabljate. Če torej pritrdite glavo ščetke za nego dlesni, vaša zobna ščetka izbere optimalni način in intenzivnost, da zagotovi nežno in učinkovito nego vaših dlesni. Pritisniti morate samo gumb za vklop.



asimpleswitch.com

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih Philipsovega prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost življenjske dobe.

Specifikacije

Načini

Clean: Za izjemno vsakdanjo čistočo

White+: Za odstranjevanje površinskih madežev

Deep Clean+: Za poživiljajoče globoko čiščenje

Zdrave dlesni: Posebno posvečanje pozornosti kočnikom

TongueCare+: Za dolgotrajen svež dah

3 intenzivnosti: Visoka, Nizka, Srednja

Priloženi predmeti

Ročaj: 1 zobna ščetka DiamondClean Smart

Glave ščetke: 1 glava ščetke C3 Premium

Plaque Control, 1 glava ščetke G3 Premium

Gum Care, 1 glava ščetke W3 Premium White, 1 strgalo za jezik TongueCare+

Polnilni kozarec: 1

Potovalna torbica: Potovalna polnilna torbica USB

Združevalni način BrushSync

Glava ščetke C3 Premium Plaque Control:

Združi se z načinom Clean

Glava ščetke G3 Premium Gum Care: Združi se z načinom Gum Health

Glava ščetke W3 Premium White: Združi se z načinom White+

Strgalo za jezik TongueCare+: Združi se z načinom TongueCare

Povezljivost

Brezžična tehnologija Bluetooth®: Aplikacija, ki se poveže z zobno ščetko

Združljivost

Podpora za Android: Telefoni Android, Tablični

računalniki s povezavo Bluetooth 4.0

Podpora za iOS: iPad 3. generacije ali novejši, iPhone 4S ali novejši, z iOS7 ali novejši

Zasnova in izdelava

Barva: Srebrn

Učinkovitost čiščenja

Hitrost: Do 62000 potez ščetke na minuto

Zmogljivost: Odstrani do 10-krat več zobnih oblog*

Pozitivni vplivi na zdravje: Do 7-krat bolj zdrave dlesni****

Prispeva k bolj belim zobem: Do 100 % manj madežev*****

Povratna informacija glede pritiskanja med čiščenjem: Obroč zasveti vijolično, Z vibriranjem ročaja opozarja uporabnika

TouchUp: Zagotavlja popolno ustno nego

Časovnik: BrushPacer in SmarTimer

Tehnologija pametnega senzorja

Senzor pritiska: Opozori, ko je ščetkanje premočno

Senzor lokacije: Beleži in izboljšuje ustno

nego

Senzor drgnjenja: Poskrbi za zmanjšanje drgnjenja

3D-prikaz ust: Označi težavne predele

TouchUp: Za čiščenje zgrešenih mest

Enostavna uporaba

Združljivost ročaja: Enostavno pritrdljive glave ščetke

Prepoznavanje glave ščetke: Sinhronizira se z optimalnim načinom

Opomnik za zamenjavo: Za stalno zagotavljanje najboljših rezultatov, opozorilna ikona zasveti

Indikator baterije: Osvetljena ikona prikazuje stanje baterije

Ročaj: Tanka ergonomska zasnova

Zaslon: Osvetljen zaslon

Tehnične specifikacije

Baterija: Za polnjenje

Vrsta baterije: Litij-ionska

Čas delovanja (od polne do prazne): 14 dni*****

Napajanje

Napetost: 110–220 V

Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija



* kot običajna zobna ščetka

* * v primerjavi z ročno zobno ščetko ob uporabi vodilne zobne paste za beljenje zob

* * v primerjavi s ščetko DiamondClean

* * * v načinu Gum Health v primerjavi z ročno zobno ščetko v obdobju 2 tednov

* * * * po 3 dneh uporabe v načinu White+ v primerjavi z ročno zobno ščetko

* * * * pri dveh dvominutnih ščetkanjih dnevno v standardnem načinu