



Philips
EnergyLight



HF3309

Føl deg energisk

som på en solskinsdag

Den spesielle lysenheten med intensitetsdimmer gir deg dagslyset og energien du trenger, uansett årstid, på en måte som lett passer inn i din daglige rutine.

Føl deg energisk med bare 30 minutter om dagen

- Originale Philips EnergyLight-lamper

Digital tilbakemelding på økt energi

- Digital timer og display

Komfortabelt lys

- Lysintensitetsdimmer

Enkel å plassere slik du vil ha det

- Justerbar vinkel

Sikker å bruke


- UV-fri

PHILIPS

sense **and** simplicity

Høydepunkter

Originale Philips EnergyLight-lamper

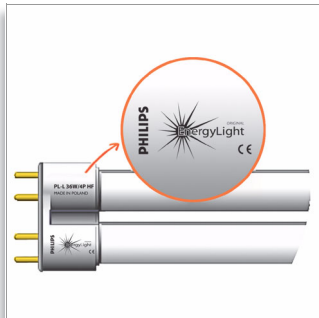

EnergyLight bruker originale Philips EnergyLight-lamper som gir lys med samme intensitet og kvalitet som naturlig dagslys. De kan faktisk gi deg opptil 10 000 lux, men uten ubehagelig blendende eller skarpt lys. Hvis du bruker EnergyLight i bare 30 minutter om dagen (du trenger ikke stirre mot lampen hele tiden) med en lysintensitet på 10 000 lux, vil du merke en forbedring i energinivået og humøret etter bare 5 dager.

Digital timer og display



EnergyLight HF 3309 har et digitalt brukergrensesnitt med innebygd brukerprotokoll for enkel bruk. Den gir blant annet direkte tilbakemelding om hvor mye energi som oppnås.

Lysintensitetsdimmer



Få like mye energi som om sommeren, mens du bruker apparatet på et lysnivå som for eksempel

tilsvarer leselys. EnergyLight har en lysintensitetsdimmer, slik at den enkelt kan justeres mellom null og ca. 10 000 lux (ved 20 cm), og som passer intensiteten du foretrekker.

Justerbar vinkel



Apparatet kan plasseres i forskjellige vinkler, ettersom hva som passer.

UV-fri

EnergyLight bruker hele spekteret av naturlig dagslys. Den oppfyller europeiske sikkerhetsstandarter og har et UV-filter. EnergyLight er derfor helt trygt å bruke.

Støttes av EU-direktivet om medisinsk utstyr (MDD)



Denne enheten har påviste helsefordeler, slik det omtales i EU-direktivet om medisinsk utstyr (MDD).

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

- Strøm: 72 W
- Spenning: 220/230
- Frekvens: 50/60 Hz
- Type lamper: 2 PL-L 36 W Philips EnergyLight
- Levetid for lamper: 10 000
- Type ballast: HF-R 232PLT (Høy frekvens)
- Driftsfrekvens for ballast: 42 000 kHz
- Isolasjon: Klasse II (dobbel isolasjon)
- Ledningslengde: 3 m

Mål og vekt

- Produktmål: 33 x 57 x 18 (B x H x D) cm
- Produktvekt: 3,5 kg
- Mål på F-boks (=A-boks): 36 x 62,2 x 21,5 (B x H x D) cm
- Vekt på F-boks (=A-boks): 4,4 kg
- Ant. på europall: 30 (Storbritannia 39) deler

Logistiske data

- CTV-kode: 884330901000
- Opprinnelsesland: Tyskland

Sikkerhet

- UV-fri: ingen UV-stråler trenger gjennom filteret
- Ingen flimring: på grunn av høy frekvens på ballast, unngås hodepine
- Cenelec-sertifisert

Lett å bruke

- Brukerprotokoll på produktet
- Digitalt brukergrensesnitt: for tilbakemelding om energi og tid
- Energisøyle: , viser hvor mye energi som oppnås
- Digital timer
- Pause-funksjon
- Av/på-knapp

Føl deg energisk med bare 30 min om dagen

- Original Philips EnergyLight: lamper: 10,00 lux ved 20 cm, 2500 lux ved 60 cm

Komfortabelt lys

- Lysintensitetsdimmer

Enkel å plassere

- Justerbar vinkel: 20 grader
- Kompakt størrelse: 18 x 33 (D x B) cm

Indikator for tilfredsstillelse

- 94 % fornøyde brukere
- Beste kjøp: pris fra STIVA (2003) som etterfølger til HF 3305

Medisinsk utstyr

- Påviste helsefordeler



Utgivelsesdato
2009-07-28

Versjon: 3.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com