



Philips
EnergyLight



HF3308

Ole yhtä energinen

kuin aurinkoisena päivänä

Valoterapiaalaitte, joka antaa sinulle tarvitsemaasi päivänvaloa ja energiaa, ja jota voit käyttää juuri silloin kuin sinulle sopii.

Ammenna energiaa 30 minuuttia päivässä

- Original Philips EnergyLight -lamput

Helppo sijoittaa sopivalle etäisyydelle

- Säädettävä kallistuskulma

Turvallinen

- Ei UV-säteilyä

Todistetusti terveysvaikutteinen

- EU:n lääketieteellisiä laitteita koskevan direktiivin mukainen

PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

- Virta: 72 W
- Jännite: 220/230
- Taajuus: 50/60 Hz
- Lamppujen tyyppi: 2PL-L 36 W Philips EnergyLight
- Lamppujen käyttöikä: 10,000
- Liitäntälaitteen tyyppi: HF-R 236TLD (korkeataajuuksinen)
- Liitäntälaitteen käyttötaajuus: 42,000 kHz
- Lämmöneristys: II-luokka (kaksoiseristetty)
- Johdon pituus: 3 m

Paino ja mitat

- Tuotteen mitat: 33 x 57 x 18 (LxKxS) cm
- Tuotteen paino: 3,5 kg
- Tuotepakkauksen mitat (=tukkupakkaus): 36 x 62,2 x 21,5 (LxKxS) cm
- Tuotepakkauksen paino (=tukkupakkaus): 4,4 kg
- Euro-lavan kpl-määrä: 30 (UK 39) kpl

Logistiset tiedot

- CTV-koodi: 884330801000
- Alkuperämaa: Saksa

Turvallisuus

- Ei UV-säteilyä: UV-säteitä läpäisemätön UV-suodatinlevy
- Ei välky: korkea taajuus estää päänsäryn
- Cenelec-sertifioitu

Helppokäyttöinen

- Pikakäyttöohjeet laitteessa: Näyttää käyttöajan eri etäisyyksiltä
- Virtapainike

Ammenna energiaa 30 minuuttia päivässä

- Original Philips EnergyLight: lamput: 10 000 luksia/20 cm, 2 500 luksia/60 cm

Helppo sijoittaa

- Säädettävä kallistuskulma: 20 astetta
- Pienikokoinen: 18 x 33 (SxL) cm

Tyytyväisyysilmaisim


- 94 % asiakkaista tyytyväisiä

Terveystuote

- Todistetusti terveysvaikutteinen

Kohokohdat

Original Philips EnergyLight -lamput

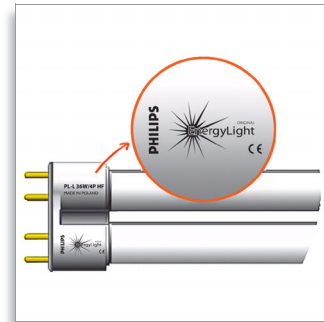

EnergyLight-valoterapialaitteessa on Philips EnergyLight -lamput, jotka tuottavat luonnollista päivänvaloa tehokkaasti ja laadukkaasti. Enimmäistehoitan 10 000 luksin lamput eivät häikäise tai heijasta. Jo 30 minuutin päivittäinen EnergyLight-laitteen käyttö (lamppua ei tarvitse katsoa koko ajan) 10 000 luksin teholla nostaa energiatasoasi ja piristää mieltäsi jo viidessä päivässä.

Säädettävä kallistuskulma



Laite voidaan säätää useisiin eri asentoihin.

Ei UV-säteilyä

EnergyLightissa käytetään luonnonvalon koko aallonpituutta. Laite on eurooppalaisten turvallisuusstandardien mukainen ja siinä on UV-suodatinlevy. Tämän vuoksi EnergyLight on täysin turvallinen.

EU:n lääketieteellisiä laitteita koskevan direktiivin mukainen



todistetusti terveysvaikutteinen ja Euroopan unionin lääketieteellisiä laitteita koskevan direktiivin (MDD) mukaisesti sertifioitu laite



Julkaisupäivä 2009-06-16

Versio: 4.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com