

# PHILIPS

IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

Lumea IPL 8000 Series

SmartSkin-sensor

4 intelligente opzetstukken: lichaam, gezicht, bikini, oksels

Lumea IPL-app

Gebruik met snoer



BRI948/00



## Persoonlijke behandeling met SenseIQ

Geniet 12 maanden lang van een haarloze, gladde huid\*

Geniet van een snelle en persoonlijke behandeling met onze Lumea IPL 8000-serie. SenseIQ-technologie met slimme opzetkoppen en Lumea IPL-app voor een langdurig gladde huid.

### Zacht en effectief voor een langdurig gladde huid

- Behandel slechts 2x per maand voor snelle resultaten
- Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor gemak en effectiviteit
- Extra lange kabel voor extra flexibiliteit tijdens behandelingen

### Volledige oplossing voor gezicht en lichaam

- Volledige oplossing voor gezicht en lichaam met 4 slimme opzetstukken
- Geschikt voor de meeste huidskleuren en haarkleuren

### Gepersonaliseerde IPL ontharingsbehandeling

- Zacht en comfortabel met SenseIQ
- Optimaliseer uw routine met de Philips Lumea IPL-app

# Kenmerken

## 2x per maand voor snelle resultaten




Begin om de twee weken — dat is de helft van het aantal behandelingen met andere merken. Gevolgd door slechts één keer per maand een touch-up. Dat is het. Het behandelen van beide onderbenen duurt 8,5 minuten.

## SenseIQ-technologie



Lumea 8000-serie heeft vijf eenvoudig aanpasbare lichtinstellingen. Onze SmartSkin-sensor leest uw huidtint en helpt u de meest comfortabele instelling te vinden. Slimme opzetstukken passen de behandeling aan voor elke lichaamszone.

## Extra lange kabel

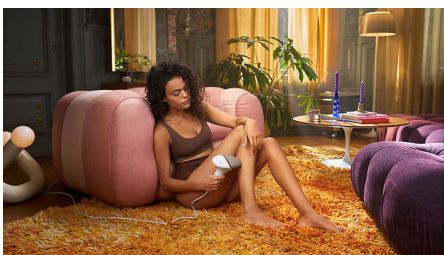

Handig in gebruik dankzij een extra lange kabel voor eenvoudige toegang en verbeterde beweegbaarheid.

## 4 slimme opzetstukken




Speciaal ontworpen opzetstukken passen voor elke curve van uw lichaam en zetten de meest effectieve programma's voor elk lichaamsdeel aan wanneer aangesloten. Gezicht: Plat ontwerp en klein venster met UV-filter. Lichaam: Naar binnen gebogen met groot venster. Bikini en oksel: Naar buiten gebogen voor moeilijk bereikbare plaatsen.

## Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen



Als leider op het gebied van gezondheidstechnologie heeft Philips Lumea IPL ontwikkeld in overleg met dermatologen, voor eenvoudig en effectief gebruik in de veiligheid van uw huis. Lumea IPL is afgeleid van technologie die in professionele salons wordt gebruikt en biedt een zachte behandeling, zelfs op gevoelige gebieden.

## Philips Lumea IPL-app

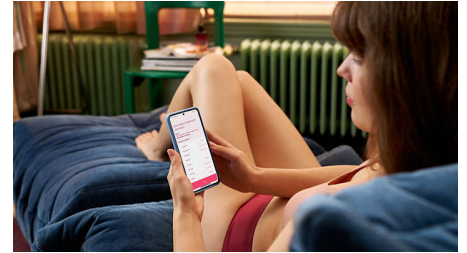

Onze gratis coaching-app helpt u met het plannen en vasthouden van uw behandelingschema, en leidt u stapsgewijs door iedere sessie. Door meer dan 2,1 miljoen gebruikers gedownload.

## Voor de meeste huid- en haartypes



IPL heeft contrast nodig tussen de pigmenten in de haarkleur en de huidtint en werkt daardoor op natuurlijk donkerblond, bruin en zwart haar en op huidtinten van licht tot donkerbruin (I-V).

# Specificaties

## Technische specificaties hulpstukken

**Lichaamsopzetstuk:** Vorm: bol gebogen,

Venstergrootte: 4,1 cm<sup>2</sup>, Afgestemde

lichaamsbehandeling: benen, armen en buik

**Opzetstuk voor het gezicht:** Vorm: plat,

Venstergrootte: 2 cm<sup>2</sup>, extra filter, Afgestemde

behandeling voor het gezicht: bovenlip, kin en kaaklijn

**Opzetstuk voor bikinilijn:** Vorm: hol gebogen,

Venstergrootte: 3 cm<sup>2</sup>, Afgestemde

behandeling voor gevoelige bikinilijn

**Opzetstuk voor de oksels:** Vorm: hol gebogen,

Venstergrootte: 3 cm<sup>2</sup>, Afgestemde

onderarmbehandeling

## Veiligheid en aan te passen standen

**Geïntegreerd UV-filter:** Beschermt uw huid tegen UV-straling

**5 lichtsterktes:** Aanpasbaar aan uw huidtype

**Geïntegreerd veiligheidssysteem:** Voorkomt

dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

**SmartSkin-sensor:** De juiste instelling op het juiste moment

## Toepassingsmodus

**Glij- en flitsmodus:** Voor snelle toepassing

**Met of zonder snoer te gebruiken:** Gebruik met snoer

**Stap en Flits:** Voor behandeling op kleine zones

## Technische specificaties

**Spanning:** 100-240 volt

**Lamp met hoge prestaties:** Duurzaam, 450.000 pulsen, gelijk aan een levensduur voor de lamp van 39 jaar\*\*

## Service

**Garantie:** 2 jaar algemene garantie plus 1 jaar extra garantie bij productregistratie binnen 90 dagen

## Meegeleverde artikelen

**Gebruiksaanwijzing:** Gebruiksaanwijzing

**Opbergen:** Opbergetui

**Adapter:** 19,5 V / 4000 mA

## Behandeltijd

**Oksels:** 2,5 min.

**Bikinilijn:** 2 min.

**Delen van het gezicht:** 1,5 min.

**Onderbenen:** 8,5 min.

