

PHILIPS

sonicare

聲波電動牙刷

4200 Series

內置壓力感應器

1 種清潔模式

1 個 BrushSync 刷牙模式配對功能

HX6801/37



溫和護理，牙齒更潔白。

一週即可令牙齒更潔白。

選用配備壓力感應器的牙刷，體驗溫和潔淨的效果，只需一星期即可令牙齒更潔白

證實能改善口腔健康

- 溫和保護敏感部位、矯正牙齒和牙科治療
- 一週即可令牙齒更潔白

Designed around you

- 透過容易上手的程序培養使用 Philips Sonicare 的習慣
- 鼓勵徹底刷牙
- 令旅行更輕鬆愜意
- 隨時知道何時要更換刷頭

創新技術

- 當您的刷牙力度過大時提醒您
- Philips Sonicare 聲波科技
- 連接智能牙刷手柄和智能牙刷刷頭

產品特點

令牙齒更自然潔白



插上 W2 Optimal White 刷頭，可除去牙齒殘留的牙菌膜，展露更潔白的笑容。中央密集的去漬刷毛經臨床證實，只需短短一週就可潔白牙齒。

Philips Sonicare 聲波技術



Philips Sonicare 聲波科技可以將水份推向牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。

BrushSync 技術



透過智能刷頭內的微型晶片，智能刷頭可同時與智能牙刷手柄配對，並作出更換刷頭提示。

BrushSync 刷頭更換提示



所有刷頭在使用一段時間後都會磨損。但我們的 BrushSync 技術會追蹤您的刷頭使用了多長的時間，以及您刷牙的力度大小。需要更換時，刷柄上的燈光會亮起，而且會發出嗶聲通知您。這樣您就可以確保自己的刷頭有發揮作用。

監控您的刷牙力度




刷牙力度過大可能損害牙齒和牙齦。為免牙齒和牙齦受損，Philips Sonicare ProtectiveClean 會發出有規律的溫和響聲，提升您減輕力度。

安全而溫和




保證為您帶來安全的刷牙體驗：我們的聲波科技適合用於齒列矯正器、補牙、牙冠和瓷貼面，並可避免蛀牙和改善牙齦健康。

形成新的生活習慣

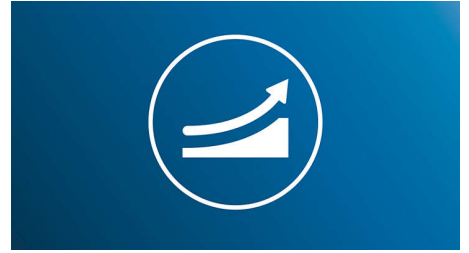

新事物是需要時間去適應的。我們的簡易程序能助您上手，您可從最先的14次新牙刷使用中選擇逐步輕柔地增加刷牙的力度。

實用的計時器

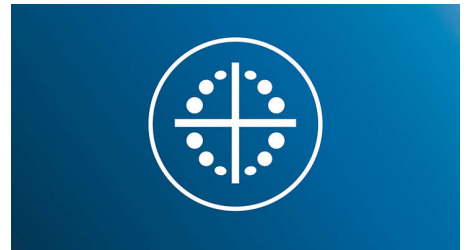

需要具備定時功能的電動牙刷？我們的 QuadPacer 可讓您知道自己是否有足夠的時間清潔口腔每個部位，而我們的 Smartimer 可通知您刷牙的時間是否達到推薦的兩分鐘。

輕便旅行收藏盒和充電器



我們的旅行收藏盒可讓您存放牙刷並保持衛生，而我們的輕便充電座可讓您外出時也能充電。如果正常使用，單次完全充電可使用兩週，但有了充電器，您就可安心踏上更長的旅途。

規格

電源

電壓: 110-220 V

技術規格

電池: 可重複充電

操作時間 (從完全充電到沒電): 長達 2 星期

電池類型: 鋰離子電池

設計和外表

顏色: 棕色

服務

保用: 2 年有限保養

方便易用

手柄: 人體工學設計

兼容手柄: 簡便扣合式刷頭

電量指示燈: 電量指示燈可顯示電量狀態

刷牙時間: 長達 2 星期

更換刷頭提示: 時刻確保最佳效果, 更換刷頭提示亮起

內含物件

旅行收藏盒: 1

手柄: 1 4200 系列

充電器: 1

刷頭: 1 個 W2 最佳美白

清潔效能

效能: 可清除多達 7 倍牙菌膜*

健康功能: 可有效防止蛀牙

速度: 每分鐘刷動高達 62000 次

美白效果: 一週即可令牙齒更潔白

計時器: 四時段計時器與智能計時器

力度感應: 震動手柄提醒使用者

模式

清潔: 日常清潔效果出眾

2 段強度: 高, 低

智能感測器技術

力度感應: 提醒使用者減低刷牙時的力度

BrushSync 刷頭更換提示: 隨時知道, 何時要更換刷頭

