

# PHILIPS

## sonicare

Spazzolino elettrico  
sonico con app

ExpertClean 7300

Spazzolamento connesso e  
semplice

Sensore di pressione integrato

Riconoscimento intelligente  
testina

3 modalità, 3 intensità



HX9641/01



## Tecnologia intelligente per sane abitudini di igiene orale

Una pulizia completa per le esigenze dei tuoi pazienti.

Philips Sonicare ExpertClean funge da guida personalizzata alla pulizia dei denti per i tuoi pazienti, utilizzando la tecnologia SmartSensor e i report dei progressi per monitorare le abitudini e fornire feedback, migliorando quindi la tecnica di pulizia dei denti e la routine di igiene orale quotidiana.

### Proven to improve oral health

- Superficie di contatto più ampia per la rimozione della placca
- Cura delle gengive per una migliore salute

### Aiuta a migliorare l'igiene orale dei pazienti

- Rimuove 10 volte più placca\* per una pulizia profonda
- Gengive fino a 7 volte più sane\* in sole 2 settimane

### Progettato su misura per il tuo paziente

- 3 modalità, 3 intensità
- Avvisa i pazienti in caso di batteria scarica
- Per una pulizia più efficace ogni giorno
- Guida i pazienti a utilizzare la corretta quantità di pressione
- Aiuta i pazienti a migliorare le proprie abitudini di igiene orale
- Le testine selezionano automaticamente le impostazioni ottimali


## In evidenza

### Rimuove fino a 10 volte più placca\*




La testina C3 Premium Plaque Defence offre una pulizia più profonda. Le setole, dotate di bordi morbidi e flessibili, si adattano alla forma di ciascun dente per offrire una superficie di contatto fino a 4 volte più ampia\*\*\* e rimuovere fino a 10 volte più placca dalle zone difficili da raggiungere\*.

### Gengive fino a 7 volte più sane\*

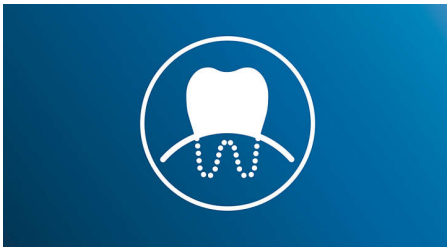

La testina G3 Premium Gum Care migliora la salute delle gengive dei pazienti. Le dimensioni ridotte e le setole specifiche offrono una pulizia delicata ma efficace lungo il bordo gengivale, dove hanno origine i problemi alle gengive. È clinicamente testata per ridurre le infiammazioni delle gengive fino al 100%\* e per garantire gengive fino a 7 volte più sane in appena due settimane.\*

### Progress Report

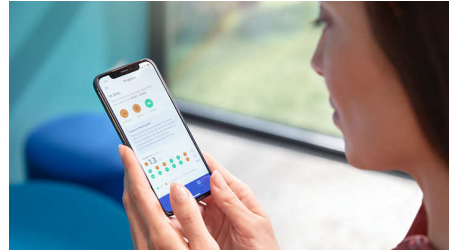

I sensori monitorano e misurano i comportamenti di pulizia dei pazienti mentre l'impugnatura dello spazzolino Philips Sonicare ExpertClean fornisce un feedback immediato. Nel tempo, l'app Sonicare registra e analizza queste abitudini e genera un report dei progressi per promuovere una migliore tecnica di pulizia.

### 3 modalità, 3 intensità



Con tre modalità di pulizia (Clean, Gum Health, DeepClean+) e tre impostazioni di intensità (bassa, media, alta), i tuoi pazienti possono personalizzare la propria esperienza di pulizia per ottenere un comfort ottimale e una pulizia completa. Visualizza le specifiche per informazioni più dettagliate sulle modalità.


### Riconoscimento intelligente testina



Un microchip nella testina si sincronizza con l'impugnatura di Philips Sonicare ExpertClean. Se un paziente inserisce una testina C3

Premium Plaque Control/Defense/Defence, G3 Premium Gum Care o W3 Premium White, lo spazzolino seleziona automaticamente la modalità e il livello di intensità ottimali. I pazienti devono solo iniziare a spazzolare. Aiuta i pazienti ad avere le impostazioni migliori per le migliori prestazioni in base alle loro esigenze.

### Sensore di pressione

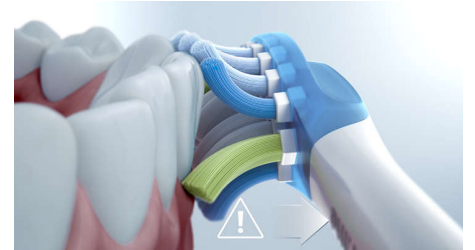

Se i pazienti applicano una pressione eccessiva, il sensore intuitivo della pressione farà pulsare lievemente l'impugnatura e fornirà ai pazienti il feedback in tempo reale di cui hanno bisogno per esercitare meno pressione. Da uno studio condotto su pazienti americani, 7 pazienti su 10 che spazzolavano troppo energicamente hanno ridotto la pressione esercitata proprio grazie all'intervento del sensore di pressione.\*\*\*\*

### C3 Premium Plaque Defence



C3 Premium Plaque Control è la nostra testina che offre la pulizia più profonda. Le setole, dotate di bordi morbidi e flessibili, si adattano alla forma di ciascun dente per offrire una superficie di contatto 4 volte più ampia e rimuovere fino a 10 volte più placca dalle zone difficili da raggiungere.\*

# Specifiche

## Connettività

**Tecnologia wireless Bluetooth®:** App per la pulizia denti connessa

## Assorbimento

**Voltaggio:** 110-220 V

## Specifiche tecniche

**Autonomia (da completamente carica a scarica):** 14 giorni\*\*\*

**Batteria:** Ricaricabile

**Tipo di batteria:** Agli ioni di litio

## Aspetto e rifiniture

**Colore:** Bianco e blu chiaro

## Assistenza

**Garanzia:** Garanzia limitata di 2 anni

## Compatibilità

**Compatibilità Android:** Telefoni Android, Tablet con tecnologia Bluetooth 4.0

**Compatibilità iOS:** iPad 3a gen o superiore, iPhone 4S o successivo, con iOS7 o successivo, con sistema operativo iOS7

## Facilità d'uso

**Compatibilità del manico:** Testine ad aggancio semplice

**Manico:** Design ergonomico e compatto

**Avviso di sostituzione:** Per garantire sempre risultati ottimali, l'icona del promemoria si illumina

## Accessori inclusi

**Testine:** 1 C3 Premium Plaque Defence, 1 G3 Premium Gum Care

**Manico:** 1 ExpertClean

**Caricabatterie:** 1

## Prestazioni di pulizia

**Prestazioni:** Rimuove fino a 10 volte più placca\*

**Benefici per la salute:** Gengive fino a 7 volte più sane\*

**Velocità:** Fino a 62000 movimenti/min

**Effetto denti più bianchi:** Aiuta a rimuovere in modo naturale le macchie

**Timer:** BrushPacer e SmarTimer

**Feedback sulla pressione esercitata:**

Vibrazione del manico per avvertire l'utente

## Modalità

**3 intensità:** Bassa, Media, Alta

**Clean:** Per un'eccezionale pulizia quotidiana

**Deep Clean+:** Per una pulizia profonda

**Gum Health:** Attenzione particolare per i molari

## Associazione con modalità BrushSync

**C3 Premium Plaque Defence:** Associazione con la modalità Clean

**Testina Premium Gum Care G3:** Associazione con la modalità Gum Health

## Tecnologia con sensore di movimento intelligente

**Sensore di pressione:** Avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva

**Promemoria per la sostituzione della testina**

**BrushSync:** Per sapere sempre quando, sostituire la testina

**Tecnologia BrushSync:** Connette il manico e, la testina intelligente

## Supporto software

**Aggiornamenti software:** Philips offre i relativi aggiornamenti software per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto.

