

# PHILIPS

Escova de dentes elétrica com app

DiamondClean 9000

Sensor de pressão integrado

Reconhecimento inteligente da cabeça

4 modos, 3 intensidades

Escovagem assistida através de app



HX9911/03



## Dentes mais brancos e mais saudáveis para toda a vida

### Dentes mais brancos em apenas 1 dia\*

O melhor branqueamento Philips Sonicare na nossa escova de dentes elétrica sónica mais elegante. Mude para a Sonicare.

#### Enjoy a stylish and user-friendly design

- Fácil de carregar e design elegante
- Carregamento para até duas semanas de autonomia da bateria

#### DiamondClean users experience improved oral health

- Remova até 100% mais manchas\* em apenas 3 dias
- As manchas desaparecem para um sorriso mais brilhante e mais branco

#### Let the DiamondClean 9000 adapt to your needs

- Experiência de escovagem personalizada
- Permite-lhe saber se está a escovar com demasiada força
- Saiba sempre quando substituir as cabeças da escova

#### Stay on track with a personalized progress report

- Comece e mantenha hábitos saudáveis

## Destaque

### Remove até 5 vezes mais manchas\*\*\*




Livre-se das manchas superficiais e desfrute de um sorriso mais branco com a cabeça de escova W3 Premium White. As cerdas densas da cabeça da escova foram especialmente concebidas para eliminar manchas. Além disso, foi comprovado clinicamente que removem até 100% mais manchas em apenas três dias.\*\*\*

### Cabeça de escova W3 Premium White



Encaixe a cabeça de escova W3 Premium White para remover as manchas superficiais e revelar o seu sorriso mais branco. As suas cerdas densas da zona central de remoção de manchas branqueiam os dentes desde a primeira utilização.

### Relatório de progresso

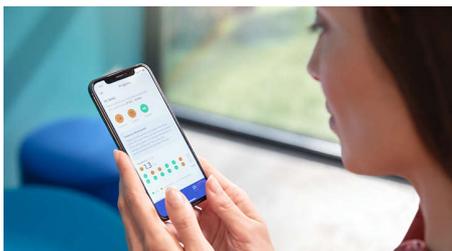

A DiamondClean 9000 oferece-lhe a orientação de que necessita para melhorar e manter hábitos de escovagem saudáveis entre


exames de rotina no dentista. Os sensores inteligentes incorporados permitem-lhe saber quando está a utilizar demasiada pressão e, se associar a sua experiência de escovagem à aplicação Sonicare, o relatório de progresso personalizado ajuda a monitorizar o seu percurso para estar a par das suas melhorias ao longo do tempo.

### 4 modos, 3 intensidades



A DiamondClean 9000 oferece os modos Clean, White+, Gum Health e Deep Clean+ para satisfazer as suas necessidades de escovagem. O modo Clean destina-se a uma limpeza diária excepcional, o modo White+ destina-se à remoção de manchas, o modo Gum Health oferece uma limpeza suave e eficaz das gengivas e o modo Deep Clean+ proporciona uma limpeza profunda revigorante. As três intensidades permitem-lhe escolher entre uma definição mais alta que melhora a limpeza e uma mais baixa para bocas mais sensíveis.

### Sensor de pressão integrado

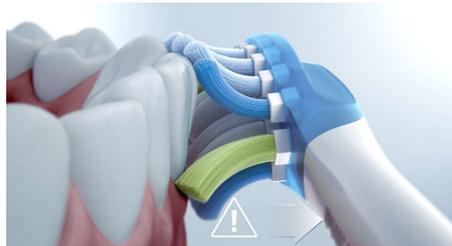

Poderá não notar que está a escovar com demasiada força, mas a DiamondClean 9000 nota. Se precisar de aplicar menos pressão, a escova de dentes emite um som pulsante. Trata-se de um lembrete para aliviar a pressão

e deixar a cabeça da escova fazer o trabalho. 7 em cada 10 pessoas consideraram que esta função as ajudou a escovarem melhor os seus dentes.

### Lembrete de substituição BrushSync



Todas as cabeças de escova se desgastam ao longo do tempo, por isso, deve manter-se atento para garantir que continua a obter uma limpeza excelente. A nossa tecnologia BrushSync regista há quanto tempo está a utilizar a cabeça da escova e a pressão da sua escovagem. O lembrete de substituição BrushSync na pega e um breve sinal sonoro avisam quando for altura de a substituir.

### Bateria de longa duração



A DiamondClean 9000 dura até duas semanas com um único carregamento em utilização regular.

# Especificações

## Conetividade

**Tecnologia sem fios Bluetooth®:** Aplicação de escovagem conectada

## Potência

**Voltagem:** 110–220 V

## Especificações técnicas

**Pilha:** Recarregável

**Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia):** 14 dias\*\*\*

**Tipo de pilha:** Iões de lítio

## Design e acabamento

**Cor:** Branco

## Assistência

**Garantia:** 2 anos de garantia limitada

## Compatibilidade

**Compatibilidade Android:** telemóveis Android, tablets com Bluetooth 4.0

**Compatibilidade iOS:** iPad 3.ª geração ou superior, iPhone 4S ou superior, com o iOS7 ou superior, com o sistema operacional iOS7

## Fácil de utilizar

**Compatibilidade da pega:** Cabeças de escova de encaixe fácil

**Pega:** Design ergonómico esguio

**Lembrete de substituição:** Para garantir sempre os melhores resultados, o ícone de aviso acende-se

## Itens incluídos

**Cabeças de escova:** 1 W3 Premium White

**Pega:** 1 DiamondClean 9000

**Estojo de viagem:** Estojo de viagem para carregamento por USB

**Carregador de copo:** 1

**Base de carregamento:** 1

## Desempenho de limpeza

**Benefícios de branqueamento:** Branqueia os dentes em 1 dia\*

**Temporizador:** BrushPacer e SmartTimer

**Resposta da pressão:** A pega vibra para alertar o utilizador

## Modos

**Limpeza:** Para limpeza diária excepcional

**3 intensidades:** Baixa, Média, Elevada

**Limpeza profunda+:** Para uma limpeza profunda revigorante

**Saúde das gengivas:** Atenção especial aos molares

**Branco+:** Para eliminar manchas da superfície

## Tecnologia de sensor inteligente

**Lembrete de substituição BrushSync:** Saiba sempre quando, substituir a cabeça da escova

**Sensor de pressão:** Alerta quando estiver a escovar com demasiada força

**Tecnologia BrushSync:** Ligação entre pega inteligente e, cabeça de escova inteligente

