

# PHILIPS

## sonicare

Elektrická sonická  
zubná kefka

ProtectiveClean  
6100

Zabudovaný senzor tlaku

3 režimy, 3 stupne intenzity

2 x funkcia BrushSync

Cestovné puzdro



HX6877/29



## Belšie zuby, jemnejšia starostlivosť.

### Vybieli zuby už za 1 týždeň.

Pocíťte, o čo jemnejšie je čistenie so snímačom tlaku, a dosiahnite pritom belšie zuby už za 1 týždeň.

#### Proven to improve oral health

- Bezpečná a jemná na citlivých miestach, ortodontických pomôckach a opravených zuboch
- Zosvetlí zuby už za jeden týždeň

#### Navrhnuté pre vás

- Podpora dôkladného čistenia
- Zjednodušuje cestovanie

#### Innovative technology

- Majte vždy prehľad o potrebe výmeny kefkových nástavcov
- Pokročilá sonická technológia radu Philips Sonicare
- Prepája rúčku inteligentnej kefky s kefkovými nástavcami
- Upozorní vás, ak pri čistení príliš zatlačíte na zuby

#### Optimize your brushing

- Tri režimy, tri nastavenia intenzity
- Kefkové nástavce vyberú optimálny režim a intenzitu


# Hlavné prvky

## Prirodzene svetlejšie zuby



Nasadíte kefkový nástavec W2 Optimal White, odstránite zo zubov povrchové škvrny a odhaľte belší úsmev. Je klinicky dokázané, že vďaka stredovým hustým vláknam na odstraňovanie škvŕn zosvetlí zuby už za jeden týždeň.

## Čistíte si zuby po svojom

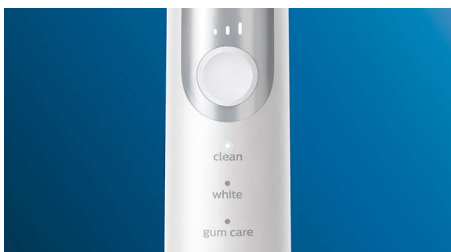

Táto zubná kefka vám umožňuje prispôbiť si čistenie prostredníctvom troch režimov a troch nastavení intenzity. Režim Clean je štandardom pre vynikajúce čistenie. White je ideálny režim na odstraňovanie povrchových škvŕn. A režim Gum Care pridá ďalšiu minútu čistenia so zníženým výkonom, počas ktorej si môžete jemne masírovať ďasná. Tri nastavenia intenzity vám umožňujú prepínať poradie vyššej a nižšej intenzity a zosúladiť tak intenzity zľava doprava.

## Bezpečná a jemná



Môžete sa spoľahnúť na bezpečné čistenie: naša sonická technológia je vhodná na použitie so strojčkami na zuby, plombami, korunkami a zubnými fazetami a pomáha zlepšovať zdravie ďasien.

## Príliš veľa tlaku?



Vy si nemusíte všimnúť, že pri čistení príliš tlačíte, ale vaša elektrická zubná kefka so snímačom tlaku si to všimne. Ak začnete príliš namáhať svoje ďasná, zubná kefka zapulzuje, čím vám pripomenie, že by ste mali tlačiť jemnejšie.

## Technológia BrushSync



Technológia mikročipu, ktorá rozpoznáva a synchronizuje inteligentný kefkový nástavec s inteligentnou rúčkou. Inteligentná rúčka skombinovaná s inteligentným kefkovým nástavcom je výkonná kombinácia, ktorá umožňuje používať inteligentné párovanie a inteligentné pripomenutia výmeny.

## Párovanie režimov a intenzity



Váhate, ktorý režim a intenzitu zvoliť? Už nemusíte. Mikročip v kefkovom nástavci oznámi vašej inteligentnej kefke, ktorý inteligentný kefkový nástavec práve používate. Takže, ak napríklad nasadíte kefkový nástavec na starostlivosť o ďasná, zubná kefka automaticky zvolí optimálny režim a intenzitu na poskytnutie starostlivosti o ďasná. Jediné, čo musíte urobiť, je stlačiť vypínač.

## Pripomenutie výmeny s funkciou BrushSync




Všetky kefkové nástavce sa časom opotrebnú. Ale naša technológia BrushSync sleduje, ako dlho používate svoj kefkový nástavec a akou silou si čistíte zuby. Keď nastane čas na jeho výmenu, rozsvieti sa kontrolka na rúčke a zaznie krátke pípnutie. Vďaka tomu môžete mať istotu, že váš kefkový nástavec funguje na maximum.

## Technológia Philips Sonicare



Pokročilá sonická technológia zubných kefieku radu Philips Sonicare v pravidelných intervaloch vstrekuje vodu medzi zuby a jej stery narušujú a následne zotru povlak, vďaka čomu zabezpečí každodenné výnimočné čistenie.

## Praktické časovače

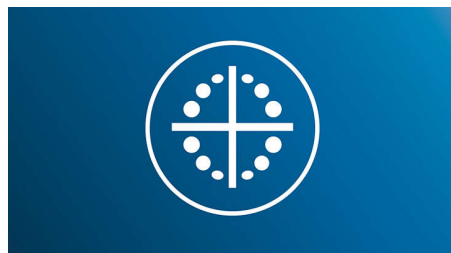

Naše počítadlo QuadPacer zaisťuje, aby ste venovali čisteniu jednotlivých častí úst ten správny čas, kým časovač Smartimer vás upozorní po čistení zubov odporúčané dve minúty.

# Technické údaje

## Príkon

Napätie: 110 – 220 V

## Technické špecifikácie

Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné vybitie): Až 2 týždne

Batéria: Nabíjateľná

Typ batérie: Lítium-iónová

## Dizajn a povrchová úprava

Farba: Strieborná biela

## Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

## Jednoduché použitie

Telo: Štíhly ergonomický tvar

Ukazovateľ stavu batérie: Indikátor signalizuje úroveň nabitia batérie

Kompatibilita rúčky: Kefkové nástavce s jednoduchým nadsadením

Čas čistenia: Až 2 týždne

## Pribalené príslušenstvo

Cestovné puzdro: 1

Telo: 1 ProtectiveClean

Kefkové nástavce: 2 kefkové nástavce W2 Optimal White

Nabíjacia jednotka: 1

## Výsledky čistenia

Prínosy pre zdravie: Zlepší zdravotný stav ďasien už za dva týždne, Pomáha obmedziť vznik zubného kazu

Frekvencia: Až 62 000 pohybov kefky za minútu

Časovač: Quadpacer a SmarTimer

Spätaná väzba na použitý tlak: Rukoväť zavibruje, aby upozornila používateľa

## Režimy

3 stupne intenzity: Nízka, Stredná, Vysoká

Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu

Starostlivosť o ďasná: Jemne masíruje ďasná

Biela: Odstraňuje povrchové zafarbenie

## Párovanie režimov BrushSync

Kefkový nástavec C2 Optimal Plaque Control:

Párovanie s režimom Clean

Kefkový nástavec G2 Optimal Gum Care:

Párovanie s režimom Gum Care

W2 Optimal White: Párovanie s režimom White

## Technológia inteligentných senzorov

Senzor tlaku: Upozornenie pri príliš silnom čistení

Pripomenutie výmeny s funkciou BrushSync:

Majte vždy prehľad o potrebe, výmeny kefkových nástavcov

Technológia BrushSync: Prepája inteligentnú rúčku s, inteligentný kefkový nástavec

