

# PHILIPS

## sonicare

Sonická zubná  
kefka s 1 režimom

4300

Zabudovaný senzor tlaku

1 režim čistenia

1 x funkcia BrushSync



HX6807/63



## Zlatý stred

Odstráňte až 7-krát viac plaku než manuálna zubná kefka

Jedna z najpredávanejších elektrických zubných kefiek na Slovensku\*. Kombinuje super výkonnú techniku zotierania povlaku a pritom je za dostupnú cenu. „Už po prvom vyčistení mám pocit úplne iných zubov,“ hovoria ľudia, keď kefku skúsia, a prejdú jazykom po hladkých zuboch bez povlaku. \*na základe GfK dát z roku 2023

### Proven to improve oral health

- Odstráňte až 7 x viac povlaku vďaka kefkovému nástavcu InterCare\*
- Bezpečná a jemná na citlivých miestach, ortodontických pomôckach a opravovaných zuboch

### Navrhnuté pre vás

- Skvelý spôsob, ako si zvyknúť na novú zubnú kefku
- Podpora dôkladného čistenia

### Innovative technology

- Majte vždy prehľad o potrebe výmeny kefkových nástavcov
- Prepája rúčku inteligentnej kefky s kefkovými nástavcami
- Pokročilá sonická technológia radu Philips Sonicare
- Upozorní vás, ak pri čistení príliš zatlačíte na zuby

# Hlavné prvky

## Odstráňte až 7 x viac povlaku



Nasadíte kefkový nástavec InterCare a vylepšíte stav ďasien už za dva týždne. Výnimočne dlhé vlákna pomáhajú odstrániť viac povlaku z ťažko dostupných miest a medzi zubami a prispievajú tak k zdravým ďasnám.

## Bezpečná a jemná




Môžete sa spoľahnúť na bezpečné čistenie: naša sonická technológia je vhodná na použitie so strojčkami na zuby, plombami, korunkami a zubnými fazetami a pomáha zlepšovať zdravie ďasien.

## Technológia Philips Sonicare



Pokročilá sonická technológia zubných kefiék radu Philips Sonicare v pravidelných intervaloch vstrekuje vodu medzi zuby a jej stery narušujú a následne zotru povlak, vďaka čomu zabezpečí každodenné výnimočné čistenie.

## Príliš veľa tlaku?

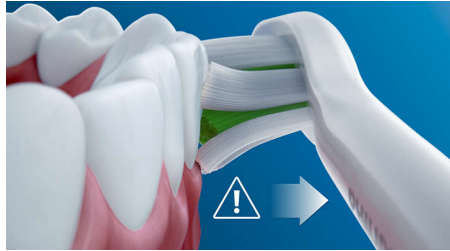

Vy si nemusíte všimnúť, že pri čistení príliš tlačíte, ale vaša elektrická zubná kefka so snímačom tlaku si to všimne. Ak začnete príliš namáhať svoje ďasná, zubná kefka zapulzuje, čím vám pripomenie, že by ste mali tlačiť jemnejšie.

## Technológia BrushSync



Technológia mikročipu, ktorá rozpoznáva a synchronizuje inteligentný kefkový nástavec s inteligentnou rúčkou. Inteligentná rúčka skombinovaná s inteligentným kefkovým nástavcom je výkonná kombinácia, ktorá umožňuje používať inteligentné pripomenutia výmeny.

## Pripomenutie výmeny s funkciou BrushSync



Všetky kefkové nástavce sa časom opotrebojú. Ale naša technológia BrushSync sleduje, ako dlho používate svoj kefkový nástavec a akou


silou si čistíte zuby. Keď nastane čas na jeho výmenu, rozsvieti sa kontrolka na rúčke a zaznie krátke pípnutie. Vďaka tomu môžete mať istotu, že váš kefkový nástavec funguje na maximum.

## Program jednoduchého začiatku Easy-start



Na začiatku niečoho nového si niekedy človek musí najprv zvyknúť. Naš program jednoduchého začiatku vám dáva možnosť postupného, jemného zvyšovania intenzity čistenia počas prvých 14 použití vašej novej zubnej kefy.

## Praktické časovače

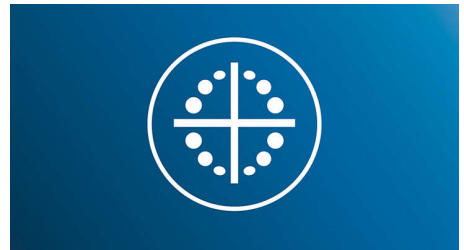

Naše počítadlo QuadPacer zaisťuje, aby ste venovali čisteniu jednotlivých častí úst ten správny čas, kým časovač Smartimer vás upozorní po čistení zubov odporúčané dve minúty.

# Technické údaje

## Príkon

Napätie: 110 – 220 V

## Technické špecifikácie

Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné vybitie): Až 2 týždne

Batéria: Nabíjateľná

Typ batérie: Lítium-iónová

## Dizajn a povrchová úprava

Farba: Biela a mentolová

## Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

## Jednoduché použitie

Telo: Štíhly ergonomický tvar

Ukazovateľ stavu batérie: Indikátor signalizuje úroveň nabitia batérie

Kompatibilita rúčky: Kefkové nástavce s jednoduchým nadsadením

Čas čistenia: Až 2 týždne

## Príbalené príslušenstvo

Kefkové nástavce: 1 kefkový nadstavec i InterCare, štandardná veľkosť

Telo: 1 ProtectiveClean

Nabíjacia jednotka: 1

## Výsledky čistenia

Prínosy pre zdravie: Pomáha obmedziť vznik zubného kazu

Frekvencia: Až 62 000 pohybov kefky za

minútu

Charakteristika: Odstráni až 7 x viac povlaku\*

Časovač: Quadpacer a SmarTimer

Spätná väzba na použitý tlak: Rukoväť zavibruje, aby upozornila používateľa

## Režimy

Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu

2 stupne intenzity: Nízka, Vysoká

## Technológia inteligentných senzorov

Senzor tlaku: Upozornenie pri príliš silnom čistení

Pripomenutie výmeny s funkciou BrushSync:

Majte vždy prehľad o potrebe, výmeny kefkových nástavcov

