

PHILIPS

sonicare

Elektrická sonická
zubná kefka

3 Series gum health

1 režim

3 nastavenia intenzity

1 kefkový nástavec



HX6631/01



Zlepšuje stav ďasien až o 100 %*

*v porovnaní s umývaním zubov manuálnou zubnou kefkou

Výkonná a jednoducho použiteľná zubná kefka poskytuje najúčinnšie odstraňovanie povlaku a starostlivosť o ďasná, pomáha vám zabrániť a predchádzať poškodeniu ďasien a zároveň vám ponúka ten najprijemnejší zážitok z čistenia zubov

Pomáha vám dodržiavať odporúčania zubných lekárov

- Časovač SmartTimer pomáha dodržať odporúčaný čas čistenia zubov
- Počítadlo intervalov Quadpacer podporuje dôkladné čistenie

Zlepšuje stav ďasien účinnejšie než umývanie man. zubnou kefkou

- Efektívnejšia na odstránenie gingivitídy ako ručná zubná kefka
- Odstraňuje až 6x viac povlaku pozdĺž ďasien
- Dynamické čistenie Sonicare vháňa tekutinu do medzizubných priestorov

Offers a customized brushing experience

- Tri nastavenia intenzity na jemnejšie čistenie

Odporúčané odborníkmi na starostlivosť o chrup z celého sveta

- Dokázateľne zlepšuje zdravie ďasien 3 spôsobmi
- Bezpečná na použitie na zubné náhrady, korunky a po zubnom ošetrení


Hlavné prvky

Zlepšuje zdravie ďasien 3 spôsobmi




Je klinicky dokázané, že kefka zlepšuje zdravie ďasien 3 spôsobmi: redukuje začervenanie, opuchy a krvácanie.

Zabraňuje a redukuje gingivitídu

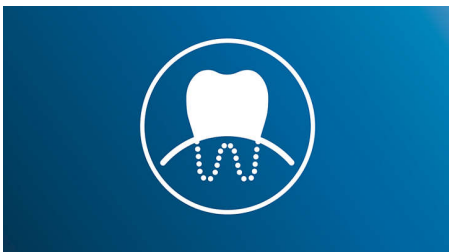

Vďaka vynikajúcemu odstraňovaniu zubného povlaku pozdĺž línie ďasien môže táto zubná kefka pomôcť redukovat zápal ďasien až o 100 % lepšie ako manuálna zubná kefka už za dva týždne.

Tri nastavenia intenzity

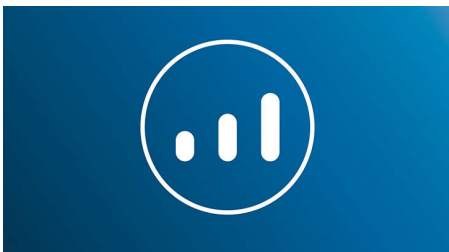

Vďaka trom upraviteľným nastaveniam intenzity (nízka, stredná, vysoká) si môžete vybrať správnu úroveň intenzity a zaručiť tak pohodlné čistenie pozdĺž ďasien. Po 1,5

sekunde čistenia dvojitým stlačením tlačidla zmeníte režim. Prvým stlačením čistenie pozastavíte, druhým prepnete režim.

Až 6x lepšie odstránenie povlaku



Odstraňuje až 6x viac povlaku pozdĺž ďasien ako manuálna zubná kefka

Sonická technológia



Naša sonická technológia zaručuje jedinečné dynamické čistenie, ktoré vháňa tekutinu hlboko do medzizubných priestorov a pozdĺž ďasien pre dôkladné a zároveň jemné čistenie.

Bezpečná a jemná




Jemný pohyb elektrickej kefky Philips Sonicare je bezpečný na použitie po zubnom ošetrovaní, na zubné náhrady, implantáty a korunky, takže si zuby môžete čistiť bez obáv.

SmarTimer



Elektrická zubná kefka Philips Sonicare je vybavená špeciálnym časovačom SmarTimer, ktorý vám pomôže dodržať čas čistenia zubov dve minúty, ako odporúčajú zubári.

Quadpacer

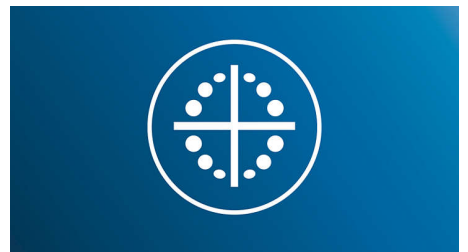

Kefka je vybavená počítadlom intervalov Quadpacer, ktoré pomáha podporovať dôkladné čistenie celých úst. Zubná kefka pípne každých 30 sekúnd, čo znamená, že je čas presunúť sa do inej oblasti úst.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Perzská zelená

Príkon

Napätie: 110 – 220 V

Technické špecifikácie

Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné vybitie): Až 3 týždne**

Batéria: Nabíjateľná

Typ batérie: Lítium-iónová

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

Jednoduché použitie

Telo: Štíhly ergonomický tvar

Systém kefkového nastavca: Kefkové nastavce s jednoduchým nadsadením

Ukazovateľ stavu batérie: Indikátor signalizuje úroveň nabitia batérie

Čas čistenia: Až 3 týždne**

Príbalené príslušenstvo

Kefkové nastavce: 1 nastavec ProResults pre zdravšie dásna

Telá: 1 rukoväť radu 3 Series pre zdravšie dásna

Nabíjacia jednotka: 1

Výsledky čistenia

Prínosy pre zdravie: Zlepšuje zdravotný stav ďasien

Frekvencia: Až 31 000 sterov kefky za minútu

Výkon: Odstráni až šesťkrát viac povlaku*

Časovač: Quadpacer a SmartTimer

Režimy

3 stupne intenzity: Nízka, Stredná, Vysoká

Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu

