

PHILIPS

sonicare



Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro

6100

Zabudovaný senzor tlaku

3 režimy, 3 stupne intenzity

2 x funkcia BrushSync

Cestovné puzdro



HX6877/28

Zlatý stred

Vybieli zuby už za 1 týždeň.

Jedna z najpredávanejších elektrických zubných kefiek na Slovensku*. Kombinuje super výkonnú techniku zotierania povlaku a pritom je za dostupnú cenu. „Už po prvom vyčistení mám pocit úplne iných zubov,“ hovoria ľudia, keď kefku skúsia, a prejdú jazykom po hladkých zuboch bez povlaku. Okrem režimu Clean má zubná kefka ešte režim White a Gum Care. Vaše zuby budú belšie už za týždeň. *na základe GfK dát z roku 2023

Proven to improve oral health

- Bezpečná a jemná na citlivých miestach, ortodontických pomôckach a opravovaných zuboch
- Zosvetlí zuby už za jeden týždeň

Navrhnuté pre vás

- Podpora dôkladného čistenia
- Zjednodušuje cestovanie

Innovative technology

- Upozorní vás, ak pri čistení príliš zatlačíte na zuby
- Majte vždy prehľad o potrebe výmeny kefkových nástavcov
- Pokročilá sonická technológia radu Philips Sonicare
- Prepája rúčku inteligentnej kefky s kefkovými nástavcami

Optimize your brushing

- Tri režimy, tri nastavenia intenzity
- Kefkové nástavce vyberú optimálny režim a intenzitu

Hlavné prvky

Prírodné svetlejšie zuby



Nasadíte kefkový nástavec W2 Optimal White, odstránite zo zubov povrchové škvrny a odhalíte belší úsmev. Je klinicky dokázané, že vďaka stredovým hustým vláknam na odstraňovanie škvŕn zosvetlí zuby už za jeden týždeň.

Čistíte si zuby po svojom



Táto zubná kefka vám umožňuje prispôbiť si čistenie prostredníctvom troch režimov a troch nastavení intenzity. Režim Clean je štandardom pre vynikajúce čistenie. White je ideálny režim na odstraňovanie povrchových škvŕn. A režim Gum Care pridá ďalšiu minútu čistenia so zníženým výkonom, počas ktorej si môžete jemne masírovať ďasná. Tri nastavenia intenzity vám umožňujú prepínať poradie vyššej a nižšej intenzity a zosúladiť tak intenzity zľava doprava.

Bezpečná a jemná




Môžete sa spoľahnúť na bezpečné čistenie: naša sonická technológia je vhodná na použitie so strojčkami na zuby, plombami, korunkami a zubnými fazetami a pomáha zlepšovať zdravie ďasien.

Technológia Philips Sonicare



Pokročilá sonická technológia zubných kefiek radu Philips Sonicare v pravidelných intervaloch vstrekuje vodu medzi zuby a jej stery narušujú a následne zotru povlak, vďaka čomu zabezpečí každodenné výnimočné čistenie.

Monitorujte svoj tlak pri čistení

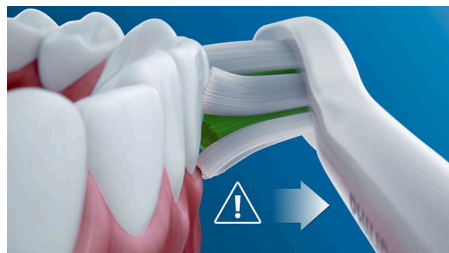

Príliš silné čistenie zubov môže poškodiť zuby a ďasná. Aby ste tomu zabránili, kefka Philips Sonicare ProtectiveClean vydáva jemný pulzujúci zvuk, ktorý vás upozorní, aby ste zmiernili tlak.

Technológia BrushSync



Technológia mikročipu, ktorá rozpoznáva a synchronizuje inteligentný kefkový nástavec s inteligentnou rúčkou. Inteligentná rúčka skombinovaná s inteligentným kefkovým nástavcom je výkonná kombinácia, ktorá umožňuje používať inteligentné párovanie a inteligentné pripomenutia výmeny.

Párovanie režimov a intenzity



Váhate, ktorý režim a intenzitu zvoliť? Už nemusíte. Mikročip v kefkovom nástavci oznámi vašej inteligentnej kefke, ktorý inteligentný kefkový nástavec práve používate. Takže, ak napríklad nasadíte kefkový nástavec na starostlivosť o ďasná, zubná kefka automaticky zvolí optimálny režim a intenzitu na poskytnutie starostlivosti o ďasná. Jediné, čo musíte urobiť, je stlačiť vypínač.


Hlavné prvky

Pripomenutie výmeny s funkciou BrushSync



Všetky kefkové nástavce sa časom opotrebujú. Ale naša technológia BrushSync sleduje, ako dlho používate svoj kefkový nástavec a akou silou si čistíte zuby. Keď nastane čas na jeho výmenu, rozsvieti sa kontrolka na rúčke a zaznie krátke pípnutie. Vďaka tomu môžete mať istotu, že váš kefkový nástavec funguje na maximum.

Praktické časovače

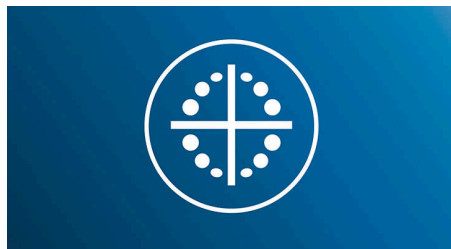

Hľadáte elektrickú zubnú kefku s časovačom? Naše počítadlo QuadPacer zaisťuje, aby ste venovali čisteniu jednotlivých častí úst ten správny čas, kým časovač Smartimer vás upozorní po čistení zubov odporúčané dve minúty.

Praktické cestovné puzdro a nabíjačka



Prvotriedne cestovné puzdro vám umožní uskladniť zubnú kefku hygienicky a kompaktný nabíjací podstavec vám dodá energiu na cestách. Už na jedno plné nabitie budete môcť zubnú kefku používať pravidelne dva týždne a nabíjačka zaisťuje komfort aj na dlhších cestách.

Technické údaje

Príkon

Napätie: 110 – 220 V

Technické špecifikácie

Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné vybitie): Až 2 týždne

Batéria: Nabíjateľná

Typ batérie: Lítium-iónová

Spotreba energie: Pohotovostný režim bez displeja <0,5 W

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Strieborná biela

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

Jednoduché použitie

Telo: Štíhly ergonomický tvar

Ukazovateľ stavu batérie: Indikátor signalizuje úroveň nabitia batérie

Kompatibilita rúčky: Kefkové nástavce s jednoduchým nadsadením

Čas čistenia: Až 2 týždne

Pribalené príslušenstvo

Telo: 1 ProtectiveClean

Kefkový nástavec: 1 kefkový nástavec W2

Optimal White

Cestovné puzdro: 1

Nabíjacia jednotka: 1

Výsledky čistenia

Prínosy pre zdravie: Zlepší zdravotný stav ďasien už za dva týždne, Pomáha obmedziť vznik zubného kazu

Časovač: Quadpacer a SmarTimer

Frekvencia: Až 62 000 pohybov kefky za minútu

Spätná väzba na použitý tlak: Rukoväť zavibruje, aby upozornila používateľa

Režimy

Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu

3 stupne intenzity: Nízka, Stredná, Vysoká

Biela: Odstraňuje povrchové zafarbenie

Starostlivosť o ďasná: Jemne masíruje ďasná

Párovanie režimov BrushSync

Kefkový nástavec C2 Optimal Plaque Control:

Párovanie s režimom Clean

Kefkový nástavec G2 Optimal Gum Care:

Párovanie s režimom Gum Care

W2 Optimal White: Párovanie s režimom White

Technológia inteligentných senzorov

Senzor tlaku: Upozornenie pri príliš silnom čistení

Prípomenutie výmeny s funkciou BrushSync:

Majte vždy prehľad o potrebe, výmeny kefkových nástavcov

Technológia BrushSync: Prepája inteligentnú rúčku s, inteligentný kefkový nástavec

