



Philips Sonicare  
ProtectiveClean 4100  
ソニックケア プロテクト  
クリーン

過圧防止センサー  
1つのクリーニングモード  
ブラシヘッド認識機能



HX6811/05

歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進  
化した。

手磨きより多くの歯垢を除去

過圧防止センサーで歯ぐきにやさしく。

**お口の健康を推進**

- 歯ぐきの健康を推進
- やさしくブラッシング

**使いやすさ重視の設計**

- イージースタート機能
- 一定の間隔でお知らせするカドパーサー機能
- ブラシヘッド交換お知らせ機能

**新機能**

- 過圧防止センサー機能
- 音波水流

**PHILIPS**

**sonicare**

# 特長

## 歯垢をしっかり除去



密集した高品質の毛先が歯肉縁の歯垢を除去し、歯ぐきの健康を推進。また、湾曲した毛先は奥歯にも簡単に届きます。

## やさしくブラッシング



音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニア）にも適しており、やさしく磨きます。

## 音波水流



1分間に約31,000回の高速振動と幅広い振幅の組み合わせにより音波水流を発生。

歯間と歯肉縁もしっかりとやさしく磨きます。／画像はイメージです

## 過圧防止センサー機能




歯と歯ぐきへの圧力を感知。ハンドルに振動で伝えて、歯と歯ぐきをやさしくブラッシングできます。／画像はイメージです

## ブラシヘッド交換お知らせ機能




ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします（RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合）。

## イージースタート機能

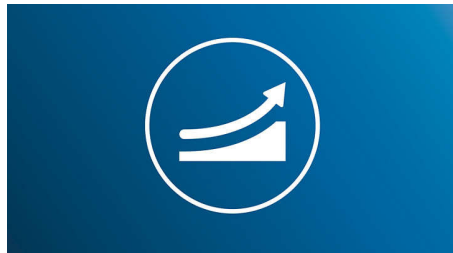

フィリップス ソニックケアでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから14回にかけて徐々にパワーを上げていきます。

## 一定の間隔でお知らせするカドパーサー機能

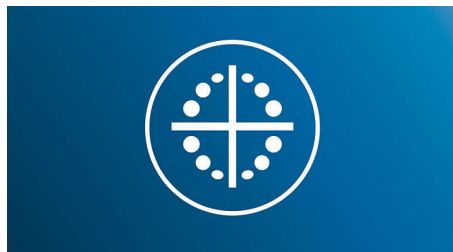

磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏の4つのセクションを均等にブラッシングできます。

# 仕様

## デザインと仕上げ

- 色: ネイビーブルー

## 電源

- 対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

## 仕様

- 充電電池: 充電式
- 使用時間: 約 2 週間
- 充電電池の種類: リチウムイオン充電電池

## サービス

- 本体保証: 2 年間保証

## 使いやすさ

- 充電電池表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示
- ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- ハンドル: スリムなデザイン
- 使用時間: 約 2 週間

## 内容

- ブラシヘッド: C2 オプティマルブラークディフェンス 1 本
- 充電器: 1
- ハンドル: プロテクトクリーンプラス 1 本

## 洗浄性能

- ブラシ振動数: 約 62000 ブラシストローク/分
- 健康上の利点: 虫歯予防を助ける
- 性能: 最大 7 倍の歯垢\*
- タイマー: カドペーサーとスマートタイマー
- 過圧に関するフィードバック: ハンドルが振動してお知らせ

## モード

- クリーン: 歯をキレイに

## スマートセンサーテクノロジー

- 過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときにお知らせ
- ブラシヘッド交換お知らせ機能: ○ (RFID 内蔵ブラシヘッドを使用した場合), ブラシヘッドの交換時期



Philips Japan, Ltd.

発行日 2022-01-29

バージョン: 4.0.3

EAN: 08 71010 39241 04

株式会社フィリップス・ジャパン  
© 2022 Philips Japan, Ltd.  
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* クリーンモードで 2 分間のブラッシングを 1 日 2 回