

# PHILIPS

## sonicare

ソニックケア プロテクト  
クリーン

ProtectiveClean  
4300

過圧防止センサー

1つのモード

ブラシヘッド認識機能



HX6803/66



歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進化した。

手磨きより多くの歯垢を除去

過圧防止センサーで歯ぐきにやさしく磨く。

#### お口の健康を推進

- 歯ぐきの健康を推進
- やさしくブラッシング

#### 使いやすさ重視の設計

- イージースタート機能
- 一定の間隔でお知らせするカドベーター機能
- ブラシヘッド交換お知らせ機能

#### 新機能

- 過圧防止センサー機能
- 音波水流

# 特長

## 歯ぐきの健康を推進



密集した高品質の毛先が歯肉縁の歯垢を除去し、歯ぐきの健康を推進。また、湾曲した毛先は奥歯にも簡単に届きます。

## やさしくブラッシング



音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニア）にも適しており、やさしく磨きます。


## 音波水流



毎分約 31,000 ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動

きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。／画像はイメージです

## 過圧防止センサー機能

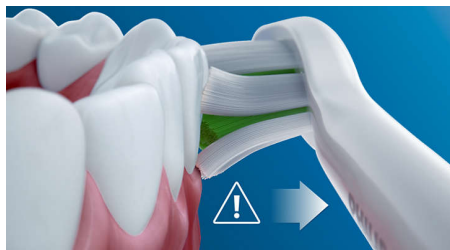

歯と歯ぐきへの圧力を感知。ハンドルに振動で伝えて、歯と歯ぐきをやさしくブラッシングできます。／画像はイメージです

## ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします（RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合）。

## イージースタート機能



フィリップス ソニックアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。

## 一定の間隔でお知らせするカドベーター機能



磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏の4つのセクションを均等にブラッシングできます。

# 仕様

## 電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

## 仕様

バッテリー: 充電式

使用時間: 約 2 週間

バッテリーの種類: リチウムイオン充電電池

## デザインと仕上げ

色: ライトブルー

## サービス

本体保証: 2年間保証

## 使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン

使用時間: 約 2 週間

## 内容・付属品

ハンドル: プロテクトクリーンプラス 1本

充電器: 1

ブラシヘッド: C2 クリーンプラス 1本, ホワイトプラス (コンパクト) 1本

## 洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

性能: 歯垢を除去

健康上の利点: 歯垢を除去

タイマー: カドペーサーとスマートタイマー

過圧に関するフィードバック: ハンドルが振動してお知らせ

## モード

クリーン: 歯をキレイに

2段階の強さ設定: 弱, 強

## スマートセンサーテクノロジー

ブラシヘッド交換お知らせ機能: ○ (RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合), ブラシヘッドの交換時期

過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときにお知らせ

\* クリーンモードで2分間のブラッシングを1日2回

