

# PHILIPS

## sonicare

Sonická elektrická zubná kefka s aplikáciou

DiamondClean Smart 9400

Osobné rady

Inteligentné senzory hlavice kefký

Inteligentné rozpoznávanie hlavice

4 režimy, 3 stupne intenzity

HX9917/89



## Kompletná starostlivosť pre zdravšie zuby

Cítte sa sebaisto s pokrytím 100 % ústnej dutiny

Kefka DiamondClean Smart 9400 je zubná kefka na komplexnú starostlivosť. Kefkové nástavce s vysokým výkonom vám umožnia sústrediť sa na všetky oblasti zdravia vašej ústnej dutiny. Naša technológia inteligentných snímačov vám poskytuje prispôbené usmernenia a spätnú väzbu.

### Personalized in-app coaching to perfect brushing


- Vrátí vás späť na všetky vynechané miesta, aby ste dosiahli 100 % vyčistenie zubov
- Upozorní vás, ak pri čistení príliš zatlačíte na zuby
- Začnite sa lepšie starať o svoje problémové oblasti
- Nasmeruje vás na očistenie a zvýrazní vynechané miesta
- Navádza k nižšej intenzite drhnutia

### Optimize your brushing

- Kefkové nástavce s automatickou voľbou optimálnych nastavení
- Vyberte si spomedzi 4 režimov a 3 stupňov intenzity
- Jednoduché a štýlové nabíjanie – doma aj na cestách
- Využívajte kefkový nástavec naplno


# Hlavné prvky

## 4 režimy, 3 stupne intenzity

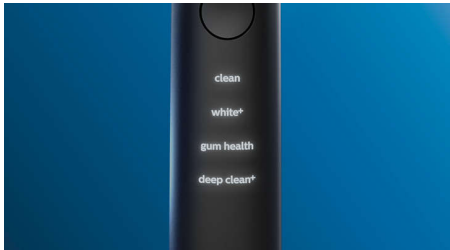


Sonická kefka DiamondClean Smart sa postará o vaše zuby. Vďaka 3 stupňom nastavenia intenzity zlepšíte účinok čistenia a 4 režimy pokrývajú rôzne potreby pri čistení; režim Clean je určený na každodenné výnimočné čistenie, režim White+ je určený na odstraňovanie povrchových škvŕn, režim Deep Clean+ poskytuje osviežujúce hĺbkové čistenie a režim Gum Health umožňuje jemné ale účinné čistenie ďasien.

## Nikdy nevynechá žiadne miesto

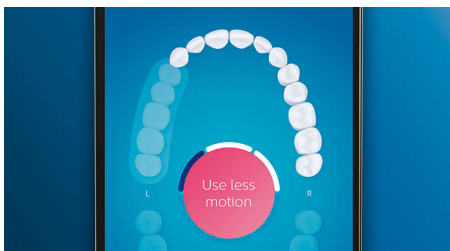


Aplikácia Philips Sonicare vás upozorní, keď dosiahnete dôkladné vyčistenie a naučí vás, ako lepšie a starostlivejšie používať zubnú kefku.

## Funkcia TouchUp

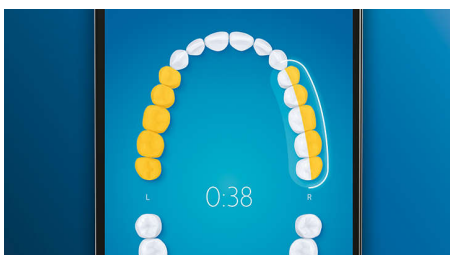


Ak sa stane, že počas čistenia zubov vynecháte niektoré miesto, funkcia aplikácie TouchUp vám to ukáže. Môžete sa tak na dané miesto vrátiť a vyčistiť ho znova a byť si istí, že vaše zuby sú dokonale vyčistené, pri každom čistení.

## Inteligentné pripomienky na výmenu

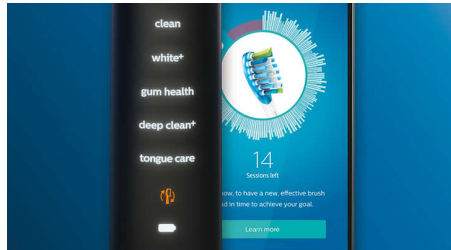


Kefkové nástavce sa časom opotrebojú a ich účinnosť pri odstraňovaní povlakov sa znižuje. Vďaka inteligentnému rozpoznávaniu kefkových nástavcov budete vždy vedieť, kedy je kefkový nástavec potrebné vymeniť. Vaša zubná kefka sleduje čas a intenzitu čistenia s každým kefkovým nástavcom a upozorní vás, keď bude potrebné ich vymeniť. Životnosť kefkových nástavcov môžete tiež sledovať v aplikácii Philips Sonicare a dokonca si objednať náhradné nástavce, aby vám nikdy nechýbali.

## Zameranie na oblasti a nastavenie cieľov

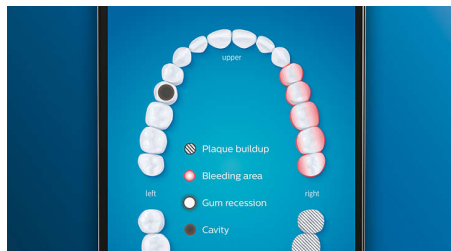

Poukázal váš zubár na niektoré problémové oblasti? Zdôrazníme ich na vašej 3D mape úst v aplikácii, ktorá vám pripomenie, aby ste týmto oblastiam venovali dodatočnú pozornosť.

## Príliš veľa tlaku?

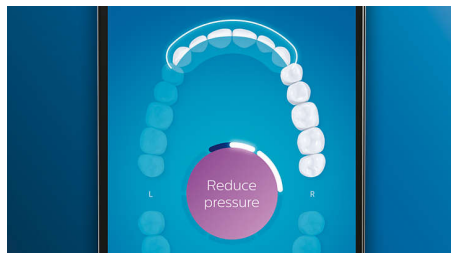

Nemusíte si všimnúť, že pri čistení používate príliš veľkú silu, ale vaša kefka DiamondClean Smart si to určite všimne. Pri použití príliš veľkého tlaku sa rozsvieti svetelný kruh na konci rúčky. Služí ako upozornenie, aby ste


znižili tlak na zuby a nechali kefkový nástavec robiť si svoju prácu. 7 z 10 používateľov si vďaka tejto funkcii zlepšilo techniku čistenia zubov.

## Na jednoduchosť záleží



Pri používaní elektrickej kefky nechávate všetku prácu na ňu. Do rúčky sme zabudovali snímač drhnutia, ktorý vás upozorní, aby ste znížili intenzitu pohybov. Zlepšíte tým svoju techniku čistenia a získate jemnejšie a účinnejšie vyčistenie zubov.

## Párovanie režimov BrushSync

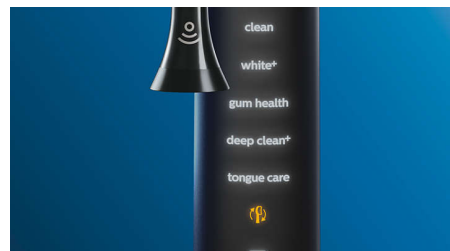

Váhate, ktorý režim a intenzitu zvolíte? Už nemusíte. Mikročip v kefkovom nástavci oznámi vašej kefke DiamondClean Smart, ktorý práve používate. Takže, ak napríklad nasadíte kefkový nástavec na starostlivosť o ďasná, zubná kefka automaticky zvolí optimálny režim a intenzitu na poskytnutie jemnej ale účinnej starostlivosti o vaše ďasná. Jediné, čo musíte urobiť, je stlačiť vypínač.

# Technické údaje

## Pripojiteľnosť

Bezdrôtová technológia Bluetooth®: Pripojená čistiaca aplikácia

## Príkon

Napätie: 110 – 220 V

## Technické špecifikácie

Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné vybitie): 14 dní\*\*\*

Batéria: Nabíjateľná

Typ batérie: Litium-iónová

## Dizajn a povrchová úprava

Farba: Čierna

## Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

## Kompatibilita

Kompatibilita so systémom Android: OS

Android 8,0 alebo novší

Kompatibilita so systémom iOS: iPhone s operačným systémom iOS 13,0 alebo novším

## Jednoduché použitie

Telo: Štíhly ergonomický tvar

Ukazovateľ stavu batérie: Podsvietená ikona ukazuje stav batérie

Kompatibilita rúčky: Kefkové nástavce s jednoduchým nadsadením

Rozpoznávanie kefkových nástavcov:

Synchronizácia s optimálnym režimom

Pripomenutie výmeny: Na zaručenie najlepších výsledkov, rozsvieti sa ikona pripomenky

## Pribalené príslušenstvo

Cestovné puzdro: Cestovné puzdro s nabíjaním cez USB

Kefkové nástavce: 1 kefkový nástavec All in-1 Premium, 1 kefkový nástavec Premium Gum Care G3

Telo: 1 DiamondClean Smart

Nabíjaci pohár: 1

## Výsledky čistenia

Frekvencia: Až 62 000 pohybov kefkы za minútu

Charakteristika: Odstraňuje až 10krát viac povlaku\*

Časovač: BrushPacer a Smartimer

Spätná väzba na použitý tlak: Kruh sa rozsvieti fialovou farbou, Rukoväť zavibruje, aby upozornila používateľa

TouchUp: Zaručuje 100 % pokrytie

## Režimy

3 stupne intenzity: Nízka, Stredná, Vysoká

Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu

Deep Clean+: Pre osviežujúce hĺbkové čistenie

Gum Health: Na jemné, no účinné čistenie ďasien

White+: Odstraňuje povrchové škvrny

## Párovanie režimov BrushSync

Kefkový nástavec G3 Premium Gum Care:

Párovanie s režimom Gum Health

Premium All-in-One: Párovanie s režimom Clean

## Technológia inteligentných senzorov

Senzor tlaku: Upozornenie pri príliš silnom čistení

Lokalizačný snímač: Sleduje a zlepšuje pokrytie

Snímač drhnutia: Navádza k nižšej intenzite drhnutia

3D mapa úst: Zdôrazňuje problémové miesta

TouchUp: Venuje pozornosť vynechaným miestam

## Softvérová podpora

Aktualizácie softvéru: Spoločnosť Philips ponúka príslušné aktualizácie softvéru po dobu 2 rokov od dátumu zakúpenia.

