

PHILIPS

sonicare

Sonic elektriskā
zobu birste

ProtectiveClean
4300

Iebūvēts spiediena sensors

1 tīrīšanas režīms

1 BrushSync funkcija



HX6848/92



Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.

Baltāki zobi tikai 1 nedēļas laikā.

Izjūtiēt atšķirību, pateicoties saudzīgai tīrīšanai ar spiediena sensoru, kas padara zobus baltākus 1 nedēļas laikā.

Proven to improve oral health

- Padara zobus baltākus tikai vienas nedēļas laikā

Innovative technology

- Vieglis atgādinājums tīrīt maigi un saudzīgi
- Zobu birstes uzgaļi maksimālam rezultātam un pacientu labsajūtai
- Philips Sonicare uzlabotā Sonic tehnoloģija
- Savieno viedo zobu birstes rokturi ar viedajiem uzgaļiem
- Uzlabo smaganu veselību tikai 2 nedēļās

Improves patients' oral health

- Plombes, kroņi vai jutīgas zonas? Nav pamata uztraukumiem.

Designed around your patient

- Lielisks veids, kā pierast pie savas jaunās zobu birstes
- Aicinājums tīrīt zobus rūpīgi


Izceltie produkti

Dabiski baltāki zobi



Uzlieciet W2 Optimal White birstes uzgali, lai notīrītu aplikumu un padarītu savu smaidu žilbinoši baltu. Birstes uzgaļa centrālajā daļā blīvi izvietotie sariņi noņem aplikumu, un ir klīniski pierādīts, ka tas spēj padarīt zobus baltākus tikai vienas nedēļas laikā.

Uzlabo smaganu veselību

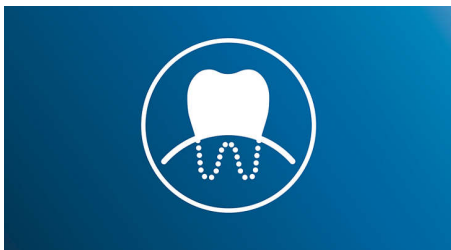

InterCare suku uzgalim ir īpaši gari, blīvi izvietoti augstas kvalitātes sariņi, kas piekļūst aplikumam dziļi zobu starpās. Ir klīniski pierādīts, ka šis uzgalis samazina smaganu asiņošanu un iekaisumu tikai divu nedēļu laikā.

Pārāk liels spiediens?



Pacienti var pat nepamanīt, ka tīra zobus ar pārmērīgu spēku, bet to pamanīs viņu zobu birste. Līdzko uz smaganām tiks izdarīts pārmērīgs spiediens, zobu birste ar skaņas signālu aicinās spiedienu samazināt.

Drošs un saudzīgs




Varat būt pārliecināts, ka zobu tīršana ir droša — Philips sonic tehnoloģija ir piemērota lietošanai breketēm, plombēm, kroņiem un venīriem, un tā palīdz novērst kariesa veidošanos un uzlabo smaganu veselību.

Philips Sonicare tehnoloģija



Philips Sonicare uzlabotā Sonic tehnoloģija raida ūdens plūsmu starp zobiem un tās birstes kustības atdala un notīra aplikumu, katru dienu nodrošinot izcilu tīrību.

Viedā nomainīšanas atgādināšanas funkcija

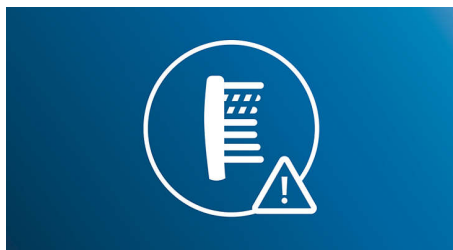

Visi zobu birstes uzgaļi ar laiku nolietojas. Philips tam ir radis risinājumu — viedā birstes uzgaļa atpazīšanas tehnoloģija nosaka, cik ilgi pacients ir lietojis konkrēto uzgali, kā arī to, cik spēcīgi ar to ir tīrīts. Kad būs pienācis laiks veikt uzgaļa nomaiņu, rokturī iedegsies gaismiņa un atskanēs īss skaņas signāls. Tādējādi pacienti var būt pārliecināti, ka birstes uzgalis vienmēr ir vislabākajā darba kārtībā.

Noderīgi taimeri




Philips QuadPacer tehnoloģija palīdz pacientiem tīrīt katru mutes dobuma zonu tieši tik ilgi, cik tas būtu ieteicams, savukārt viedais taimeris informē, kad ir pagājušas ieteicamās zobu tīršanas divas minūtes.

BrushSync tehnoloģija



Tehnoloģija ar mikročipu nosaka izmantoto gudru zobu birstes uzgali un sinhronizē to ar gudro zobu birstes rokturi. Gudrais rokturis un gudrie uzgaļi ir jaudīga kombinācija, kurā ļauj izveidot smart pāri un atgādina par smart uzgaļa nomaiņu.

Easy-start programma

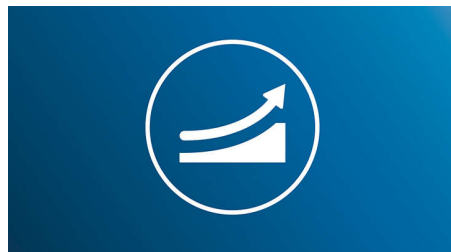

Sākot kaut ko jaunu, vispirms ir nepieciešams iepazīšanās periods. Tādēļ mūsu Easy-Start programma sniedz jums iespēju pirmās 14 tīršanas reizēs pakāpeniski un saudzīgi palielināt tīršanas jaudu.

Specifikācijas

Strāvas padeve

Spriegums: 110-220 V

Tehniskā specifikācija

Akumulators: Uzlādējams

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): Līdz 2 nedēļām

Akumulatora tips: Litija jonu

Dizains un apdare

Krāsa: Balta un zila

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Vienkārša lietošana

Akumulatora indikators: Lampiņa norāda baterijas statusu

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Roktura saderība: Viegli uzspraužami birstes uzgaļi

Zobu tīrīšanas ilgums: Līdz 2 nedēļām

Komplektā iekļautie piederumi

Suku uzgaļi: 1 W2c Optimal White, kompakts, 1 ic InterCare, kompakts, 1 Sensitive standarts

Rokturis: 1 ProtectiveClean

Lādētājs: 1

Tīrīšanas veiktspēja

Veselības ieguvumi: Uzlabo smaganu veselību tikai divās nedēļās, Samazina caurumu veidošanās risku

Ātrums: Līdz 62 000 birstes kustību/min

Taimeris: Quadpacer un SmarTimer

Informācija par tīrīšanas spiedienu: Rokturis vibrē, lai brīdinātu lietotāju

Režimi

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

2 intensitātes pakāpes: Zema, Augsta

Smart sensoru tehnoloģija

Spiediena sensors: Brīdina, ja tīrot tiek lietots pārmērīgs spiediens

BrushSync uzgaļa nomainas atgādinājums:

Vienmēr ziniet pareizo, uzgaļa nomainas brīdi

